



DTX Studio™ Clinic

Versio 4.10

Käyttöohjeet

Sisällysluettelo

Johdanto	6
Vastuuvapauslauseke	6
Laitteen kuvaus	6
Tarkoitus	6
Käyttötarkoitus/käyttöaiheet	6
Aiottu käyttäjä ja aiottu potilaskohderyhmä	6
Tuetut tuotteet	6
Vaadittu yhteensopivuus muiden laitteiden kanssa	7
Intraoraalisensorit	7
Intraoraalikamerat	7
Intraoraaliskannaus	7
Ohjelmisto	7
Mittaustoiminnolla varustetut laitteet	7
Vastaindikaatiot	7
Kyberturvallisuus	7
Kuinka toimia kyberturvallisuustapahtuman sattuessa?	8
Käytöstä poisto ja hävittäminen	8
Yhteentoimivuus	8
Aiottu käyttöikä	8
Suorituskykyä koskevat vaatimukset ja rajoitukset	8
Kliiniset hyödyt ja epätoivotut sivuvaikutukset	9
Vakavia vaaratilanteita koskeva ilmoitus	9
Käyttötilat ja koulutus	9
Ammattikäyttö	9
Järjestelmävaatimukset	9
Ohjelmiston asentaminen	9
Käsittelyohjeet	9
Huomiot/varotoimet ja varoitukset	10
Huomiot/varotoimet	10
Varoitukset	11
Järjestelmävaatimukset	13
Aloit	14
Ohjelmiston käynnistäminen	14
Ohjelmiston sulkeminen	14
DTX Studio Home -näkömön esittely	14
Ilmoitusalueen esittely	15

Asetusten muokkaaminen	15
Oletusarvot DTX Studio Home -asetusten muokkaaminen	15
Asetusten vieminen tai tuominen	15
Kielen ja päivämäärän/kellonajan muodon vaihtaminen	16
DICOM-yhteensopivuusasetusten muokkaaminen	16
Oletuskuvafilttareiden asettaminen	16
Intraoraalikuvien automaattisen kierron poistaminen käytöstä	16
Automaattisesti asetettujen ikkunoinnin syvyys- ja ikkunoinnin leveysarvojen poistaminen käytöstä	17
Yhteyden muodostaminen DTX Studio Core -ohjelmistoon	17
Pikakuvakkeen lisääminen toimintoruutuun	17
Practice Management System (PMS) -integroinnin ottaminen käyttöön	18
Implanttituotteiden asentaminen	18
TWIN-tuetun laitteen lisääminen	18
Kansion määrittäminen kolmannen osapuolen laitteiden kuvien havaitsemista varten	18
Oletusvientikansioiden määrittäminen	19
Automaattisen tallennuksen ottaminen käyttöön DTX Studio Clinic -ohjelmiston sulkemisen yhteydessä	19
Oppimisresurssit ja yhteyden ottaminen tukeen	19
Kaikkien oppimisresurssien ja pikanäppäimien näyttäminen	19
Yhteyden ottaminen asiakastukeen	19
 Keskeisten toimintojen yleiskatsaus	 20
 Potilastiedot	 21
Uuden potilastiedon luominen	21
Potilastietojen hallinta	21
Yksityisyysasetusten hallinta	21
Potilastietojen etsiminen ja järjestäminen	22
Potilasluettelon järjestäminen	22
Potilastiedon etsiminen	22
Potilastiedon vieminen	22
 Tietojen hallinta	 23
Tietojen tuominen	23
Kuvien tuominen kolmannen osapuolen laitteista	23
Kuvien tuominen vetämällä ja pudottamalla	23
Kuvien tuominen Clinic-moduulissa	23
Tuominen leikepöydältä	24
Tuominen 3Shape Dental Desktop -ohjelmistosta	25
Leikkaussuunnitelman tuominen	25
Tietojen valitseminen	25
Potilaskuvien valitseminen	25

Tietojen jakaminen	26
Potilastietojen jakaminen DTX Studio Go -palvelun kautta (GoShare-toiminnon kautta)	26
3D-esityksen jakaminen	27
2D-kuvien jakaminen sähköpostilla tai siirtäminen kolmannen osapuolen sovellukseen	27
Tietojen vieminen	27
Potilastiedon vienti	27
Potilastietojen vienti	28
Vienti 3D-röntgenkuvaikkunaan	28
DICOM-kuvien tulostaminen	28
Implanttisuunnitelman vienti X-Guide-ohjelmistoon	28
Kuvausten pyytäminen	29
Kuvauksen ajoittaminen	29
Kuvauspyyntöjen etsiminen ja järjestäminen	29
Kuvauspyyntöluettelon suodattaminen	29
Kuvauspyynnön etsiminen	30
Kuvauspyyntöjen hallinta	30
Kuvaustyönkulut	30
Kuvaustyönkulun määrittäminen	30
Kuvaustyönkulun ottaminen käyttöön	30
Kuvauksen suorittaminen	31
Ajoitetun kuvauksen suorittaminen	31
Välittömän kuvauksen suorittaminen	31
Ohjattu kuvien ottaminen intraoraalisensorien tai kuvanlukijoiden avulla	31
Vapaa kuvien ottaminen intraoraalisensorien tai kuvanlukijoiden avulla	32
Ohjattu kuvien ottaminen intraoraalikameroilla	33
Vapaa kuvien ottaminen intraoraalikameroilla	33
Intraoraaliskannaus	33
3Shape TRIOS® -skanneri	33
DEXIS-skannerit	34
Intraoraaliskannausdatan kaappaaminen	34
Skannaustapauksen avaaminen uudelleen	34
DEXIS IS ScanFlow -skannauksen jatkaminen	34
ScanFlow-lisäominaisuuksien ottaminen käyttöön	34
Diagnoosin tekeminen tai hoidon suunnittelu	35
Clinic-moduulin esittely	35
Potilasdiagnoositiedot	35
Diagnoosien hallinta	35
Hammaskartta	36
Hammaskartan muokkaaminen	36

Potilastiedot	37
3D- ja intraoraaliskannausten kuvaikkunoiden taustan asettaminen	37
Kuvien oletuszoomaustason asettaminen	37
Vuorovaikutus kuvaikkunoiden kanssa	38
Työtilat	39
Työtilojen mukauttaminen	43
Kaikkien liittyvien hammastietojen näyttäminen SmartFocus™-toiminnon avulla	43
Näkymien mukauttaminen SmartLayout™-toiminnon avulla	43
Kuvien liittäminen pikkukuvapalkista	44
Älypaneelin hammaskartta	44
Luun kynnistyksen säätäminen	45
Rekonstruoitujen leikkeiden säätäminen	45
3D-tilavuuden leikkaaminen	45
Intraoraalikameroiden käyttö työtiloissa	45
Potilaskuvien analysointi	45
Diagnostisten löydösten lisääminen	53
Kohdealueen tunnistus	53
Kohdealueen tunnistuksen aloittaminen	53
Kohdealueiden tunnistusten hallinta	54
Implanttien ja hoitojen suunnitteleminen	55
Automaattinen suunnitelma	55
Implantin asettaminen	55
Lisää ankkurointipinni	56
Implanttien asettaminen samansuuntaisiksi	56
Implanttien tai ankkurointipinnien lukitseminen	56
Kirurginen ohjuri	56
Kirurgisen ohjurin valmisteleminen	56
Kirurgisen ohjurin viimeistelemine	57
NobelGuide	57
NobelGuide-ohjurin luominen	57
NobelGuide-ohjurin tilaaminen	57
Implanttituotteiden tilaaminen	58
Raportit	58
Raporttien luominen	58
Mukautettujen klinikan logojen lisääminen	58
DTX Studio Implant -ohjelmiston avaaminen	59
DTX Studio Clinic- ja DTX Studio Implant -ohjelmistojen yhdistäminen	59
DTX Studio Implant -ohjelmiston käynnistäminen	59
Tilaukset ja yhteistyökumppanuudet	59
Leikkaussuunnitelman, kirurgisen ohjurin tai restauraation tilaaminen	59
Yhteyden muodostaminen yhteistyökumppaniin	60
Tilaaminen suoraan yhteistyökumppanilta	60
Kumppanitapauksen tarkasteleminen tai uusien tietojen lisääminen	60

Johdanto

Vastuuvapauslauseke

Tämä tuote on osa järjestelmäkokonaisuutta, ja sitä tulee käyttää vain yhdessä asianmukaisten alkuperäisten tuotteiden kanssa Nobel Biocaren (jäljempänä ”Yhtiö”) antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Muun valmistajan tuotteiden suositusten vastainen käyttö yhdessä Yhtiön tuotteiden kanssa mitätöi kaikki suorat ja epäsuorat takuut sekä muut velvoitteet. Tuotteiden käyttäjällä on velvollisuus ottaa selville, soveltuuko käytettävä tuote kyseiselle potilaalle ja kyseisiin olosuhteisiin. Yhtiö kiistää kaikki suorat ja epäsuorat velvoitteet eikä ota vastuuta mistään suorista tai välillisistä vahingoista, rangaistuskorvauksista tai muista vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat tuotteiden käyttöön liittyvästä virheestä tai virhearviosta tai syntyvät sellaisen yhteydessä. Käyttäjä on lisäksi velvollinen tutustumaan säännöllisesti tätä tuotetta ja sen sovelluksia koskeviin uusiin muutoksiin. Epäselvässä tilanteessa käyttäjän pitää ottaa yhteyttä Yhtiöön. Tätä tuotetta käytetään käyttäjän hallinnassa, joten sen käyttö on käyttäjän vastuulla. Yhtiö ei ota vastuuta mistään tuotteen käytön aiheuttamasta vahingosta.

Huomaa, että joitakin näissä käyttöohjeissa mainittuja tuotteita ei ehkä ole hyväksytty paikallisten säännösten mukaan tai ne eivät ehkä ole lisensoitavissa tai saatavissa kaikilla markkina-alueilla.

Lue nämä käyttöohjeet ennen DTX Studio™ Clinic -ohjelmiston käytön aloittamista ja säilytä ne myöhemmää tarvetta varten. Huomaa, että tässä asiakirjassa annettujen tietojen tarkoituksena on opastaa sinua ohjelman käyttöönnotossa.

Laitteen kuvaus

DTX Studio Clinic on hammaslääkäreille/lääkäreille tarkoitettu ohjelmistoliittymä, jota käytetään 2D- ja 3D-kuvantamistietojen nopeaan analysointiin hampaiston sekä kallon, leukojen ja kasvojen alueen vammojen ja sairauksien hoitamista varten. DTX Studio Clinic voi näyttää ja käsitellä erilaisista laitteista (esim. intraoraalisista ja suun ulkopuolisista röntgenlaitteista, (KK)TT-kuvauslaitteista, intraoraaliskannereista, intraoraalikameroista ja suun ulkopuolisista kameroista) saatuja kuvantamistietoja.

Tarkoitus

Ohjelmiston tarkoituksena on tukea hampaiston sekä kallon, leukojen ja kasvojen alueen toimenpiteiden diagnostista prosessia ja hoidon suunnittelua.

Käyttötarkoitus/ käyttöaiheet

DTX Studio Clinic on ohjelmisto hampaiston sekä kallon, leukojen ja kasvojen alueen kuvaamista sekä kuvatietojen hallintaa, siirtämistä ja analysointia varten. Sitä voidaan käyttää apuna epäiltyjen hammaslöydösten havaitsemisessa ja hampaiston korjausratkaisujen suunnittelussa.

Ohjelmisto voi näyttää ja parantaa eri lähteistä peräisin olevia digitaalisia kuvia diagnostisen prosessin ja hoidon suunnittelun tueksi. Sen avulla tällaisia kuvia voidaan tallentaa ja käyttää järjestelmän sisällä tai eri tietokonejärjestelmien välillä.

Aiottu käyttäjä ja aiottu potilaskohderyhmä

Moniammatillinen hoitotiimi käyttää DTX Studio Clinic -ohjelmistoa tukena hampaiston sekä kallon, leukojen ja kasvojen alueen hoitoja tarvitsevien potilaiden hoitamisessa.

Tuetut tuotteet

Kirurgisen ohjurin digitaalinen malli (STL).

Vaadittu yhteensopivuus muiden laitteiden kanssa

DTX Studio -ekosysteemi on yhteensopiva yleisimmin käytettyjen Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmien kanssa, mukaan lukien niiden uusimmat versiot.

DTX Studio Clinic on yhteydessä muihin lääkinnällisiin laitteisiin ja yhteensopiva aikaisempien DTX Studio Clinic -versioiden kanssa.

Intraoraalisensorit

DEXIS™ Titanium, DEXIS Platinum, GXS-700™, DEXIS IXS™, DEXIS IXS™ – S, Gendex™ GXS-700™, DEXIS™ Ti2, DEXIS™ Ti2 – S.

Intraoraalikamerat

DEXIS™ DexCAM™ 4 HD, DEXIS™ DexCAM™ 3, DEXIS™ DexCAM™ 4, Gendex™ GXC-300™, KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD, KaVo DIAGNOcam™, CariVu™, KaVo ERGOcam™ One.

Intraoraaliskannaus

Yhteensopiva MEDIT Link -ohjelmiston kanssa*

Yhteensopiva CS 3600/DEXIS IS 3600-, CS 3700/DEXIS IS 3700- ja CS 3800/DEXIS IS 3800-, DEXIS™ Imprevo -intraoraaliskannereita ja muita yhteensopivia malleja tukevan DEXIS™ IS ScanFlow™ -ohjelmiston kanssa.

Ohjelmisto

DTX Studio™ Core*, DTX Studio™ Implant, DTX Studio™ Go, DTX Studio™ Lab*, CyberMed OnDemand3D™*, Osteoid (ennen Anatomage) InVivo™.

* Tuote saatavilla vain Windows-käyttöjärjestelmään.

Ohjelmistoversion päivityksen jälkeen on suositeltavaa tarkistaa avointen potilastapausten ja/tai hoitosuunnitelman kriittiset asetukset sen varmistamiseksi, että nämä asetukset ovat oikein uudessa ohjelmistoversiossa. Väärät asetukset voivat johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai varsinaisen hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen.

Mittaustoiminnolla varustetut laitteet

Mittaustarkkuus on 0,1 mm lineaarisissa mittauksissa ja 0,1 astetta kulmamittauksissa, jotka perustuvat kuvauslaitteen käyttöohjeiden mukaan tehdyistä (kartiokeila-)TT-kuvauksista saatuihin syötekuvatietoihin, joiden vokselikoko on 0,5 mm x 0,5 mm x 0,5 mm.

DTX Studio Clinic ilmoittaa arvon pyöristettynä yhden desimaalin tarkkuudella käyttäjän valitsemien pisteiden perusteella.

Vastaindikaatiot

DTX Studio Clinic -ohjelmistolla ei ole todettuja vastaindikaatioita.

Kyberturvallisuus

Me valmistajan ominaisuudessa ja sinä terveydenhuoltopalvelujen tarjoajana vastaamme yhdessä vastaanottosi suojaamisesta kyberturvallisuushkia vastaan. Nobel Biocare on ryhtynyt varotoimiin sen varmistamiseksi, että ohjelmisto on suojattu tällaisilta uhilta.

Tietokoneessa, jolla DTX Studio Clinic -ohjelmistoa käytetään, on suositeltavaa olla aktiivinen ja päivitetty virusten ja haittaohjelmien torjuntaohjelma sekä oikein määritetty palomuuuri. Muussa tapauksessa luvaton pääsy ohjelmistoon voi olla mahdollista.

Yhteiskäytössä DTX Studio Core -ohjelmiston kanssa yhteys DTX Studio Core -ohjelmistoon on suositeltavaa muodostaa <https://n.kautta>. Katso DTX Studio Core -ohjelmiston käyttöohjeista ohjeet tämän yhteyden määrittämiseksi.

On suositeltavaa ottaa auditointilokit käyttöön asetuksissa ja varmistaa näiden lokien suojaus luvattomalta pääsylvä. Jos näin ei toimita, haitallista toimintaa ei ehkä havaita.

Lukitse tietokone aina, kun se jätetään ilman valvontaa. Muussa tapauksessa luvaton pääsy ohjelmistoon voi olla mahdollista.

Varmista, että vastaanoton tietoverkko on suojattu luvattomalta pääsylvä ja erotettu vierailijaverkosta. Muussa tapauksessa luvaton pääsy ohjelmistoon voi olla mahdollista.

Potilastietojen säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa, jotta voidaan toipua nopeasti odottamattomasta järjestelmävirheestä tai haitallisesta tapahtumasta, joka voi aiheuttaa tietojen menetyksen.

DTX Studio Clinic on suositeltavaa käynnistää ilman järjestelmävalvojan oikeuksia. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla kolmannen osapuolen suoritettavien haittaohjelmien tahaton käynnistäminen.

DTX Studio Clinic on suositeltavaa päivittää aina uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Muussa tapauksessa luvaton pääsy ohjelmistoon voi olla mahdollista.

Lisätietoja varmuuskopioinnista, palomuurista ja suojausasetuksista asennuksen aikana annetaan DTX Studio Clinic -ohjelmiston asennusoppaassa.

Ohjelmiston materiaaliluettelo (SBOM) on pyynnöstä saatavilla. Ota yhteyttä asiakastukeen (www.dtxstudio.com/en-int/support) kopion pyytämiseksi.

Kuinka toimia kyberturvallisuustapahtuman sattuessa?

Jos järjestelmä vaarantuu tietomurron tai haittaohjelman vuoksi, käyttäjä saattaa havaita tuotteen toiminnan ja/tai suorituskyvyn muutoksia. Tässä tapauksessa käyttäjää kehoitetaan ottamaan välittömästi yhteyttä asiakastukeen (www.dtxstudio.com/en-int/support).

Käytöstä poisto ja hävittäminen

Toimi seuraavasti, kun lopetat DTX Studio Clinic -ohjelmiston käytön tietokoneellasi tai hävität tietokoneen, johon DTX Studio Clinic on asennettu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat tiedot varmuuskopioidaan sovelluksesta tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti, jotta vältetään merkityksellisten tietojen menettäminen.
- Sovelluksen asennuksen poistaminen: poista sovellus laitteestasi noudattamalla käyttöjärjestelmän toimittajan ohjeita, jotta estät luvattoman pääsyn DTX Studio Clinic -ohjelmistoon ja siihen tallennettuihin tietoihin.

Yhteentoimivuus

DTX Studio Clinic on yhteensopiva seuraavien ohjelmistojen kanssa:

- DTX Studio Core
- DTX Studio Implant
- DTX Studio Go
- DTX Studio Lab
- CyberMed OnDemand3D
- MEDIT Link
- DEXIS IS ScanFlow
- DTX Studio Assist: lisätietoja on [DTX Studio Assistin käyttöohjeissa](#).

Aiottu käyttöikä

Ohjelmiston aiottu käyttöikä on kolme vuotta. Kun ohjelmistoa käytetään tuetuissa käyttöjärjestelmissä, se toimii jatkuvasti käyttötarkoituksensa mukaisesti.

Suorituskykyä koskevat vaatimukset ja rajoitukset

On tärkeää varmistaa, että DTX Studio Clinic -ohjelmistoa käytetään vain hyväksytyissä käyttöjärjestelmissä. Katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta [Järjestelmävaatimukset](#).

Kliiniset hyödyt ja epätoivotut sivuvaikutukset

DTX Studio Clinic on hampaiden tai kallon, leukojen ja kasvojen alueen hoidossa käytettävä komponentti. Hammaslääkärit ja lääkärit voivat odottaa ohjelmiston tukevan diagnostista prosessia ja hoidon suunnitteluprosessia.

Ohjelmiston kliinisiin hyötyihin kuuluvat

- kuvien visualisoinnin, analysoinnin ja merkintöjen mahdollistaminen diagnoosin tukemiseksi
- implanttisuunnittelun helpottaminen ja kirurgisten ohjuiden luominen hoitosuunnittelun parantamiseksi.

DTX Studio Clinic -ohjelmiston epätoivottuja sivuvaikutuksia ei ole havaittu.

Vakavia vaaratilanteita koskeva ilmoitus

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena on tapahtunut vakava vaaratilanne, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja kansalliselle viranomaiselle. Tämän laitteen valmistajan yhteystiedot vakavasta vaaratilanteesta ilmoittamista varten ovat seuraavat:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Käyttötilat ja koulutus

On erittäin suositeltavaa, että sekä ensikertalaiset että kokeneet implanttien, proteesien ja niihin liittyvien ohjelmistojen kliiniset käyttäjät käyvät läpi erityiskoulutuksen aina ennen uuden hoitomenetelmän käyttöönottoa.

Ohjelmiston tuntemuksen ja sen toiminnan ymmärryksen puute voi johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai varsinaisen hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen.

Nobel Biocare tarjoaa laajan valikoiman kursseja eri tieto- ja kokemustasoille.

Saat lisätietoja koulutussivustoltamme osoitteessa tw.dtxstudio.com.

Ammattikäyttö

DTX Studio Clinic on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

Järjestelmävaatimukset

Suosittelemme tarkistamaan [Järjestelmävaatimukset](#) ennen ohjelmiston asennuksen aloitusta. Jos haluat lisätietoja vähimmäisvaatimuksista ja/ tai suositelluista vaatimuksista, ota yhteyttä asiakastukeen. Ohjelmiston uudet versiot voivat edellyttää suurempia vaatimuksia laitteistolta tai käyttöjärjestelmältä.

Ohjelmiston asentaminen

Ohjelmiston asentamista koskevat tiedot löytyvät DTX Studio Clinic -ohjelmiston asennusoppaasta. Tämä asiakirja on ladattavissa käyttäjädokumentaation kirjastosta (ifu.dtxstudio.com). Jos ongelmia ilmenee tai tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun teknikkoon tai asiakastukeen (support@dtxstudio.com).

Käsittelyohjeet

Ohjelmiston käyttöä koskevat yksityiskohtaiset tiedot annetaan jäljempänä näissä käyttöohjeissa.

Huomiot/varotoimet ja varoitukset

Huomiot/varotoimet



Suosittellemme käyttäjille erityiskoulutusta ennen uuden hoitomenetelmän tai laitteen käyttöönottoa.

Mahdollisia komplikaatioita voidaan välttää työskentelemällä ensimmäisellä kerralla yhdessä sellaisen kollegan kanssa, jolla on kokemusta uudesta laitteesta tai hoitomenetelmästä.

Käyttäjän tulee varmistaa, että potilas liikkuu kuvausprosessin aikana mahdollisimman vähän virheellisen kuvauksen riskin vähentämiseksi.

Ohjelmiston tuntemuksen ja sen toiminnan ymmärryksen puute voi johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai varsinaisen hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen.

Ohjelmiston tarjoamia diagnostiikka- ja suunnittelutyökaluja käytettäessä on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

- tehtyjen indikaatioiden (visualisointien, mittausten, kriittisten rakenteiden, tuotujen tietojen, implanttisuunnitelmien) oikeellisuus
- automatisoitujen toimintojen, kuten MagicAssist-toiminnon, 3D-röntgenssegmentoinnin ja intraoraaliskannauksen kohdistuksen, tuottamien tulosten oikeellisuus
- potilastunnuksen oikeellisuus (kun potilastieto on avattu PMS-järjestelmien kautta sekä kuvauspyyntöjä luotaessa)
- tietojen ajantasaisuus, jotta ne eivät ole vanhentuneita.

Jos näin ei tehdä, riski diagnoosin ja hoidon suunnittelun korjaustarpeesta kasvaa. Tämä puolestaan voi johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai varsinaisen hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen.

Kuvantamislaitteita käytettäessä on suositeltavaa noudattaa erityistä varovaisuutta. Väärä käyttö voi johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen tai potilaan tarpeettoman suureen säteilyaltistukseen.

Kun ohjelmistosta viedään raportteja tai potilastietoja, on tärkeää pitää mielessä, että anonymisoimattomia potilastietoja saatetaan käyttää väärin tarkoituksiin ilman potilaan suostumusta.

Määritettyyn hampaiden numerointiin ja kuvaikkunoiden suuntamerkintöihin on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota. Väärin määritetty hampaan numero tai väärä potilaan suuntaus voi johtaa virheellisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen potilaalle.

Ohjelmistoversion päivityksen jälkeen on suositeltavaa tarkistaa avointen potilastapausten ja/tai hoitosuunnitelman kriittiset asetukset sen varmistamiseksi, että nämä asetukset ovat oikein uudessa ohjelmistoversiossa. Väärät asetukset voivat johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai varsinaisen hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen.

On suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota laadittuun implanttisuunnitelmaan sekä implanttien sijoitteluun suhteessa toisiinsa ja muihin tärkeisiin anatomisiin rakenteisiin. Lisäksi tulee aina varmistaa, että oikea implanttisuunnitelma on valittu vientiä varten ja että viety implanttisuunnitelma tai kirurginen ohjuri sisältää kaikki implanttileikkauksessa tarvittavat tiedot.

Jos näin ei tehdä, riski diagnoosin ja hoidon suunnittelun korjaustarpeesta kasvaa. Tämä puolestaan voi johtaa diagnoosin ja suunnittelun tai varsinaisen hoidon viivästymiseen tai sen aikataulun muuttumiseen.

Varoitukset

Seuraavat varoitukset näkyvät ohjelmistossa.



DICOM-tiedosto(i)ssa oleva nimi eroaa potilaan nimestä.

Voit vähentää riskiä virheellisten tietojen käytöstä potilasmallin luomiseen tarkistamalla potilaan nimen ja varmistamalla, että potilaan nimi ja käytetyn DICOM-sarjan nimi täsmäävät.

DEX-tiedosto(i)ssa oleva nimi eroaa potilaan nimestä.

Voit vähentää riskiä virheellisten tietojen käytöstä potilaan diagnosointiin tarkistamalla potilaan nimen ja varmistamalla, että potilaan nimi ja käytetyn DEX-tiedoston nimi täsmäävät.

3D-röntgenkuvaa ei voida lisätä nykyiseen diagnoosiin.

Nykyinen diagnoosi sisältää leikkaussuunnitelmaan linkitetyn 3D-röntgenkuvan. Luo uusi diagnoosi 3D-kuvan tuomiseksi.

Lopullista implanttisuunnitelmaa ei voida lisätä nykyiseen diagnoosiin.

Valitse leikkaussuunnitelma nykyiseen diagnoosiin sisältyvän 3D-röntgenkuvan perusteella.

Kuvien vienti 8-bittisinä voi heikentää tarkkuutta.

Kuvat on suositeltavaa viedä toisessa muodossa niiden laadun säilyttämiseksi.

Älä kuvaa potilasta.

Laitteen valmistelu ei onnistunut. Tässä tilassa laite ei voi vastaanottaa röntgensäteilyä. Yritä uudelleen liittämällä tai käynnistämällä laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä laitteen valmistajan asiakastukeen.

Sensoria valmistellaan seuraavaa kuvausta varten. Odota.

Laitetta ollaan valmistelemassa uudelleen. Tässä tilassa laite ei voi vastaanottaa röntgensäteilyä.

Tarkista laitteen kuvauspyynnön parametrit.

Muista tarkistaa laitteen parametrit ennen potilaan kuvantamista.

Ei ole suositeltavaa muuttaa hoitosuunnitelmaa käyttämättä todellisia implanttien muotoja.

Todelliset muodot voidaan ladata DTX Studio Go -palvelusta.

Kuva on käännetty.

Tämä varoitus tulee näkyviin, kun käyttäjä kääntää kuvaa manuaalisesti (vaaka- tai pystysuunnassa).

Kuvaa on rajattu.

Tämä varoitus tulee näkyviin, kun käyttäjä rajaa kuvaa manuaalisesti.

Automaattinen intraoraalikuvien lajittelu (MagicAssist) on tarkoitettu käyttöön vain kuville, jotka esittävät aikuisten hampaita, joissa ei esiinny geminaatiota, ahtautta ja makrodontiaa.

Tämä vähentää riskiä, että MagicAssist-toimintoa käytetään soveltumattomiin potilaskuviin.

Huomaa, että DTX Studio Clinic -ohjelmistossa ja X-Guide-ohjelmistossa voi olla toisistaan poikkeavia datan visualisointimuotoja (esim. kuvaikkunan suunta, objektien värit) ja varoituksia.

Ei-tuetut implantit.

DTX Studio Clinic tukee vain valikoitujen implanttien vientiä X-Guide™-ohjelmistoon. X-Guide™-tiedostoon ei sisällytetä implantteja, jotka eivät ole tuettuja.

Implantti on liian lähellä merkittyä anatomista rakennetta.

Implanttia suunnitellaan liian lähelle merkittyä anatomista rakennetta (esim. merkittyä hermoa). Varmista, että implantti ei vaikuta anatomiseen rakenteeseen.



Implantit ovat toistensa tiellä.

Jotkin implantit ovat toistensa tiellä. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia leikkauksen aikana. Hoitosuunnitelman tarkistaminen on suositeltavaa.

Potilastietoja synkronoidaan tällä hetkellä. Jos suljet sovelluksen nyt, viimeisimmät muutokset eivät ole käytettävissä DTX Studio Core -ssa.

Potilastietoja päivitetään, eikä synkronointi DTX Studio Core -ohjelmistoon ole vielä valmis. Viimeisimmät potilasta koskevat muutokset eivät ole muiden klinikan käyttäjien saatavilla ennen synkronoinnin valmistumista.

Säädä implantin paikkaa

Tämä varoitus tulee näkyviin implanttisuunnitelman viennin tai kirurgisen ohjurin tai NobelGuide-ohjurin luomisen yhteydessä, jos implantti pysyy alkuperäisessä paikassaan, joka on määritetty optimoidun implantin paikan laskenta-algoritilla.

Älä kuvaa potilasta

Laitetta ei voitu aktivoida, koska sinulla ei ole aktiivista tilausta. Tässä tilassa laite ei voi vastaanottaa röntgensäteilyä. Ota yhteyttä laitteesi asiakastukipalveluun.

MagicAssist hyödyntää tekoälyä ja algoritmista prosessointia. Varmista aina kaikki tulokset tekemällä oma kliininen arviointisi

MagicAssist hyödyntää tekoälyä (AI) ja algoritmista prosessointia kliinisen arviointisi tukemiseen, ei sen korvaamiseen. Tarkista aina kaikki MagicAssistin tuottamat tulokset kliinisen asiantuntemuksesi ja potilastietojen perusteella.

Lisäksi DTX Studio Clinic näyttää useita teknisiä varoituksia (esim. koskien epäyhdenmukaista TT-dataa).

On erittäin suositeltavaa, että käyttäjät noudattavat ohjelmiston ohjeita ja teknisiä ilmoituksia epätarkan kuvauksen riskin vähentämiseksi.

Automaattinen intraoraalikuviin lajittelu (MagicAssist) on tarkoitettu käyttöön vain kuville, jotka esittävät aikuisten hampaita, joissa ei esiinny geminaatiota, ahtautta ja makrodontiaa.

Hammaslääkärin tai lääkärin ei pidä luottaa pelkästään kohdealueen tunnistuksen avulla tunnistettuun tulokseen, vaan hänen täytyy arvioida ja tulkita koko potilastieto ja käyttää muita erotusdiagnostiikan menetelmiä.

Kohdealueen tunnistus on rajattu kuviin, joissa tunnistus voidaan suorittaa.

Kohdealueiden automaattinen tunnistus on tarkoitettu käytettäväksi vain kuvissa, jotka esittävät aikuisten hampaita, joissa ei esiinny geminaatiota, ahtautta ja makrodontiaa.

Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä¹ Windows® 11, 64-bittinen (Pro- tai Enterprise-versio) pöytäkoneessa ja kannettavassa tietokoneessa.
macOS Tahoe (26) ja Sequoia (15) (Intel®-pohjainen Mac tai Apple Silicon Mac, jossa on M1-siru tai uudempi) iMac-, Mac Mini-, Mac Pro-, MacBook Pro- ja MacBook Air -laitteissa.²

	Peruskokoonpano (vain 2D-kuvantaminen)	Suositteltu kokoonpano (2D- ja 3D-kuvantaminen paremmalla suorituskyvyllä)
Suoritin	Kaksitytiminen tai nelitytiminen	2,8 GHz:n nelitytiminen (Intel Core i5 tai i7)
RAM	Vähintään 4 Gt erillisasennuksen tapauksessa. RAM-lisämuistia on suositeltavaa käyttää, jos samassa tietokoneessa on käynnissä muita sovelluksia.	Vähintään 8 Gt erillisasennuksen tapauksessa. RAM-lisämuistia on suositeltavaa käyttää, jos samassa tietokoneessa on käynnissä muita sovelluksia.
Näytönohjain	Perustason erityinen lisäkortti tai integroitu Intel-näytönohjain. 6. sukupolven Intel-suorittimia, joissa on sisäänrakennettu 9. sukupolven Intel-näytönohjain tai uudempi, tuetaan. OpenGL® 3.3 -tuki vaaditaan ³ .	Erityinen lisänäytönohjain, jossa on optimaalinen 3D-tuki (OpenGL 3.3) ja vähintään 2 Gt:n VRAM-muisti. 4K:n näytöille suositellaan vähintään 4 Gt:n VRAM-muistia.
Käytettäessä tekoälypohjaista diagnostiikkamoduulia: Algoritmien laitteistokiihdytykseen Windowsissa vaaditaan DirectX 12 -yhteensopiva näytönohjain ja Windows 11:n versio 25H2 tai uudempi. Algoritmien laitteistokiihdytykseen Macilla tarvitaan macOS Sequoia (15) tai uudempi. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi suositellaan Apple Silicon Macia, jossa on M1-siru tai uudempi. Huomautus MagicAssistin laitteistokiihdytys asetetaan DTX Studio Home suorituskykyasetuksissa.		
Levytila	10 Gt vapaata levytilaa asennusta varten ja lisäksi levytilaa käyttäjän luomille tiedoille. Tyypillisen 2D-potilasdatan koko DTX Studio Clinic -ohjelmistossa on noin 10 Mt.	10 Gt vapaata levytilaa asennusta varten ja lisäksi levytilaa käyttäjän luomille tiedoille. Tyypillisen 3D-potilasdatan koko DTX Studio Clinic -ohjelmistossa on noin 250 Mt.
Verkko	Laajakaistainen internet-yhteys, jossa latausnopeus palvelimeen on 3 Mbit/s ja latausnopeus palvelimesta 30 Mbit/s. On suositeltavaa, että kone on jatkuvasti yhteydessä internetiin, jotta DTX Studio Clinic voi muodostaa yhteyden ulkoisiin palveluihin ja/tai sovelluksiin. Jos tämä ei ole mahdollista, yhteys tulee muodostaa vähintään 14 päivän välein, sillä muuten pääsy DTX Studio Clinic -ohjelmistoon voi keskeytyä tilapäisesti. Kun yhteys internetiin muodostetaan uudelleen, pääsy DTX Studio Clinic -ohjelmistoon palautuu.	
Kiintolevy	Asenna DTX Studio Clinic Mac-laitteissa vain APFS-, HFS+ tai HFSJ-muotoon alustettuun asemaan, jossa kirjainkoko ei ole merkityksellinen.	
Monitori	Full HD (1920x1080) tai parempi. Tietoja voi kadota näkyvistä, jos näytön skaalausta käytetään. Tästä syystä vastaavan skaalatun resoluution tulee olla vähintään 1920x1080.	
Lähiverkko	Jos DTX Studio Clinic asennetaan yhdessä DTX Studio Core -ohjelmiston kanssa, on suositeltavaa käyttää paikallista gigabitverkkoa.	

1 On erittäin suositeltavaa asentaa käyttöjärjestelmäversion uusin saatavilla oleva päivitys, sillä päivitys korjaa tunnetut viat ja haavoittuvuudet ja parantaa siten käyttäjien ja tietokonejärjestelmien suojausta.

2 Joidenkin MacBook Air®- ja Mac® Mini -kokoonpanojen näytönohjaimissa on rajoituksia tilavuusrenderöinnin suhteen. Matalan resoluution tilavuusrenderöinnin valitsemista kannattaa harkita.

3 Käytä aina uusinta näytönohjaimen ajuria, joka on saatavilla valmistajan virallisesta verkkosivustosta, varmistaaksesi vakauden ja optimaalisen suorituskyvyn. Voit tarkistaa näytönohjaimen OpenGL®-version osoitteessa <http://realtech-vr.com/admin/glvie>

AloitUS

Ohjelmiston käynnistäminen

1. Avaa DTX Studio Clinic:
 - Windows-järjestelmässä kaksoisnapsauta pikakuvaketta  työpöydällä.
 - macOS-järjestelmässä napsauta pikakuvaketta  Finder-sovelluskansiossa tai Dockissa.
2. Valitse käyttäjä.
3. Anna salasana.
4. Napsauta [Kirjaudu sisään](#).

Huomautus

DTX Studio Clinic -ohjelmiston tulisi olla aina yhteydessä Internetiin. Jos tämä ei ole mahdollista, yhteys tulee muodostaa vähintään 14 päivän välein, sillä muuten pääsy DTX Studio Clinic -ohjelmistoon voi keskeytyä tilapäisesti.

Tätä keskeytysmekanismia ei sovelleta offline-lisensseihin. Internet-yhteyttä vaativat ominaisuudet tai palvelut eivät sisälly offline-lisenssiin, eivätkä ne ole käytettävissä offline-tilassa työskenneltäessä. Jos haluat vaihtaa offline-lisenssin salasanan, katso [asennusopasta](#).

Ohjelmiston sulkeminen

Muista sulkea kaikki aktiiviset Clinic -ohjelmiston ja skannausmoduulin* instanssit.

Napsauta [Valikko](#) ja valitse [Sulje sovellus](#).


Huomautus

Kun käytät sulje-painiketta , ohjelmisto pysyy käynnissä taustalla, jotta tietojen synkronointi on mahdollista ja DTX Studio™ Home / DTX Studio Clinic vastaa nopeammin, kun se avataan uudelleen.

* Moduuli saattaa edellyttää lisenssiä.

DTX Studio Home -näköymän esittely

DTX Studio Home on työalue, jossa voit valita ja hallita potilastietueita, kuvauspyyntöjä ja yleisiä asetuksia.

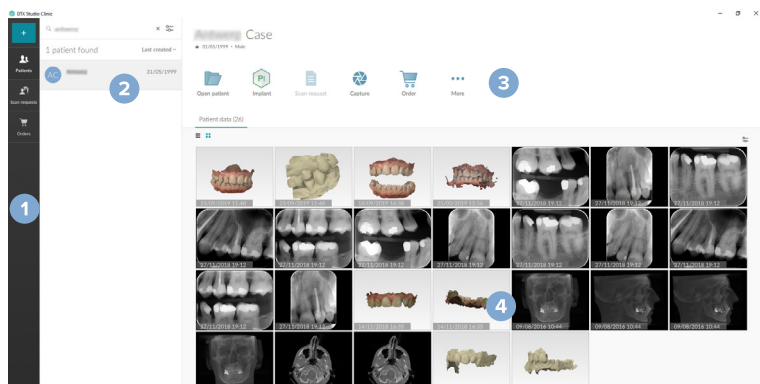

- 1 Sivupalkki
- 2 Potilasluettelo
- 3 Toimintoruutu
- 4 Tietoruutu

Ilmoitusalueen esittely

Ilmoitusalueen DTX Studio -kuvake mahdollistaa pääsyn DTX Studio Home -asetuksiin () ja seuraaviin välilehtiin:

- **Ilmoitukset:** näyttää, mitä potilastietoja ollaan lataamassa tai synkronoimassa DTX Studio Core -ohjelmiston kanssa, sekä muita järjestelmän ilmoituksia.
- **DTX:** tarjoaa nopean pääsyn seuraaviin:
 - DTX Studio Core ()
 - DTX Studio Go ()
 - altistusraportit*,
 - QuickPrescribe* tai
 - linkitetty kolmannen osapuolen sovellus.
- **Laitteet:** sisältää luettelon kansioista kolmannen osapuolen laitteiden kuvien tuontia varten, näyttää tiedonkeräyslaitteet ja niiden tilat:
 -  liitetty USB:n tai TWAIN:n kautta
 -  online-tilassa
 -  varattu
 -  offline-tilassa

Klikkaamalla **Lisää vaihtoehtoja** ... voit siirtyä laiteasetuksiin tai kansioiden tuontiasetuksiin tai poistamaan tarpeettomat laitteet käytöstä.

* Vaatii DTX Studio Core -ohjelman.

Asetusten muokkaaminen

Oletusarvot DTX Studio Home -asetusten muokkaaminen

1. Klikkaa DTX Studio Home -näkyessä **Valikko** .
2. Klikkaa **Asetukset** .

Asetusten vieminen tai tuominen

Voit luoda tai tuoda asetustiedoston, joka sisältää määritetyt omat asetukset. Tästä voi olla hyötyä, kun asetuksia viedään uuteen asennukseen tai jaetaan muiden DTX Studio Clinic -käyttäjien kanssa tai luodaan varmuuskopioita.

Huomautus

Katso kattava yleiskatsaus ohjetiedostojen "Jaa asetukset" -aiheesta: klikkaa valikkokuvaketta  ja valitse **Pikaohje**.

Klikkaa DTX Studio Home **Asetukset** -ikkunan kohtaa **Jaa asetukset**.

- Asetustiedoston **viemiseksi** valitse, jaetaanko **Kaikki asetukset** vai **Asetusten osavaiinnat**. Osavaihtoehtojen tapauksessa voit valita erikseen vientiin sisällytettävät asetukset. Tämä asetustiedosto voidaan ladata DTX Studio Core -ohjelmistoon muille klinikan DTX Studio Clinic -käyttäjille jakamista varten.
- Asetustiedoston **tuomiseksi** manuaalisesti valitse, tuodaanko asetustiedosto tietokoneestasi vai DTX Studio Core -ohjelmasta.

Kielen ja päivämäärän/kellonajan muodon vaihtaminen

Halutun kielen, päivämäärän muodon ja kellonajan muodon säätäminen:

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunassa [Yleistä](#).
2. Valitse päivämäärän ja kellonajan muoto luetteloista [Lyhyt päivämäärämuoto](#), [Pitkä päivämäärämuoto](#) ja [Ajan muoto](#).
3. Valitse haluamasi käyttöliittymän kieli [Sovelluksen kieli](#) -luettelosta.
4. Klikkaa [OK](#).
5. Käynnistä DTX Studio Clinic uudelleen muutosten ottamiseksi käyttöön.

DICOM-yhteensopivuusasetusten muokkaaminen

Varmista DIN 6862-2 -standardin noudattaminen syöttämällä laitoksen tiedot. DICOM-tiedostoa vietäessä annetut laitoksen tiedot korvaavat tyhjät tunnisteet.

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunassa [Yleistä](#).
2. Valitse [Käytä DIN 6862-2 -standardia](#).
3. Syötä pyydetyt laitoksen tiedot.
4. Klikkaa [OK](#).

Huomautus

Kun yhteensopiva DICOM-tiedosto tuodaan tai viedään, DIN 6862-2 -tunnisteet säilyvät aina.

Oletuskuvafiltereiden asettaminen

Oletuskuvafiltereiden asettaminen DTX Studio Home -kuvaikkunalle ja DTX Studio Clinic -ohjelmistolle:

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunassa tai DTX Studio Clinic [Preferenssit](#) -ikkunassa [Kuvan asetukset](#) -kohtaa.
2. Valitse [Kuvan oletusasetukset](#) -luettelosta kuvatyypin, jolle haluat määrittää oletusarvoiset filteriasetukset.
3. Valitse valitulle kuvatyypille oletuksena käytettävät filterit ja aseta voimakkuusprosentti liikusäätimellä, joka tulee näkyviin.
4. Klikkaa [OK](#).

Voit palauttaa alkuperäiset oletusarvot napsauttamalla [Nollaa](#).

Intraoraalikuvien automaattisen kierron poistaminen käytöstä

Välittömän skannauksen jälkeen intraoraalikuvat kiertyvät automaattisesti oikeaan asentoon. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä seuraavasti:

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunassa tai DTX Studio Clinic [Preferenssit](#) -ikkunassa [Kuvan asetukset](#) -kohtaa.
2. Poista valinta kohdasta [Kierrä automaattisesti röntgenkuvia DTX Studio -kaappauksessa](#).

Automaattisesti asetettujen ikkunoinnin syvyys- ja ikkunoinnin leveysarvojen poistaminen käytöstä

Kun 2D-kuva tuodaan tai otetaan, taso- ja ikkunointiarvot asetetaan automaattisesti. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä seuraavasti:

1. Klikkaa DTX Studio Home **Asetukset** -ikkunassa tai DTX Studio Clinic **Preferenssit** -ikkunassa **Kuvan asetukset** -kohtaa.
2. Valitse oikean yläkulman avattavasta valikosta **OPG**, **Intraoraalinen** tai **Kefalo**.
3. Laita **Automaattinen tason ikkunointi** -säädin pois päältä .
4. Syötä mukautetut taso- ja ikkunointi-arvot.
5. Klikkaa **OK**.

Yhteyden muodostaminen DTX Studio Core -ohjelmistoon

DTX Studio Core on ohjelmistoratkaisu erilaisten potilasmedia- ja kuvatietotyyppien (2D-röntgen, 3D-(KK) TT-röntgen, hampaiden optiset skannaukset, valokuvat) tallentamiseen ja hakemiseen rakenteisella ja keskitetyllä tavalla, jotta tallennettu tieto on välittömästi käytettävissä missä tahansa hammasklinikalla.

- Jos DTX Studio Clinic on yhdistetty DTX Studio Core -ohjelmistoon, sitä voidaan käyttää verkkoympäristössä kuvien hakemiseen muista tuetuista Ethernet-liitännän kautta yhdistetyistä ja 3Shape TRIOS® -laitteista.
- DTX Studio Core -ohjelmistoon on muodostettava yhteys verkkolaitteiden kanssa työskentelyä, kuvauspyyntöjä ja radiografisten raporttien käyttöä varten.

Yhteyden muodostaminen DTX Studio Core -ohjelmistoon:

1. Klikkaa DTX Studio Home **Asetukset** -ikkunan kohtaa **DTX Studio Core**.
2. Syötä DTX Studio Core -ohjelmistolle **URL** (verkko-osoite), jos sitä ei ole vielä määritetty.
3. Napsauta **Yhdistä**.
4. Yhteyspyyntö lähetetään, ja paikallinen järjestelmänvalvoja voi hyväksyä sen DTX Studio Core -käyttöliittymän kautta.

Pikakuvakkeen lisääminen toimintoruutuun

Kolmannen osapuolen sovelluksen pikakuvakkeen lisäys toimintoruutuun:

1. Klikkaa DTX Studio Home **Asetukset** -ikkunan kohtaa **Pikakäynnistys**.
2. Valitse **Lisää** ja valitse sitten **Sovellus** tai **Verkkosivu**.
3. Valitse suoritettava tiedosto ja napsauta **Avaa**-painiketta. Anna verkkosivun **URL**-osoite.
4. Muuta tarvittaessa nimi **Sovelluksen nimi** tai **Verkkosivun nimi**.
5. Vaihtoehtoisesti voit käynnistää potilastietoja sisältävän kolmannen osapuolen sovelluksen valitsemalla vaihtoehdon **Käynnistä potilastietojen kanssa**.
 - Määritä, mitkä tiedot viedään, lisäämällä vientiparametrit **Vientiparametrit**-kenttään.

Huomautus

Tutustu ohjetiedostojen aiheeseen "Pikakäynnistys", josta saat kattavan yleiskatsauksen kaikista potilastietoparametreista: klikkaa valikkokuvaketta  ja valitse **Pikaohje**.

- Klikkaa **Selaa** vietävien tiedostojen sijainnin valitsemiseksi.

6. Klikkaa **OK**.

Practice Management System (PMS) -integroinnin ottaminen käyttöön

Integroimalla DTX Studio Clinic -ohjelmiston PMS-järjestelmään (ts. VDDS:n tai OPP/OPP-verkon kautta) voit luoda potilastietueen ja ottaa kuvan PMS-järjestelmästä.

Voit esikatsella PMS-kuvia DTX Studio Home -näkyvässä tai katsella niitä suoraan DTX Studio Clinic -ohjelmistossa.

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunan kohtaa [PMS-integraatio](#).
2. Valitse [Ota PMS-integraatio käyttöön](#).

Huomautus

Saat yksityiskohtaiset tiedot ohjetiedostojen aiheesta "PMS-integraatio": klikkaa valikkokuvaketta  ja valitse [Pikaohje](#).

Implanttituotteiden asentaminen

Implanttisuunnittelua varten saatavilla olevien implanttituotemuotojen asentaminen tai päivittäminen kohdassa DTX Studio Clinic:

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunan kohtaa [Implanttituotteet](#).
2. Etsi haluamasi merkki ja valitse [Asenna](#) tai [Päivitä](#).

TWAIN-tuetun laitteen lisääminen

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunan kohtaa [Laitteet](#).
2. Klikkaa [Lisää](#).
3. Valitse TWAIN-laite.
4. Määritä laitteen asetukset.
5. Klikkaa [Lisää](#).

Kansion määrittäminen kolmannen osapuolen laitteiden kuvien havaitsemista varten

Jos haluat lisätä kuvia kolmannen osapuolen kameralaitteista tai kolmannen osapuolen (KK)TT-laitteista, määritä kansio, josta uudet kuvat voidaan havaita. Lisää kuvat [Kuvaa](#)-toiminnolla potilastietueessa tai DTX Studio Clinic -ohjelmistosta.

1. Kameralaitteen asetusten valmisteleva:
 - Jos mahdollista, määritä kolmannen osapuolen kameralaitte, (KK)TT-laite tai langaton SD-kortti tallentamaan kuvat tiettyyn kansioon.
 - Jos kuvat on tallennettu tavalliselle SD-kortille, liitä kortti ja huomioi kortille määritetty asemakirjain.
2. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunan kohtaa [Laitteet](#).
3. Klikkaa [Lisää](#).
4. Valitse kolmannen osapuolen laite ja napsauta [Avaa](#).
5. Valitse kameralaitteen kansio napsauttamalla [Selaa](#) ja napsauta [Valitse kansio](#).
6. Anna yksilöivä nimi.
7. Vaihda modaliteettia ja muuta kansioden prioriteetteja tarvittaessa.
8. Klikkaa [Lisää](#).

Oletusvientikansoiden määrittäminen

Oletusvientikansion määrittys raporteille, kuvakaappauksille ja X-guide-tiedostoille:

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunan kohtaa [Vie](#).
2. Klikkaa [Selaa](#) kunkin vientityypin kohdalla ja valitse niille oletuskansio.

Automaattisen tallennuksen ottaminen käyttöön DTX Studio Clinic -ohjelmiston sulkemisen yhteydessä

1. Valitse DTX Studio Clinic -asetuksissa [Yleistä](#).
2. Ota käyttöön [Automaattinen tallennus, kun potilas suljetaan](#).

Tämä asetus on oletuksena käytössä, ja se poistaa käytöstä kehotteen potilastietueen tallentamisesta ennen sulkemista.

Oppimisresurssit ja yhteyden ottaminen tukeen

Kaikkien oppimisresurssien ja pikanäppäimien näyttäminen

Voit siirtyä ohjedokumentaatioon, käyttöohjeisiin ja pikanäppäimiin napsauttamalla  ja valitsemalla [Pikaohje](#), [Käyttöohjeet](#) tai [Näppäimistön pikavalinnat](#). Vaihtoehtoisesti voit klikata kysymysmerkkikuvaketta  Clinic -moduulissa.

Koulutusvideosivusto ja tuote-esittely voidaan avata vain Clinic -moduulissa. Klikkaa valikkokuvaketta  tai kysymysmerkkikuvaketta  ja valitse [Koulutusvideot](#) tai [Tuote-esittely](#).

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Voit ottaa yhteyttä asiakastukeen klikkaamalla valikkokuvaketta  ja valitsemalla [Ota yhteys tukeen](#). Tukisivusto, joka sisältää kaikki yhteydenottovaihtoehdot, avautuu.

Keskeisten toimintojen yleiskatsaus

DTX Studio Home -ohjelmiston keskeisten toimintojen käytön aloittaminen:

1	Potilastietojen luominen tai linkittäminen		Luo potilastieto (katso sivu 21).
			Integroi Practice Management System (katso sivu 18) ja linkitä olemassa olevaan PMS-potilastietoon.
2	Datan hankkiminen tai tuominen		Tee kuvauksia, käynnistä useita kuvaustyönkuluja (katso sivu 30) tai tuo kolmannen osapuolen laitteiden kuvia kansioista (katso sivu 23).
			Pyydä kuvaus tai usean kuvauksen työnkulku (katso sivu 30).
			Vedä ja pudota kuvia potilaskorttiin (katso sivu 23).
			Tuo dataa DTX Studio Clinic -ohjelmiston sisältä (katso sivu 23).
			Tuo 3Shape Dental Desktop -ohjelmistosta (katso sivu 25).

Kun potilastieto on luotu ja data lisätty, jatka seuraavasti:

Diagnosointi ja hoitojen suunnittelu		Avaa Clinic-moduuli (katso sivu 35) seuraavia tarkoituksia varten:	
		– Voit tehdä diagnooseja kuvista (katso sivu 45). – Voit suunnitella implantteja ja hoitoja (katso sivu 55). – Voit luoda kirurgisen ohjurin (katso sivu 56). – Voit jakaa 3D-esityksen potilaille (katso sivu 27).	
Tietojen jakaminen ja viestintä DTX Studio Clinic -ohjelmistossa		Valinnaisesti voit avata DTX Studio Implant -ohjelmiston (katso sivu 59).	
			Vie potilastieto (katso sivu 22).
Tilausten tekeminen DTX Studio Home -näkyvässä		Vie implanttisuunnitelma X-Guide™ -ohjelmistoon (katso sivu 28).	
			Jaa potilastietoja ja dataa DTX Studio Go -palvelun kautta (katso sivu 26) tai tee yhteistyötä kumppanien kanssa. Vaihtoehtoisesti voit tilata restauraation, kirurgisen ohjurin tai leikkaussuunnitelman (katso sivu 59).

Potilastiedot

Uuden potilastiedon luominen

1. Klikkaa DTX Studio Home -näkyvän vasemmassa yläkulmassa olevaa sinistä plus-kuvaketta .
2. Valitse [Luo potilas](#).
3. Syötä potilaan perustiedot, kuten potilaan nimi, syntymäaika ja sukupuoli.
4. Valitse [Luo](#).
5. Potilastieto lisätään [Potilaat](#)  -luetteloon. Jos DTX Studio Home on yhdistetty DTX Studio Core -ohjelmistoon, potilastieto lisätään myös DTX Studio Core -ohjelmistoon.

Potilastietojen hallinta

Avaa potilasluettelo napsauttamalla sivupalkin kohtaa [Potilaat](#) , jos luettelo ei ole jo auki.

Huomautus

Jos työasemaa ei ole yhdistetty DTX Studio Core -ohjelmistoon, vain paikallisesti tallennetut potilastiedot ovat näkyvissä.

- Potilastiedot jotka ovat avattuina DTX Studio Clinic -ohjelmistossa paikallisella tai verkkoon yhdistetyllä työasemalla, on merkitty lukkokuva-ikoneilla .
- Jos haluat muokata peruspotilastietoja, valitse potilastieto potilasluettelosta, napsauta [Lisää](#)  ja valitse [Muokkaa](#) .
- Voit poistaa valitun potilastiedon napsauttamalla [Lisää](#)  ja valitsemalla [Poista potilas](#) .
- Jos haluat varmistaa, että DTX Studio Core -ohjelmistoon tallennettu potilastieto on käytettävissä myös offline-tilassa, napsauta [Lisää](#)  ja ota käyttöön [Offline saatavilla](#).
- Yhdistä kaksi potilastietoa valitsemalla [Lisää](#)  ja sitten [Yhdistä potilaat](#) .

Ilmoitusalue ([katso sivu 15](#)) näyttää, mitä potilastietoja ollaan lataamassa tai synkronoimassa.

Yksityisyysasetusten hallinta

Toimi seuraavasti, jos haluat varmistaa potilaan yksityisyyden näyttämällä potilasluettelossa vain potilaan nimikirjaimet tai piilottamalla potilasluettelon kokonaan:

1. Napsauta potilasluettelossa suodatinkuvaketta .
2. Valitse [Yksityisyystila](#) pelkkien nimikirjainten näyttämiseksi tai valitse [Piilota potilasluettelo](#), jos haluat piilottaa luettelon kokonaan.

Huomautuksia

- Klikkaa kaksoisnuolikuvaketta  sivupalkissa, jotta potilasluettelo tulee uudelleen näkyviin.
- Yksityisyystila pysyy käytössä, vaikka DTX Studio Clinic käynnistetään uudelleen. Voit poistaa yksityisyystilan käytöstä napsauttamalla uudelleen suodatinkuvaketta  ja poistamalla valinnan [Yksityisyystila](#)-kohdasta.

Potilastietojen etsiminen ja järjestäminen

Voit etsiä potilastiedon asettamalla potilasluettelon haluamaasi järjestykseen tai käyttämällä hakutoimintoa.

Potilasluettelon järjestäminen

1. Napsauta pudotusvalikon nuolta potilasluettelon otsikon vieressä.
2. Valitse [Viimeksi luotu](#), [Viimeksi muokattu](#) tai [Kuvattu viimeksi](#).
3. Voit sulkea avattavan luettelon napsauttamalla sitä uudelleen.

Potilastiedon etsiminen

1. Napsauta potilasluettelossa suodatinkuvaketta .
2. Valitse hakukriteeriksi [Potilaan nimi](#), [Syntymäaika](#), [Potilastunnus](#), [PMS-tunnus](#) tai [Tilaus tai huoltotunnus](#).
3. Kirjoita valitsemasi hakuvaihtoehto (tai osa siitä) [Etsi potilas](#) -kenttään .
4. Potilasluetteloa suodatetaan automaattisesti sitä mukaa, kun kirjoitat tekstiä hakukenttään.

Voit poistaa hakuehdot napsauttamalla  hakukentässä.

Potilastiedon vieminen

Voit jakaa diagnooseja ja kuvatietoja manuaalisesti toiselle DTX Studio Clinic -ohjelmiston käyttäjälle viemällä potilaskortin. Vietyä potilastietoa voidaan tarkastella myös DTX Studio Clinic -ohjelmiston ilmaisversiossa, joka on saatavilla osoitteesta DTX Studio Go. [Katso sivu 26](#) lisätietoja.

Huomautus

Kun ohjelmistosta viedään raportteja tai potilastietoja, on tärkeää pitää mielessä, että anonymisoimattomia potilastietoja voidaan käyttää väärin tarkoituksiin ilman potilaan suostumusta.

Tietojen hallinta

Tietojen tuominen

Kuvien tuominen kolmannen osapuolen laitteista

Jos haluat lisätä kuvia kolmannen osapuolen kameralaitteista tai kolmannen osapuolen (KK)TT-laitteista, muista määrittää suora kansio, josta uudet kuvat voidaan havaita (katso [sivu 18](#)).

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta tai avaa potilastieto DTX Studio Clinic -ohjelmistossa.
2. Napsauta [Kuvaa](#) .
3. Aseta hiiren osoitin suoran kansion nimen päälle ja napsauta [Valitse](#).
 - Valitse 2D-kuvien tapauksessa kuvat, jotka haluat tuoda. Klikkaa [Lopeta](#).
 - Valitse 3D-(KK)TT-laitteiden tapauksessa 3D-tiedot, jonka haluat tuoda. Napsauta [Tuo](#).

Kuvien tuominen vetämällä ja pudottamalla

1. Vedä ja pudota yhteensopiva kuva tai tiedostotyyppi tai kokonainen erilaisia tietoja sisältävä kansio tiedostonhallinnasta DTX Studio Home -näkyvässä olevaan potilaskorttiin tai Clinic-moduuliin.
2. Poista [Valitse tiedot](#) -ikkunassa niiden kuvien valinnat, joita et halua lisätä. Valittujen ruutujen ympärillä on värillinen reunus.
3. Muuta tarvittaessa modaliteettia ja kuvanottopäivää viemällä hiiren osoitin kuvaruudun päälle, napsauttamalla [Lisää vaihtoehtoja](#) ... ja valitsemalla haluamasi kuvausmodaliteetti tai muokkaamalla kuvanottopäivää.
4. Napsauta [Tuo](#).
5. Kuvat lisätään potilastietoihin.

Kuvien tuominen Clinic-moduulissa

1. Avaa potilasvalikko Clinic-moduulissa napsauttamalla valikkokuvaketta (.
2. Valitse [Tuo](#)  ja valitse jokin seuraavista vaihtoehtoista:

3D-röntgen- kuva

1. Napsauta [Tuo DICOM-tiedosto](#).
2. Selaa DICOM-kuvatiedoston sijaintiin ja valitse tiedoston kansio.
3. Napsauta [Tuo](#).
4. DICOM-tiedostot ladataan. Voit tarkistaa DICOM-kuvat selaamalla leikkeitä oikealla puolella olevalla liukusäätimellä.
5. Napsauta [Valmis](#).
6. Jos MagicAssist™ on aktivoitu (se on käytössä oletuksena), prosessi käynnistyy automaattisesti (KK)TT-datan määrittämiseksi.
 - Voit määrittää 3D-röntgenkuvan manuaalisesti napsauttamalla [Ohita MagicAssist](#) -painiketta.
 - 3D-röntgenkuvan orientaatio voidaan optimoida ohjatun potilaan orientaatiotoiminnon avulla.
 - OPG-kaaritoiminto (katso [sivu 50](#)) mahdollistaa 3D-panoraamakuvan säätämisen.

IO-skannaus	1. Valitse intraoraaliskannausmalli(t) ja napsauta Tuo. 2. Valitse tuotavat tiedot. Valittujen ruutujen ympärillä on vihreä reunus. Säädä mallin tyyppiä tai skannauspäivää tarvittaessa. 3. Napsauta Tuo. 4. MagicAssist käynnistyy skannauksen suunnan tunnistamiseksi. Voit säätää suuntaa napsauttamalla 3D-työkalut-työkalupalkissa Aseta IO-skannaus > Säädä suuntaa. Jos diagnoosiin on lisätty 3D-röntgenkuva, työkaluvihje kehottaa yhdistämään intraoraaliskannauksen 3D-röntgenkuvaan. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa 3D-työkalut-työkalupalkissa Kohdista tilavuudet > Kohdista IO-skannaus 3D-röntgenkuvaan.
Laboratoriomalli	1. Valitse diagnostinen skannaus (tai diagnostiset skannaukset) ja napsauta Tuo. 2. Valitse tuotava diagnostinen skannaus. Laboratoriomallit tunnistetaan diagnostisiksi malleiksi. Muokkaa tarvittaessa kuvauspäivämäärää. 3. Napsauta Tuo. Voit säätää laboratoriomallin sijaintia Säädä-älypaneelin avulla.
Kasvoskannaus	1. Valitse kasvoskannaus, jonka haluat tuoda, ja napsauta Tuo. 2. Säädä tarvittaessa Kirkkaus- ja Kontrasti-asetuksia. 3. Napsauta Valmis. Voit kohdistaa kasvoskannaukset 3D-röntgenkuvaan valitsemalla 3D-työkalut-työkalupalkista vaihtoehdon Kohdista tilavuudet > Kohdista kasvoskannaukset 3D-röntgenkuvaan. Käytä kasvoskannauksen sijainnin säätämiseen Säädä-älypaneelia.
2D-kuvat	1. Valitse kuva (tai kuvat) ja napsauta Tuo. 2. Valitse lisättävät kuvat. Valittujen ruutujen ympärillä on vihreä reunus. 3. Napsauta Tuo. – Kun 2D-kuva tuodaan tai otetaan, taso- ja ikkunointiarvot asetetaan automaattisesti. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, katso "Automaattisesti asetettujen ikkunoinnin syvyys- ja ikkunoinnin leveysarvojen poistaminen käytöstä" sivulla 17. – Automaattinen MagicAssist-tunnistus on oletuksena käytössä. Se voidaan poistaa käytöstä DTX Studio Home MagicAssist-asetuksissa.

Tuominen leikepöydältä

1. Kopioi kuva tietokoneen leikepöydälle.
2. Avaa potilasvalikko Clinic-moduulissa valitsemalla .
3. Napsauta **Tuo**  ja valitse vaihtoehto **Leikepöydältä**.
4. Tarkasta tuotu kuva. Jos haluat vaihtaa sen modaliteettia, napsauta **Lisää vaihtoehtoja ...** ja valitse toinen modaliteetti.
5. Napsauta **Tuo**.

Tuominen 3Shape Dental Desktop -ohjelmistosta

3Shape TRIOS -intraoraaliskannerilla tehdyn skannauksen tuomiseksi on ensin luotava potilastieto DTX Studio Home -näkyvässä.

Huomautus

Lisätietoja 3Shape TRIOS -intraoraaliskannerin integroinnista on [DTX Studio Core -ohjelmiston käyttöohjeissa](#).

1. Luo uusi potilastieto DTX Studio Home -näkyvässä. Varmista 3Shape-datan yhdistyminen noudattamalla seuraavia ohjeita:
 - Käytä täsmälleen samaa etunimeä, sukunimeä ja syntymäaikaa kuin 3Shape Dental Desktop -ohjelmiston olemassa olevassa potilastiedossa.
 - Varmista, että potilaiden nimissä on käytetty isoja ja pieniä kirjaimia oikein. Nimien isot ja pienet kirjaimet ovat merkityksellisiä.

Huomautuksia

- Aiemmin tuotuja potilastietoja ei voida tuoda uudelleen. Kopioi sen sijaan potilastieto 3Shape Dental Desktop -ohjelmistossa ja tuo kopioitu potilastieto.
 - Potilastietotunnusta DTX Studio Clinic ei vaihdeta 3Shapen kanssa. Linkki luodaan perustuen käyttäjän vahvistukseen, että etunimi, sukunimi ja syntymäaika ovat samat.
2. Valitse potilastieto **Potilaat**  -luettelosta.
 3. Napsauta **Lisää** .
 4. Valitse **Tuo 3Shapesta** .
 5. Vahvista pyydettäessä, että potilastieto vastaa 3Shape Dental Desktop -ohjelmistossa olevaa tietoa.
 6. Tiedot noudetaan ja lisätään potilastietopaneelin **Potilastiedot**-välilehdelle.

Leikkaussuunnitelman tuominen

1. Valitse potilastieto Potilaat DTX Studio Home -luettelosta .
2. Napsauta **Lisää** .
3. Valitse **Tuo leikkaussuunnitelma** .
4. Valitse leikkaussuunnitelma ja raportti.
5. Napsauta **Tuo**.

Tietojen valitseminen

Potilaskuvien valitseminen

Kuvien tai tiedostojen valitseminen potilastiedolle:

1. Valitse potilastieto Potilaat DTX Studio Home -luettelosta .
2. Vie hiiri pikkukuvan päälle **Potilastiedot** -välilehdessä ja napsauta tyhjää luettelomerkkiä tai pidä Ctrl-näppäintä (Cmd-näppäintä Mac-tietokoneessa) painettuna ja napsauta pikkukuvaa. Valittujen pikkukuvien ympärillä näkyy värillinen reunus.

Näkyviin tulee pikavalikko, josta voit tehdä seuraavaa:

- Jakaa valitut kuvat GoSharen kautta .
- Viedä valitut kuvat .
- Säättää valittujen kuvien ottopäivämäärää .
- Poistaa valitut kuvat potilastietueesta .

Tämän valikon yläpuolella voit **poistaa** valinnan.

Tietojen jakaminen

Potilastietojen jakaminen DTX Studio Go -palvelun kautta (GoShare-toiminnon kautta)

Voit jakaa potilastiedot hammasklinikalle [DTX Studio Go](#) -palvelun kautta. Jos potilastietoja jaetaan, niiden yleiskatsaus näkyy [GoShare](#)-välilehdellä.

1. Valitse potilastieto Potilaat DTX Studio Home -luettelosta .
2. Napsauta [Tee yhteistyötä](#) .
3. Valitse jaettavat tiedot:
 - [DTX Studio Clinic](#), jos haluat jakaa koko potilaskortin kuvineen (DTX Studio Clinic -ohjelmiston omassa salatussa muodossa) tai
 - [Valitse tiedot](#), jos haluat jakaa vain tietyt tiedot.

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa yhtä yhteistyökumppanien ruuduista. Voit hallita näitä yhteistyökumppanien ruutuja napsauttamalla [Muokkaa](#), valitsemalla yhteydet, joiden haluat näkyvän ruuduissa, ja napsauttamalla sitten [Tallenna](#).
4. Valitse haluamasi vaihtoehdot.
5. Klikkaa [Jatka](#).
6. DTX Studio Go avautuu verkkoselaimessa ja luotu GoShare™-tapaus tulee näkyviin. Tiedot ladataan taustalla samaan aikaan.
 - Voit lisätä huomautuksia [Kuvatilaus](#)-kortin tekstikenttään.
 - Voit luoda kuvatilauspohjan napsauttamalla [Lisää pikahuomautus](#) ja valitsemalla [Määritä](#). Napsauta [Lisää pikahuomautus](#). Lisää otsikko, kirjoita teksti ja napsauta [Tallenna](#). Valitse [Sulje](#).
 - Jos haluat vaihtaa kuvatilauksen oletuskuvaa tai lisätä merkintöjä, aseta hiiren osoitin määräyksen kuvan päälle ja valitse [Muokkaa määräystä](#). Napsauta [Vaihda kuva](#) ja valitse toinen kuva.
 - Jos haluat muokata potilastietoja, napsauta kynäkuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa.
 - Anna tarvittaessa lisätietoja tai lisätiedostoja (KK)TT-kuvista, kliinisistä kuvista, intraoraalikuvista, OPG-kuvista, raporteista jne.
7. Napsauta [Aloita jako](#).
8. Valitse yhteys, jolle haluat jakaa potilastietoja. Voit tehdä sen etsimällä tai valitsemalla olemassa olevan yhteyden [Jaa yhteyden välityksellä](#) -kentästä tai kirjoittamalla sähköpostiosoitteen.
9. Napsauta [Lähetä](#). Vastaanottavalle tilille lähetetään ilmoitus sähköpostilla.
10. Jaettu tapaus lisätään potilaskortin [GoShare](#)-yleiskatsaukseen. Avaa jaettu tapaus DTX Studio Go -palvelussa valitsemalla [Näytä tapaus](#).

3D-esityksen jakaminen

1. Avaa potilasvalikko Clinic-moduulissa valitsemalla .
2. Napsauta **Jaa**  ja valitse **3D-esitys**.
3. Valitse haluamasi asetukset:
 - **Sisällytä 3D-tiedot (DICOM)**: voit sisällyttää DICOM-raakadatan, jos maasi lainsäädäntö edellyttää sitä.
 - **Sisällytä nykyinen implanttisuunnitelma**: voit lisätä yksityiskohtaisempia implanttitietoja.
 - **Anonymisoi potilas**: voit jättää potilaan nimen, syntymäajan ja potilastunnuksen pois.
4. Valitse **Jaa**.
5. 3D-esitys ladataan DTX Studio Go -palveluun ja lisätään tapaukseen.
6. Suorita prosessi loppuun DTX Studio Go -palvelussa ja anna pyydetty tiedot.
7. Potilas voi tarkastella 3D-esitystä verkossa.
8. 3D-esitys lisätään potilastietoihin potilaskortilla.

2D-kuvien jakaminen sähköpostilla tai siirtäminen kolmannen osapuolen sovellukseen

1. Napsauta laajennettua 2D-kuvaa työtilassa hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Kopioi kuva**.
Vaihtoehtoisesti napsauta kuvaketta  kuvaikkunan vasemmassa yläkulmassa ja valitse **Kopioi kuva**.
2. Avaa sähköpostiohjelma tai kolmannen osapuolen sovellus, napsauta hiiren oikealla painikkeella haluamaasi kohtaa ja valitse **Liitä**.

Tietojen vieminen

Potilastiedon vienti

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta DTX Studio Home.
2. Napsauta **Lisää** .
3. Napsauta **Vie potilas** .
4. Soveltuvissa tapauksissa valitse diagnoosi, jonka haluat viedä.
5. Valitse haluamasi vaihtoehdot.
6. Napsauta **Selaa**, valitse vientitietojen sijainti ja napsauta sitten **Valitse kansio**.
7. Napsauta **Vie**.

Potilastietojen vienti

1. Siirry tietojen vientitoimintoon.
 - Valitse DTX Studio Home -moduulissa toimintoruudusta **Lisää** ... ja valitse sitten **Vie tiedot** .
 - Valitse Clinic -moduulissa **Vie**  ja valitse **Tiedot** .
2. Valitse kuvat, jotka haluat viedä.
3. Napsauta **Selaa** ja siirry haluamaasi sijaintiin.
4. Napsauta **Valitse kansio**.
5. Valitse vientitila, potilaan anonymisointi, metatiedot ja kuvatiedoston muoto.
6. Napsauta **Vie**.

Vienti 3D-röntgenkuvaikkunaan

3D-röntgenkuvan jakaminen CD:n tai USB-tikun kautta:

1. Valitse DTX Studio Home -moduulissa toimintoruudusta **Lisää** ... ja valitse sitten **Vie 3D-kuvaikkunaan** .
2. Valitse 3D-kuvat, jotka haluat viedä.
3. Napsauta **Selaa** ja siirry haluamaasi sijaintiin.
4. Valitse **Vie 3D-kuvaikkunaan**.
5. Valitse vahvistusvalintaikkunassa **Näytä tiedostoselaimessa**.

DICOM-kuvien tulostaminen

Jotta voit tulostaa DICOM-kuvia, ota käyttöön DICOM-solmun ominaisuudet ja määritä DICOM-tulostin kohdassa DTX Studio Core.

1. Avaa Clinic -moduulissa potilasvalikko  ja valitse **Tulosta DICOM** .
2. Hallinnoi raporttisivuja valitsemalla **Lisää sivu** tai **Poista sivu**.
3. Määritä **tulostusasetukset, ylä- ja alatunniste** sekä jokainen **kuva**.
4. Lähetä raportti valittuun tulostimeen valitsemalla **Tulosta**.

Implanttisuunnitelman vienti X-Guide-ohjelmistoon

Jos olet laatinut implanttisuunnitelman DTX Studio Clinic -ohjelmistossa, voit viedä sen X-Guide™-ohjelmistoon.

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta.DTX Studio Home
2. Napsauta **Lisää** ...
3. Napsauta **Vie X-Guideen** .
4. Soveltuvissa tapauksissa valitse implanttisuunnitelma, jonka haluat viedä.
5. Valitse haluamasi vaihtoehdot.
6. Napsauta **Selaa**, valitse vientitietojen sijainti ja napsauta sitten **Valitse kansio**.
7. Napsauta **Vie**.

Kuvausten pyytäminen

Kuvauspyyntöjen käyttämiseksi tai useita kuvausprotokollia sisältävän kuvaustyönkulun käynnistämiseksi (katso [sivu 30](#)) on muodostettava yhteys DTX Studio Core -ohjelmistoon (katso [sivu 17](#)).

Kuvauksen ajoittaminen

Kuvauksen pyytäminen potilaalle:

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta DTX Studio Home.
2. Napsauta **Kuvauspyyntö** .
3. Vaihtoehtoisesti voit käynnistää useita kuvausprotokollia sisältävän kuvaustyönkulun (katso [sivu 30](#)).
4. Aseta hiiren osoitin laiteruudun päälle ja napsauta **Valitse**.
5. Täytä soveltuvat tiedot kuvauspyyntölomakkeeseen.

Huomautus

Lomakkeen muoto vaihtelee valitun modaliteetin tai laitteen mukaan.

- Muuta tarvittaessa **Kuvan päivämäärä**- ja **Lähetävä lääkäri** -kenttien tietoja.
 - Jos kuvauslaite sallii useita eri menetelmiä, valitse vaaditut modaliteetit: **3D**, **KEFALO** (kefalogrammi), **OPG** (panoraama), **IOXRAY** (2D-intraoraalikuva), **IOS** (3D-intraoraaliskannaus) ja/tai **IOCAM** (intraoraalivalokuva). Valitse kuvantamisohjelma soveltuvissa tapauksissa.
 - Valitse hammaskartasta alueet, jotka haluat skannata.
 - Valitse **Poskiontelo**, jos poskiontelo täytyy skannata.
 - Valitse kuvauksen **resoluutio** soveltuvissa tapauksissa.
 - Jos valittu laite on intraoraalilaite, valitse **Templaatti** ja määritä **kuvantamisohjelma**.
 - Lisää tarvittaessa **Pyyntöhuomautukset**-kohtaan huomautuksia käyttäjälle.
6. Napsauta **Luo kuvauspyyntö**.
 7. Kuvauspyyntö lisätään.

Kuvauspyyntöjen etsiminen ja järjestäminen

Kuvauspyynnöt järjestetään aikataulutetun päivämäärän mukaan.

Kuvauspyyntöluettelon suodattaminen

1. Napsauta DTX Studio Home -sivupalkin kohtaa **Kuvapyynnöt** .
2. Napsauta suodatusasetusten kuvaketta  **Kuvapyynnöt**-luettelon otsikon vieressä.
3. Valitse näytettäväksi kuvauspyynnöt **Tänään** (oletus), **Viimeiset 7 päivää**, **Seuraavat 7 päivää** tai **Kaikki**.

Kuvauspyynnön etsiminen

1. Kirjoita potilaan nimi (tai osa siitä) [Etsi kuvauspyyntö](#) -kenttään .
2. Kuvauspyyntöjen luetteloa suodatetaan automaattisesti sitä mukaa, kun kirjoitat tekstiä hakukenttään. Hakutulokset järjestetään aikataulutetun päivämäärän mukaan.

Voit poistaa hakuehdot napsauttamalla **X** hakukentässä.

Kuvauspyyntöjen hallinta

Jos haluat muokata, poistaa tai merkitä valmiiksi kuvauspyyntöjä, valitse haluamasi kuvauspyyntö ja valitse **Lisää vaihtoehtoja ...** Valitse vastaava toiminto.

Kuvaustyönkulut

Voit luoda QuickPrescribe-toiminnon avulla kuvaustyönkulun, joka koostuu useista eri modalityettien kuvauksista. Näitä kuvaustyönkuluja voidaan käyttää tämän jälkeen kaikissa työasemissa.

Määritä ensin kuvaustyönkulku DTX Studio Core -ohjelmistossa ja ota se käyttöön ohjattujen kuvaus- tai kaappaustoimintojen aikataulutuksen aikana.

Kuvaustyönkulun määrittäminen

1. Napsauta DTX Studio -kuvaketta  ilmoitusalueella näytön alareunassa (näytön yläreunassa, jos käytät Mac-tietokonetta).
2. Napsauta [QuickPrescribe](#). Jos et ole vielä määrittänyt kuvaustyönkuluja, napsauta [Aloita heti](#).
3. Suorita kuvaustyönkulun määrittäminen loppuun DTX Studio Core -ohjelmistossa.

Huomautus

Saat lisätietoja napsauttamalla DTX Studio Core -ohjelmistossa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa [Pikaohje](#)-painiketta.

4. Valitse kuvaustyönkulku joko kuvauspyynnöstä tai ohjatusta kuvanotto-toiminnosta.

Kuvaustyönkulun ottaminen käyttöön

Määritä kuvaustyönkulku DTX Studio Core -ohjelmistossa ja valitse se ohjatun kuvauspyyntö- tai kuvanotto-toiminnon käytön aikana.

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta DTX Studio Home.
2. Napsauta [Kuvauspyyntö](#)  tai [Kuvaa](#) .
3. Napsauta [Pikalähetä](#).

Huomautuksia

- Voit rajata tuloksia kirjoittamalla hakukenttään kuvaustyönkulun nimen (tai osan siitä).
- Näet kaikki määritetyt modalityetit ja parametrit asettamalla hiiren osoittimen kuvaustyönkulun nimen päälle luettelossa. Napsauta [Lisätietoja](#).

4. Aseta hiiren osoitin kuvaustyönkulun nimen päälle luettelossa ja napsauta [Luo kuvauspyyntöjä\(#\)](#). Numero osoittaa valitun kuvaustyönkulun avulla luotujen kuvauspyyntöjen määrän.
5. Valitse hammaskartasta diagnostinen alue, jonka haluat skannata.
6. Napsauta [Luo kuvauspyyntöjä](#).

Kuvauksen suorittaminen

Voit tehdä kuvauksen ennen potilaan diagnosointia, sen aikana tai sen jälkeen joko luomalla ensin kuvauspyynnön tai ilman kuvauspyyntöä.

On erittäin suositeltavaa, että käyttäjät noudattavat ohjelmiston ohjeita ja teknisiä ilmoituksia epätarkan kuvauksen riskin pienentämiseksi.

Ajoitetun kuvauksen suorittaminen

Voit suorittaa kuvauksen kuvauspyynnön perusteella seuraavasti:

1. Napsauta kuvauspyyntökortissa **Aloita**.
2. Jos yhdistettynä on useampi kuin yksi laite, napsauta laitteen ruutua.
3. Skannausmoduuli tai kolmannen osapuolen skannaussovellus avautuu.
4. Noudata annettuja ohjeita.
5. Lopeta toiminto valitsemalla **Valmis** tai avaa potilastietue Clinic-moduulissa valitsemalla **Avaa diagnoosi**.

Välittömän kuvauksen suorittaminen

1. Valitse potilastieto DTX Studio Home -näkyvässä tai avaa potilastietue Clinic-moduulissa.
2. Napsauta **Kuvaa** .
3. Aseta hiiren osoitin laitteen tai kansion ruudun päälle ja napsauta **Valitse**.

Huomautuksia

- Intraoraalikuvat kiertävät automaattisesti oikeaan asentoon. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, [katso sivu 16](#).
- Kun 2D-kuva tuodaan tai otetaan, taso- ja ikkunointiarvot asetetaan automaattisesti. Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä, [katso sivu 17](#).
- Voit käyttää useita erikokoisia sensoreita liittämällä tai irrottamalla sensoreita ohjatun kuvaustoiminnon aikana. Käytössä oleva sensori näkyy näytön oikeassa yläkulmassa*.
- Jos useita sensoreita on liitetty, symboli + tulee näkyviin*. Kaikki liitetyt ja aktiiviset sensorit ovat valmiita kuvaukseen. Röntgensäteily käynnistää kuvan ottamisen.

* Koskee sensoreita ja kuvanlukijoita, joita tuetaan suoraan DTX Studio Clinic -ohjelmistossa. Tämä toiminto on rajallinen laitteille, jotka muodostavat yhteyden TWAIN-liittynällä.

Ohjattu kuvien ottaminen intraoraalisensorien tai kuvanlukijoiden avulla

Intraoraalikuvien ottaminen kuvauspohjan avulla:

1. Aloita välitön skannaus.
2. Napsauta **Kuvauspohja**-välilehteä ja valitse haluamasi kuvauspohja.
3. Valitse asettelu ja kuvat, jotka haluat ottaa.
4. Napsauta **Aloita**.
5. Siirry laitteelle suorittamaan skannaus.
6. Tarkista otetut kuvat esikatselusivulla. Vie hiiren osoitin esikatselukuvan päälle, jotta saat näkyviin muut vaihtoehdot eli **Kierrä**, **Käännä**, **Kuvasuodattimet** suodattimien näyttämiseksi tai piilottamiseksi ja **Ota kuva uudelleen**. Tee muutoksia tarpeen mukaan.
7. Klikkaa **Lopeta**.

Vapaa kuvien ottaminen intraoraalisensorien tai kuvanlukijoiden avulla

Intraoraalikuvien ottaminen ilman kuvauspohjaa:

1. Aloita välitön skannaus.
2. Valitse **Vapaa**-välilehti.
3. Siirry laitteelle suorittamaan skannaus.

Jos olet aktivoinut automaattisen MagicAssist-tunnistuksen, katso seuraavat vaiheet:

- Näytön oikeassa alakulmassa näkyy automaattisen MagicAssist-tunnistuksen kuvake (📷).
- Ohjatussa kaappaustoiminnossa hampaat tunnistetaan automaattisesti. Ne merkitään sinisellä värillä. Napsauttamalla hammasta voit poistaa MagicAssist-merkinnän.
- Intraoraalikuvat kartoitetaan automaattisesti FMX-karttoihin.
- Merkitse tarvittaessa tunnistamattomat kuvat manuaalisesti hammaskarttaan.

Huomautus

Automaattinen MagicAssist-tunnistus on oletuksena käytössä. Se voidaan poistaa käytöstä asetuksissa.

4. Tarkista otettu kuva esikatselusivulla ja määritä tarvittaessa hammasalue.
 - Napsauttamalla **Poista valinta** voit poistaa hammasalueeseen merkittyjen hampaiden valinnan.
 - Tee muutoksia tarvittaessa: vie hiiren osoitin esikatselukuvan päälle, jotta saat näkyviin muut vaihtoehdot eli **Kierrä**, **Käännä**, **Kuvasuodattimet** suodattimien näyttämiseksi tai piilottamiseksi ja **Ota kuva uudelleen**.
 - Kierrä tai käännä otettua kuvaa tarvittaessa.

Toiminto	Kuvake	Pikanäppäimet
Kierrä kuvaa vastapäivään		Alt + ⬅ tai R
Kierrä kuvaa myötäpäivään		Alt + ➡ tai Vaihto+R
Käännä intraoraalikuvaa tai kliinistä kuvaa vaakasuunnassa		U
Käännä intraoraalikuvaa tai kliinistä kuvaa pystysuunnassa		Vaihto+U

5. Klikkaa **Lopeta**.

Ohjattu kuvien ottaminen intraoraalikameroilla

Intraoraalikameran kuvien ottaminen kuvauspohjan avulla:

1. Aloita välitön skannaus.
2. Pysy [Ohjattu](#)-välilehdellä.
3. Valitse intraoraalikameroiden käyttöä varten hampaat, joista haluat kuvat.
4. Paina laitteen painiketta, jos laitteessa on sellainen, tai napsauta [Ota kuva](#).
5. Jos haluat valita toisen hampaan intraoraalikuvien ottamista varten, käytä näppäimistön nuolinäppäimiä ([←](#) ja [→](#)). Vaihtoehtoisesti napsauta valitun hammasalueen hammasta tai napsauta [Edellinen](#) tai [Seuraava](#).

Huomautus

Jos tarvitaan vain yksi kuva hammasta kohti, ota käyttöön [Jatka seuraavaan hampaaseen kuvauksen jälkeen](#) -toiminto jatkaaksesi automaattisesti seuraavaan hampaaseen.

6. Napsauta [Lopeta](#).

Vapaa kuvien ottaminen intraoraalikameroilla

Intraoraalikameran kuvien ottaminen ilman kuvauspohjaa:

1. Aloita välitön skannaus.
2. Napsauta [Vapaa](#)-välilehteä.
3. Paina laitteen painiketta, jos laitteessa on sellainen, tai napsauta [Ota kuva](#).
4. Jos haluat määrittää otetut kuvat tietyn hampaan kuviksi, napsauta pikkukuvaa näytön alareunassa ja valitse vastaava hammas hammasalueelta.

Huomautus

Voit määrittää kuvan useamman hampaan kuvaksi valitsemalla kuvan, napsauttamalla hammasta ja vetämällä hiirellä muiden hampaiden yli.

5. Klikkaa [Lopeta](#).

Intraoraaliskannaus

3Shape TRIOS® -skanneri

1. Napsauta [Kuvaa](#) .
2. Vie hiiren osoitin 3Shape-intraoraaliskannerin ruudun päälle ja napsauta [Valitse](#).
3. Aloita skannaus 3Shape Dental Desktop -sovelluksessa.

Huomautus

Lisätietoja 3Shape TRIOS -intraoraaliskannerin integroinnista on [DTX Studio Core -ohjelmiston käyttöohjeissa](#).

4. Suorita skannausprosessi loppuun.
5. Kuva lisätään potilastietopaneelin [Potilastiedot](#)-välilehdelle.
 - Valmis kuvauspyyntö merkitään valintamerkillä.
 - Avaa potilastieto DTX Studio Clinic -ohjelmistossa napsauttamalla [Avaa diagnoosi](#).

DEXIS-skannerit

Skannausmoduuli* mahdollistaa tuetun DEXIS™-intraoraaliskannerin käytön siten, että DEXIS IS ScanFlow integroidaan DTX Studio Clinic -ohjelmistoon.

* Koskee vain Windows-tietokoneita ja tietokonetta, jota on käytetty kyseisen intraoraaliskannausdatan kaappaamiseen ja jossa on käytettävissä skannauksen RAW-datan kansio. Ylimääräinen DEXIS IS ScanFlow -ohjelmistomoduuli on asennettava.

Intraoraaliskannausdatan kaappaaminen

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta.
2. Napsauta [Kuvaa](#) .
3. Vie hiiren osoitin intraoraaliskannerin ruudun päälle ja napsauta [Valitse](#).
4. Noudata skannausmoduulissa* annettuja ohjeita.
5. Käsitellyt tiedot lisätään potilastietoon.
6. Jos ScanFlow on käytössä ja useita purentamalleja on otettu, tee valinta napsauttamalla ylä- tai alaleukaa hiiren oikealla painikkeella DTX Studio Clinic -ohjelmistossa ja napsauttamalla [Okklusiot](#).

Skannauskopauksen avaaminen uudelleen

Paikallisesti kaapattu intraoraaliskannausdata voidaan avata uudelleen skannausmoduulissa*.

Huomautus

Tämä on mahdollista vain tietokoneessa, jota on käytetty kyseisen skannausdatan keräämiseen.

Voit avata skannausmoduulin uudelleen ja muun muassa muokata ja rajata skannausta ja tehdä siinä mittauksia:

1. Napsauta intraoraaliskannauksen ruutua potilastietueessa.
2. Napsauta [Muokkaa ScanFlow'ssa](#).

DEXIS IS ScanFlow -skannauksen jatkaminen

Voit avata paikallisesti skannatun intraoraaliskannausdatan uudelleen ScanFlow-ohjelmistossa ja muun muassa muokata ja rajata skannausta ja tehdä siinä mittauksia:

1. Valitse potilastiedoissa DEXIS IS -laitteen intraoraaliskannauksen ruutu.
2. Napsauta [Lisää vaihtoehtoja ...](#) ja valitse [Jatka ScanFlow'ssa](#).

ScanFlow-lisäominaisuuksien ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön ScanFlow-lisäominaisuudet, jolloin voit käyttää DEXIS IS 3800 -laitetta IO CAM* -tilassa tai tuoda DEXIS-laitteen raakadataa.

1. Napsauta DTX Studio Home -näkyessä [Valikko](#) .
2. Napsauta [Asetukset](#) ja valitse [DEXIS IS](#).
3. Poista käytöstä [Käynnistä IS ScanFlow skannaustilassa](#).

* IO CAM on käytettävissä vain, jos sinulla on premium-lisenssi ja DEXIS IS 3800 -laite. Tällöin voit muun muassa muokata skannausta, tehdä lisäskannauksia, rajata ja tehdä mittauksia.


Diagnoosin tekeminen tai hoidon suunnittelu

Avaamalla potilastiedot DTX Studio Clinic -ohjelmistossa voit katsella ja tarkistaa potilastietoja ja lisätä potilastietoihin löydöksiä ja mittauksia.

Valitse DTX Studio Home -näkylässä potilastieto **Potilaat**-luettelosta ja napsauta **Avaa potilas** 📁. Vaihtoehtoisesti kaksoisnapsauta haluamasi potilaan nimeä potilasluettelossa tai paina [O]. Voit sulkea potilastiedot tai Clinic-moduulin valitsemalla **Sulje potilas** potilasvalikossa ☰.

Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat DTX Studio Clinic -lisenssityypistä.

Clinic-moduulin esittely

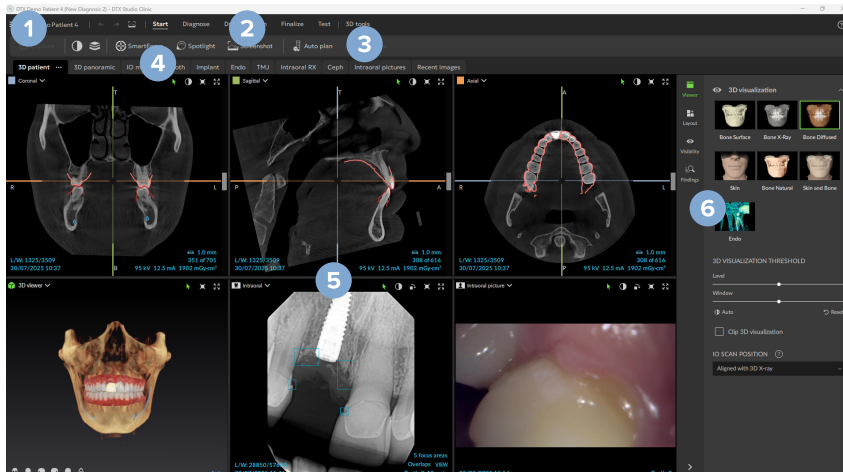

- 1 Potilasvalikko
- 2 Valikkopalkki
- 3 Työkalupalkki
- 4 Työtilapalkki
- 5 Työtila – SmartLayout™
- 6 Älypaneeli

Potilasdiagnoositiedot

Avaa potilasvalikko Clinic-moduulissa napsauttamalla valikkokuvaketta ☰ näytön vasemmassa yläkulmassa.


Diagnoosien hallinta

Potilasvalikossa voit tehdä seuraavat toiminnot:

- Luo **uusi** diagnoosi.
- **Avaa** aiemmin luotu diagnoosi.
- **Tallenna** avattuna oleva diagnoosi.

Hammaskartta

Potilasvalikon hammaskartta näyttää yleiskatsauksen hampaiden tilasta auki olevassa diagnoosissa.

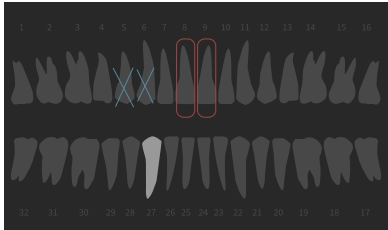

Huomautus

Jos potilas on alle kahdeksanvuotias, näkyviin tulee maitohampaiden hammaskartta. Kun potilas kasvaa, muista vaihtaa hampaat manuaalisesti pysyvien hampaiden hammaskarttaan.

Hammaskartan muokkaaminen

Jos haluat muokata hammaskarttaa, napsauta hammasta hammaskartassa ja valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Kuvake	Toiminto	Selitys
	Vaihda	Voit vaihtaa maitohampaan pysyvään hampaaseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos maitohammasta vastaava pysyvä hammas on olemassa. Jos hammas vaihdetaan, kaikki maitohampaan löydökset poistetaan ja pysyvä hammas asetetaan terveeksi. Huomautus Maitohampaisto näkyy alle kahdeksanvuotiailla potilailla.
	Poista ja jätä aukko	Hammas puuttuu ja sen paikalla on aukko.
	Puhkeamaton hammas	Hammas on puhkeamaton (käytetään usein viisaudenhampaiden tapauksessa).
	Lisää	Voit lisätä maitohampaistoon hampaan, esim. pysyvät poskihampaat.
	Poista ilman aukkoa	Ilmaisee hypodontian.

Potilastiedot

Hammaskartan alla näkyvät avatun potilaan skannaukset ja kuvat tietotyypeittäin ja järjestettyinä kuvauspäivän mukaan. Myös lopulliset implanttisuunnitelmat näkyvät tässä kohdassa.

Napsauttamalla haluamaasi ruutua voit sisällyttää kyseiset potilastiedot avattuun diagnoosiin tai jättää ne pois siitä. Sisällytettyjen kuvien ympärillä on vihreä reunus.

	3D-röntgenkuva		Kefalogrammi
	Intraoraaliskannaus		Kliiniset kuvat
	Laboratoriomalli hammaslaboratoriosta		Kuvankaappaus
	OPG (panoraamakuva)		Kasvoskannaus
	Intraoraalikuva		

Hammaskartan yläpuolella on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:

	Kuvaa	Voit kaapata datan suoraan.
	Tuo	Voit tuoda datan avoimeen diagnoosiin.
	Vie	Voit viedä datan tai potilasdiagnoosiraportit.
	Jaa	3D-esityksen jakaminen.

3D- ja intraoraaliskannausten kuvaikkunoiden taustan asettaminen

1. Napsauta **Preferenssit**-ikkunan kohtaa **3D-kuvaikkuna**.
2. Valitse **Yksivärinen**.
3. Valitse väri avattavasta valikosta tai valitse **Mukautettu** ja valitse mikä tahansa muu väri.
4. Klikkaa **OK**.

Kuvien oletuszoomaustason asettaminen




Näytettävien kuvien oletuszoomaustason asettaminen:

1. Klikkaa **Asetukset**-ikkunassa **Yleistä**.
2. Valitse oletussuurennuksen arvo **Oletuskuvakoko** -luettelosta.
3. Klikkaa **OK**.

Vuorovaikutus kuvaikkunoiden kanssa

Siirry kuvaikkunan yleisiin toimintoihin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa kuvaikkunan kohtaa. Napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella kohdetta (esim. implanttia, huomautusta tai kohdealuetta) saat näkyviin siihen liittyvät erityiset toiminnot.

Voit käyttää hiirtä vuorovaikutukseen kuvaikkunoiden kanssa. Jos haluat vaihtaa oletusarvoiset 3D-kuvaikkunan säätimet DTX Studio Implant -säätimiin tai Invivo-säätimiin, siirry [Yleistä](#)-asetusvalikkoon.

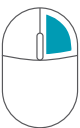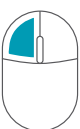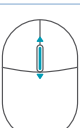Toiminto	3D-kuvaikkuna	Muut kuvaikkunatyypit
 Hiiren oikean painikkeen klikkaus	Kohteiden ja kuvaikkunoiden kontekstivalikko	Kohteiden ja kuvaikkunoiden kontekstivalikko
 Hiiren oikean painikkeen klikkaus ja vetäminen	3D-mallin kiertäminen	Kirkkaus/kontrasti (oletus) tai lähentäminen ja loitontaminen
 Ctrl + klikkaus ja vetäminen tai Cmd + klikkaus ja vetäminen	Panorointi	Panorointi
 Vaihto + klikkaus ja vetäminen	Lähentäminen ja loitontaminen	Lähentäminen ja loitontaminen
 Rullapainikkeen vieritys	Lähentäminen ja loitontaminen	Vain rekonstruoitujen leikkeiden kuvaikkunassa: leikkeiden selaaminen

Työtilat

Valitse työtila työtilapalkista tai käytä vastaavaa pikanäppäintä, jos sellainen on käytettävissä.

Huomautus

Vain ne työtilat, joiden kuvia tai tietoja on lisätty diagnoosiin, ovat näkyvissä.

Työtila	Kuvaus	Pikanäppäin
3D-potilas	Voit tarkistaa ladatun mallin kaikilta puolilta käyttämällä hiiren toimintoja (katso sivu 38) ja pikanäppäimiä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kliinisen näkymän vakiokuvakkeita:  Frontaalinen  Posteriorinen  Vasen lateraalinen  Oikea lateraalinen  Kraniaalinen  Kaudaalinen Painamalla F2-näppäintä uudelleen voit siirtyä IO-mallien työtilaan (jos se on käytettävissä).	F2
3D-panoraama	3D-panoraamaröntgenkuva luodaan ladatun 3D-röntgenkuvan pohjalta.	F3
IO-mallit	Voit tarkastaa ja vertailla intraoraaliskannauksia ja kasvoskannauksia. Painamalla F2-näppäintä uudelleen voit siirtyä 3D-potilastyötilaan (jos se on käytettävissä). Huomautus Eri työtiloissa näkyy vain viimeisin valittu intraoraaliskannaus tai kasvoskannaus.	F2
Hammas	Voit navigoida yksittäiseen hampaaseen ja vertailla kaikkia 2D- ja 3D-tietoja käyttämällä Asettelu-älypaneelia. Voit merkitä valitun hampaan (katso sivu 44). Kohtisuoran kuvaikkunan pystysuuntaisella liukusäätimellä voidaan kiertää leikkeitä hampaan pyörimisakselin ympäri. Tilanteen mukaan seuraavat leikevihjeet osoittavat rekonstruoidun leikkeen suunnan: – Oraalinen/bukkaalinen (O/B) – Mesiaalinen/distaalinen (M/D) – Vasen/oikea (V/O) Pyörimisakselin säätämisen osalta katso sivu 45. Painamalla F4-näppäintä uudelleen voit siirtyä endotyötilaan (jos se on käytettävissä).	F4

Työtila	Kuvaus	Pikanäppäin
Implantti	Voit suunnitella ja tarkastaa implantteja (katso sivu 55). – Napsauta ja vedä rekonstruoitua leikettä tai navigoi haluamaasi kohtaan selaamalla rekonstruoituja leikkeitä. – Voit kääntää tai kiertää implanttia tai ankkurointipinniä mistä tahansa 3D-(KK)TT-datan rekonstruoitujen 3D-leikkeiden kuvaikkunasta klikkaamalla ja vetämällä kyseistä kohdetta, sen kärkeä tai kannatinpisteitä. Voit luoda kirurgisen ohjurin (katso sivu 56).	F9
Endo	Voit keskittyä tiettyyn hampaaseen endodonttista diagnostiikkaa ja toimenpiteitä varten. Saat hampaan pulpan näkyviin napsauttamalla Endo 3D -visualisointia Kuvaikkuna-älypaneelissa. Huomautus Tämä työtila on käytettävissä, jos 3D-röntgenkuva on ladattu. – Juurikanava-kuvaikkunat ja 3D-kuvaikkuna keskittyvät kiinnostuksen kohteena olevaan hampaaseen. – Hampaan poikkileikkeiden kuvaikkuna on ikkuna, jossa näkyy useita vaakasuuntaisia hampaan poikkileikkeitä. – Kun juuren morfologia on tunnistettu automaattisesti (katso sivu 48) tai määritetty manuaalisesti (katso sivu 50), juurikanavat visualisoidaan. Painamalla F4-näppäintä uudelleen voit siirtyä hammastyötilaan (jos se on käytettävissä).	F4
TMJ	Voit tarkastaa kondyylien päät ja leukanivelten alueet.	Ei sov.

Työtila	Kuvaus	Pikanäppäin
Intraoraaliröntgenkuva	Tarkasta intraoraalikuvat kuvauspohjassa, kuten koko suun röntgenkuvasarja. – Kaksoisklikkaamalla kuvaa voit laajentaa sen ja käyttää kuvasuodattimia ja SmartLayout™-toimintoa (katso sivu 43). – Voit vaihtaa toiseen kuvaan klikkaamalla pikkukuvaa Asettelu-älypaneelin yleiskatsauksessa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä (   ) tai näytön nuolipainikkeita ( ). – Voit palata alkuperäisen asettelun yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla kuvaa uudelleen, painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla vasemmalle osoittavaa vihreää nuolta (). – Useita kuvia voi olla pinottuina samaan paikkaan. Napsauta tasokuvaketta (), jotta saat näkyviin kaikki kuvat. Vertaile niitä napsauttamalla vertailukuvaketta (). – Voit valita toisen paikkajärjestelyn napsauttamalla pudotusvalikon nuolta työtilan vasemmassa yläkulmassa. Varmista, että vaihtoehto Näytä päivämäärän mukaan on valittuna. Valitse sitten Kaikki kuvauspohjat ja valitse yksi vaihtoehdoista.	F6
OPG	Voit tarkastella 2D-panoraamaröntgenkuvaa tai monikerroksisia (multilayer) panoraamakuvia.	F5
Kefalo	Voit tarkastella frontaalista ja/tai lateraalista kefalogrammia. Käytä KEFALO -työkalua kefalogrammien laskemiseen ladatun 3D-röntgenkuvan perusteella tai tuo 2D-kefalogrammeja.	F7

Työtila	Kuvaus	Pikanäppäin
Kliiniset kuvat	Voit tarkastella potilaan kliinisiä kuvia. – Kaksoisklikkaamalla kuvaa voit laajentaa sen ja käyttää kuvasuodattimia ja SmartLayout™-toimintoa (katso sivu 43). – Voit vaihtaa toiseen kuvaan klikkaamalla pikkukuvaa Asettelu-älypaneelin yleiskatsauksessa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä (   ) tai näytön nuolipainikkeita ( ). – Voit palata alkuperäisen asettelun yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla kuvaa uudelleen, painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla vasemmalle osoittavaa vihreää nuolta (). – Useita kuvia voi olla pinottuina samaan paikkaan. Napsauta tasokuvaketta (), jotta saat näkyviin kaikki kuvat. Vertaile niitä napsauttamalla vertailukuvaketta (). – Voit valita toisen paikkajärjestelyn (Ortodonttinen, Kamera tai Kliiniset kuvat) klikkaamalla työtilan vasemmassa yläkulmassa. Varmista, että vaihtoehto Näytä päivämäärän mukaan on valittuna. Valitse sitten Kaikki kuvauspohjat ja valitse yksi vaihtoehtoista. Kaksoisklikkaa kuvaa, jota tahdot muokata. Jos haluat kääntää, kiertää, rajata tai suoristaa kliinistä kuvaa, klikkaa kuvaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse vastaava toiminto. Vaihtoehtoisesti klikkaa pudotusvalikon nuolta työtilan vasemmassa yläkulmassa.	F8
Intraoraalikuvat	Samanlainen työtila kuin Kliiniset kuvat, mutta sisältää intraoraalikameran kuvat. Kun hammas on valittu hammaskartasta ja intraoraalista kameraa käytetään kuvien ottamiseen hammastyötilassa, otetut kuvat määritetään automaattisesti valitulle hampaalle. Määritetyt hammasnumerot näkyvät kliinisten kuvien työtilassa. – Kaksoisklikkaamalla kuvaa voit laajentaa sen ja käyttää kuvasuodattimia ja SmartLayout™-toimintoa (katso sivu 43). – Voit vaihtaa toiseen kuvaan klikkaamalla pikkukuvaa Asettelu-älypaneelin yleiskatsauksessa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä (   ) tai näytön nuolipainikkeita ( ). – Voit palata alkuperäisen asettelun yleiskatsaukseen kaksoisnapsauttamalla kuvaa uudelleen, painamalla Esc-näppäintä tai napsauttamalla vasemmalle osoittavaa vihreää nuolikuvaketta (). – Useita kuvia voi olla pinottuina samaan paikkaan. Klikkaamalla tasokuvaketta () saat näkyviin kaikki kuvat ja klikkaamalla vertailukuvaketta () voit vertailla niitä. – Voit valita toisen paikkajärjestelyn napsauttamalla pudotusvalikon nuolta työtilan vasemmassa yläkulmassa. Varmista, että vaihtoehto Näytä päivämäärän mukaan on valittuna. Valitse sitten Kaikki kuvauspohjat ja valitse yksi vaihtoehtoista.	Ei sov.

Työtila	Kuvaus	Pikanäppäin
Äskettäiset kuvat	Äskettäiset kuvat -työtilassa näkyvät kaikki äskettäin tuodut tai otetut kuvat. Työtilassa näkyvät oletuksena kuvat viimeisten seitsemän päivän ajalta. Voit muuttaa tätä oletusta siirtymällä DTX Studio Clinic -ohjelmiston asetuksiin.	F12
Intraoraalika- mera	Erityinen työtila kuvien ottamiseen intraoraalikameralla.	F10

Työtilojen mukauttaminen

1. Klikkaa **Asetukset**-ikkunassa **Yleistä**.
2. Valitse **Oletustyötila**-luettelosta työtila, joka tulee näkyviin oletuksena, kun Clinic -moduuli avataan. Vakioasetus on **Viimeisimmät tiedot** -työtila, joka liittyy viimeksi otettuun tai tuotuun kuvaan.
3. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa **Äskettäiset kuvat** -kentässä niiden päivien lukumäärää, joiden aikana otetut tai tuodut kuvat näkyvät **Viimeisimmät kuvat** -työtilassa. Oletusarvo on 7.
4. Klikkaa **OK**.

Kaikkien liittyvien hammastietojen näyttäminen SmartFocus™-toiminnon avulla

Kuvaikkunoissa, jotka tukevat SmartFocus™-toimintoa, voit ottaa sen käyttöön painamalla välilyöntinäppäintä. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa **Aloita**-työkalurivillä SmartFocus™ -kuvaketta (+).

- Viemällä hiiren hampaan päälle voit nähdä hampaan numeron. Hampaan kiille, dentiini ja ydinontelo on korostettu eri väreillä tunnistamisen helpottamiseksi.
- Voit siirtyä hammastyötilaan klikkaamalla hammasaluetta ja halutessasi ladata tietyn hampaan tiedot kuvaikkunoihin.
- Kun SmartFocus™-toimintoa käytetään hammasalueen ulkopuolella, työtila, jossa työskentellään, keskitetään osoitettuun pisteeseen.

Näkymien mukauttaminen SmartLayout™-toiminnon avulla

Voit muokata työtilaa lisäämällä tai poistamalla kuvaikkunoita **Asettelu**-älypaneelin kautta ja muuttamalla kuvaikkunoiden mittasuhteita.

- Voit lisätä työtilaan toisen kuvaikkunan klikkaamalla ruutua **Asettelu**-älypaneelissa.
- Voit poistaa kuvaikkunan työtilasta klikkaamalla ruutua uudestaan.
- Voit muuttaa kuvaikkunoiden mittasuhteita vetämällä yhtä ikkunanjakajista.
- Kuvaikkunan sulkemiseksi napsauta pudotusvalikon nuolta työtilan vasemmassa yläkulmassa. Valitse **Sulje ikkuna**. Vaihtoehtoisesti paina [Q]-näppäintä.
- Jos haluat järjestää kuvat modaliteetin tai päivämäärän mukaan tai haluat valittujen kuvien näkyvän ensimmäisinä, klikkaa avattavaa **Lajitteluperuste**-valikkoa ja valitse joko **Modaliteetti**, **Päivämäärä** tai **Valitut ensin**.
- Tallenna työtilan asettelu klikkaamalla **Lisää vaihtoehtoja ...** työtilan otsikon vieressä ja valitsemalla **Tallenna työtilan asettelu**. Tämä asettelu asetetaan oletusasetteluksi uusille potilasdiagnooseille. Voit palautta kuvaikkunat alkutilaan klikkaamalla **Nollaa työtila**.


Kuvien liittäminen pikkukuvapalkista

Intraoral RX -työtilan ja **Kliiniset kuvat** -työtilojen alareunassa oleva pikkukuvapalkki sisältää diagnoosiin lisätyt kuvat, joita ei näytetä työtilan katseluohjelmassa.

- Jos haluat järjestää ja liittää intraoraalikuvat, joita ei ole vielä järjestetty automaattisesti, klikkaa **Lajittele** .
- Voit lisätä intraoraalikuvan työtilaan manuaalisesti vetämällä kuvan pikkukuvapalkista ja pudottamalla sen paikkamerkkiin.
- Jos paikkamerkissä on jo kuva, kuvat pinotaan. Viimeisin kuva on päällimmäisenä. Klikkaamalla tasokuvaketta  saat näkyviin kaikki pinossa olevat kuvat.

Älypaneelin hammaskartta

Hammas- ja **Endo**-työtiloissa hammaskartta näkyy älypaneelin yläpuolella.

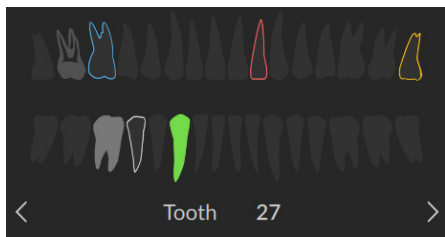

- Aktiivinen hammas, jonka tiedot näkyvät työtilassa, on korostettu vihreällä värillä.
- Voit valita toisen hampaan klikkaamalla hammasta hammaskartassa.
- Voit siirtyä edelliseen hampaaseen klikkaamalla **Edellinen**-kuvaketta () tai seuraavaan hampaaseen klikkaamalla **Seuraava**-kuvaketta ()
- Hammas, jossa on vähintään yksi löydös, on merkitty värillisellä ääriiviivalla. Väri määräytyy löydöksen hoidon tilan mukaan.

Hoidon tila	Väri	Kuvaus
Tila	Harmaa	Löydös ei ole kriittinen, mutta sitä on ehkä tarkkailtava sen kehityksen seuraamiseksi ajan mittaan.
Hoitosuunnitelma	Punainen	Löydös vaatii hoitoa.
Seuranta	Oranssi	Löydös on havaittu varhaisessa vaiheessa, ja sitä tulee tarkkailla.
Valmis	Sininen	Löydöksen hoito on saatu päätökseen.

Luun kynnistyksen säätäminen

Luun kynnystystä säädetään seuraavasti:

- Klikkaa KK(TT)-dataa hiiren oikealla painikkeella 3D-kuvaikkunassa, valitse [Luun kynnystys](#) ja aseta haluamasi kynnystys liukusäätimellä.
- Vaihtoehtoisesti voit käyttää [3D-visualisoinnin kynnysarvo](#) -liukusäädintä älypaneelin [Kuvaikkuna](#)-älypaneelissa.

Rekonstruoitujen leikkeiden säätäminen

- **Voit siirtää** rekonstruoitua leikettä vierittämällä tai klikkaamalla ja vetämällä rekonstruoidun leikkeen viivaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää liukusäätimiä.
- **Voit kiertää** rekonstruoitua leikettä klikkaamalla ja vetämällä rekonstruoidun leikkeen päätä. Voit kiertää kuvadataa kuvaikkunan keskipisteen ympäri vetämällä hiirellä kuvaikkunan sisällä.

Rekonstruoidun leikkeen asento tallennetaan. Voit palauttaa sen oletusasentoon klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella rekonstruoidun leikkeen kuvaikkunaa ja valitsemalla vaihtoehdon [Nollaa rekonstruoidun leikkeen akseli](#).

3D-tilavuuden leikkaaminen

Aktivoi 3D-kuvaikkuna napsauttamalla mitä tahansa sen kohtaa. Tämän jälkeen voit [3D-potilas](#)-, [Hammas](#)- ja [3D-tarkastus](#)-työtilojen [Kuvaikkuna](#)-älypaneelissa piilottaa osan 3D-tilavuudesta ja tarkastaa vain tietyt tilavuuden alueet valitsemalla [Leikkauksen 3D-visualisointi](#) -toiminnon.

Intraoraalikameroiden käyttö työtiloissa

Voit ottaa intraoraalikuvia USB-intraoraalikameralla suoraan [Intraoraalikamera](#)-työtilasta tai toisesta työtilasta:

1. Klikkaa [Intraoraalikamera](#)-työtilan välilehteä tai klikkaa älypaneelin [Kamerat](#)-älypaneelia missä tahansa työtilassa.
2. Tarvittaessa klikkaa kameralaitteen ruutua.
3. Ota kuva painamalla laitteen painiketta. Vaihtoehtoisesti voit klikata [Ota kuva](#) näytön alareunassa.

Potilaskuvien analysointi

Työkalupalkki sisältää työkaluja diagnosointiin, mittaamiseen, hoitojen suunnitteluun ja kuvatietojen muokkaamiseen.

Kaikki työkalut eivät ole käytettävissä jokaisessa työtilassa. Ne työkalut, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaana. Jotkin työkalut on ryhmitelty avattavaan valikkoon (↘). Ryhmitellyistä merkintä- ja mittaustyökaluista on kerrallaan näkyvissä aina viimeksi käytetty työkalu.



Varoitus

Mittaustarkkuus riippuu kuvadatasta, käytetystä skannerilaitteistosta, sen kalibroinnista ja kuvausasetuksista. Mittaus ei voi olla tarkempi kuin kuvan resoluutio. DTX Studio Clinic -ohjelmisto raportoi arvon yhden desimaalin tarkkuudella käyttäjän valitsemien pisteiden perusteella.

Voit siirtyä taustalla oleviin työkaluihin klikkaamalla yhtä työkalurivin välilehdistä.

Työkalu	Työkalurivin polku	Kuvaus
3D-tarkastus	Diagnoosi > 	Kun klikkaat 3D-mallia, voit tarkastaa sen taustalla olevan rekonstruoidun leikkeen. – Rekonstruoitu leike näkyy peittokuvaleikkeiden tarkasteluikkunassa. – Aktiiviset kuvasuodattimet ja leikkeen paksuus otetaan käyttöön leikkeiden tarkasteluikkunassa. – Käy läpi kaikki rekonstruoidut leikkeet vierittämällä. – Kun taustalla olevaa rekonstruoitua leikettä tarkastetaan, 3D-mallia on edelleen mahdollista kiertää. Viimeistele klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta.
3D-esitys	Viimeistele > 	3D-esityksen jakaminen.
Lisää/poista hampaita	3D-työkalut > IO-skannauksen määrittäminen 	Luo tai poista hampaita virtuaalisesti. Puuttuvat hampaat ovat valittuina oletuksena. Jos haluat poistaa ja luoda hampaan yhtäaikaaisesti, klikkaa olemassa olevaa hampaan paikkaa. Jos haluat vain poistaa hampaan tai luoda virtuaalihampaan, klikkaa hammasta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Luo hammas- tai Poista hammas-toiminto. Klikkaa Seuraava ja tarkista lopputulos. Klikkaa Lopeta. Huomautus Saat alkuperäisen intraoraaliskannauksen näkyviin napsauttamalla Näkyvyys-älypaneelia. Valitse muutettu intraoraaliskannaus, napsauta Lisää vaihtoehtoja ... ja valitse Alkuperäinen skannausmalli. Vaihtoehtoisesti voit klikata hiiren oikealla painikkeella intraoraaliskannausmallia työtilan kuvaikkunassa, valita IO-skannaukset ja valita sitten vaihtoehdon Alkuperäinen skannausmalli. Voit säätää virtuaalihammasta käyttämällä Säädä-älypaneelin Kääntö-, Kierto- tai Skaalaus-asetuksia. Valitse Lukitusasento uudelleenlaskennan aikana, jos haluat pitää virtuaalihampaan tässä paikassa, kun klikkaat Laske virtuaalihammas uudelleen ja suoritat MagicAssist-toiminnon uudelleen.

Työkalu	Työkalurivin polku	Kuvaus
Säädä OPG/ PAN-käyrää	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgen- kuva	 Säädä OPG/PAN-käyrää. Voit merkitä pisteitä ja hampaita tarpeen mukaan. Jos hampaat eivät ole selvästi näkyvissä, voit vierittämällä tai käyttämällä oikealla puolella olevaa harmaata liukusäädintä säätää aksiaalisen rekonstruoidun leikkeen sijainnin tasoon, jossa hammaskokonaisuus näkyy (yhdistyen suurin piirtein purentatasoon). Säädä kaarta tarvittaessa: – Voit säätää kaaren muotoa klikkaamalla ja vetämällä yksittäisiä ohjauspisteitä. – Voit lisätä uuden ohjauspisteen kaarta klikkaamalla. – Voit siirtää koko kaarta klikkaamalla ja vetämällä sitä ympäröivää aluetta.
Säädä suuntaa	3D-työkalut > IO-skannauksen määrittäminen	 Voit säätää intraoraaliskannauksen asentoa.
Säädä potilaan asentoa	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgenkuva	 Voit muuttaa potilasmallin asentoa. Voit suunnata 3D-potilasmallin haluamaasi asentoon kääntämällä ja kiertämällä mallia 3D-kuvaikkunoissa. 1. Voit vaihtaa kierto- ja kääntötilan välillä klikkaamalla panorointikuvaketta (👉) tai kiertokuvaketta (🔄) tai painamalla [Sarkain]-näppäintä. Valittu tila näkyy vihreällä värillä korostettuna. 2. Vedä mallia, kunnes se on oikein kohdakkain viiteviivojen kanssa. 3. Napsauta Valmis.
Säädä hampaiden tunnistusta	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgenkuva	 Voit säätää hampaiden paikkoja. Valitse hammaskartasta hammas, jonka haluat kalibroida. Vedä hampaan merkintä oikeaan paikkaan aksiaalisessa rekonstruoidussa leikkeessä. Säädä hampaan akselia kohtisuorassa rekonstruoidussa leikkeessä.
Kohdista kasvokannaus 3D-röntgenkuvaan	3D-työkalut > Kohdista tilavuudet	 Kohdista kasvokannaus 3D-röntgenkuvan kanssa.
Kohdista kasvokannaus IO-skannaukseen	3D-työkalut > Kohdista tilavuudet	 Kohdista kasvokannaus intraoraaliskannaukseen.

Työkalu	Työkalurivin polku		Kuvaus
Kohdistaa IO-skannaus 3D-röntgenkuvaan	3D-työkalut > Kohdistatilaavuudet		Voit kohdistaa intraoraaliskannauksen tai kohdistaa sen uudelleen 3D-röntgenkuvaan.
Analysoi ilmatietä	Diagnoosi > 3D-segmentointi		Analysoi ilmatie. Merkitse kulmat ruudun muodostamiseksi kiinnostuksen kohteena olevan alueen ympärille. Napsauta Valmis . Ilmatien tilavuus ja ahtain alue visualisoidaan 3D-potilas -työtilassa.
Ankkurointipinni	Suunnitelma >		Voit suunnitella ankkurointipinnin.
Kulma	Piirrä >		Voit mitata kulman. Klikkaa kolmea pistettä.
Hyväksy kaikki	Diagnosoi > Painopistevalueet		Hyväksy havaitut keskittymisalueet ja muuta ne löydöksiksi.
Alue	Piirrä >		Voit mitata pinta-alan.
Nuoli	Piirrä >		Voit piirtää nuolen.
Automaattinen endo	Aloita >		Voit antaa ohjelmiston havaita ja laskea juurikanavan reitin.
Automaattinen suunnitelma	Suunnitelma / Aloita > Automaattinen suunnittelu		Voit antaa ohjelmiston laskea alustavan implanttisuunnitelman.
Kirkkaus ja kontrasti	Aloita >		Säädä kirkkautta ja kontrastia vetämällä kuvaikkunassa hiirellä: – Vaakasuunnassa: kontrastin muuttamiseksi. – Pystysuunnassa: kirkkauden muuttamiseksi. Huomautus Kun kirkkaus- ja kontrastityökalua käytetään harmaasävykuvien säätämiseen, taso- ja ikkuna-arvot päivittyvät vastaavasti.
Kuvaa	Aloita >		Voit ottaa kuvia.
KEFALO	Diagnoosi >		Voit luoda 3D-kefalogrammeja tuodun 3D-röntgenkuvan pohjalta.
Tarkista IO-skannauksen kohdistus	3D-työkalut > Kohdistatilaavuudet		Tarkista intraoraaliskannauksen kohdistus 3D-röntgenkuvaan.

Työkalu	Työkalurivin polku		Kuvaus
Ympyrä	Piirrä >	  	Voit piirtää ympyrän.
Yhdistä IO-skannaukset	3D-työkalut > IO-skannauksen määrittäminen	  	Kun lisäät uuden intraoraaliskannauksen, kopioi asiaankuuluvat kohteet ja kohdistus olemassa olevasta intraoraaliskannauksesta.
Vertaa IO-skannauksia	3D-työkalut >		Voit vertailla intraoraaliskannauksia ienten vetäytymisen, hampaiden kulumisen ja muiden erojen seuraamiseksi. Valitse intraoraaliskannaus viiteskannaukseen vertaamista varten. Klikkaa Lopeta. Oletuksena käytetään värillistä etäisyyskarttaa. Valitse Kuvaikkuna-älypaneelissa Peittokuva, jos haluat näyttää kaksi skannausta kohdistettuina toisiinsa. Voit poistaa vertailun käytöstä laittamalla Skannaa vertailu -säätimen pois päältä.
Luo raportti	Viimeistele >		Raporttien luominen .
Mukautettu rekonstruoitu leike	Diagnoosi >		Voit piirtää mukautetun leikesuunnan viivan missä tahansa 3D-potilastyötilan rekonstruoitujen leikkeiden kuvaikkunassa (koronaalinen/sagitaalinen/aksiaalinen) mukautetun rekonstruoidun leikkeen luomiseksi (KK) TT-datan yksityiskohtaista tarkastamista varten. Voit tehdä tämän esimerkiksi juurikanavien merkitsemistä ja tarkastamista sekä muiden merkintöjen tekemistä varten. Voit siirtää mukautettua rekonstruoitua leikettä klikkaamalla ja vetämällä leikkeen viivaa. Voit kiertää mukautettua rekonstruoitua leikettä klikkaamalla ja vetämällä yhtä leikkeen päistä.
Määritä TMJ-alue	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgenkuva	  	Voit määrittää leukanivelen (TMJ) alueen. Tarkista kondyylin pään paikka ohjatun toiminnon osoittamalla tavalla. Napsauta Valmis . TMJ-työtila avautuu mahdollistaen vasemman ja oikean kondyylin päiden vertailun ja leukaniveleen alueen tarkastelun.

Työkalu	Työkalurivin polku		Kuvaus
Etäisyys	Piirrä >		Voit mitata lineaarisen etäisyyden. Määritä etäisyys napsauttamalla kahta pistettä kuvassa. Jos kuvaa ei ole vielä kalibroitu, syötä arvo Viitearvo-kenttään. Kalibroitimittaus tulee näkyviin tilannemallissa ja kalibrointiobjekti lisätään Näkyvyys-älypaneeliin. Jos implantin kärkeä tai kannatinpistettä klikataan, mittaus yhdistetään kyseiseen implanttiin. Kun implanttia siirretään, linkitetty mittaus päivittyy. Mittaus (ja sen tarkkuus) tulee näkyviin.
Piirrä juurikanava	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgenkuva		Määritä juurikanavan liikeradat merkitsemällä viitepisteet kunkin juurikanavan apikaaliseen osaan.
Vie tiedot	Viimeistele >		Potilastietojen vienti.
Luo 3D-malleja	3D-työkalut >		Voit luoda alaleuan, yläleuan ja segmentoitujen hampaiden 3D-malleja.
HU-arvo	Piirrä >		Voit mitata tietyn pisteen HU-arvon. Klikkaa pistettä tilannemallissa HU- tai harmaasävyarvon mittaamiseksi.
Ohita kaikki	Diagnosoi > Painopistea-lueet		Voit jättää huomioimatta tunnistettuja kohdealueita.
Implantti	Suunnitelma >		Voit suunnitella implantin manuaalisesti.
Implantin kulma	Suunnitelma >		Mittaa implanttien välinen kulma.
Viivan paksuus	Piirrä >		Voit valita merkinnän viivan paksuuden.
Alaleuka	Piirrä > Lisää taso		Voit lisätä alaleuan viitetason.
Peiton tilavuus	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgenkuva		Puhdista potilasmalli leikkaamalla ylimääräiset osat pois. Aloita ääriviivan piirtäminen poistettavan osan ympärille klikkaamalla jotain pistettä tilannemallissa. Vahvista klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Huomautus Voit palauttaa alkuperäisen potilasmallin klikkaamalla Lisää vaihtoehtoja ... 3D-visualisointi-kohdan vieressä Näkyvyys-älypaneelissa ja valitsemalla Nollaa 3D-malli.
Uusi implantti-suunnitelma	Suunnitelma > Automaattisen suunnitelma		Voit lisätä toisen implanttisuunnitelman. Kun olet valmis, voit vaihdella implanttisuunnitelmien välillä Implanttisuunnitelma -älypaneelissa.

Työkalu	Työkalurivin polku		Kuvaus
NobelGuide	Suunnitelma >		Voit luoda NobelGuide-ohjurin ja tilata sen Nobel Biocarelta.
OPG/PAN	Diagnoosi >		Voit luoda OPG:n. Panoraamanäkymä (rekonstruoitu leike) lisätään potilastietoihin 2D-kuvana. Luotu kuva avataan 3D-panoraama -työtilassa.
Tilaa tuotteita	Viimeistele >		Voit tilata implanttisuunnitelman osia Nobel Biocarelta tai kopioida niiden tuotenumerot.
Aseta kaikki samansuuntaisiksi	Suunnitelma >		Voit asettaa kaikki saman leuan implantit samansuuntaisiksi valitun implantin kanssa.
Kynä	Piirrä >		Voit piirtää segmentoituja viivoja. Kaikki viivat näkyvät yhtenä merkintänä Näkyvyys -älypaneelissa.
Vapaa piirto	Piirrä >		Voit piirtää vapaamuotoisia viivoja.
Rekonstruoidun leikkeen paksuus	Aloita >		Määritä rekonstruoitujen 3D-leikkeiden kuvaikkunan leikepaksuus. Klikkaa rekonstruoitujen 3D-leikkeiden kuvaikkunaa ja aseta röntgensäteilykeilan paksuus vetämällä vaakasuunnassa. Viimeistele klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Huomautus Voit määrittää leikkeen oletuspaksuuden siirtymällä Kuvan asetukset-välilehteen DTX Studio Home -näytön tai DTX Studio Clinic -ohjelmiston asetuksissa. Valitse näytön oikean yläkulman avattavasta valikosta Rekonstruoidut 3D-leikkeet, 3D-panoraama tai Hammas. Valitse haluamasi paksuus Rekonstruoidun leikkeen paksuus -pudotusvalikosta.
Suorita automaattinen määrittys	3D-työkalut > Aseta 3D-röntgenkuva		Voit määrittää (KK)TT-datan ja alaleuan hermomerkinnän automaattisesti MagicAssist-algoritmillä. Kaikkia automaattisesti tunnistettuja pisteitä voidaan säätää manuaalisesti. Automaattisesti tunnistettuja attribuutteja sisältävät 3D-röntgenkuvat osoitetaan Auto-merkinnällä kuvan oikeassa alakulmassa.
Suorita automaattinen määrittys	3D-työkalut > IO-skannauksen määrittäminen		Voit määrittää intraoraaliskannauksia automaattisesti.
Suorittamisen tunnistus	Diagnosoi > Painopistealueet		Voit tunnistaa 2D-intraoraaliröntgenkuvista kohdealueet, jotka saattavat sisältää hammaslääketieteellisiä löydöksiä (katso sivu 53).

Työkalu	Työkalurivin polku		Kuvaus
Kuvankaappaus	Aloita >		Ota kuvakaappaus. Se lisätään Kliiniset kuvat -työtilaan, Asettelu -älypaneeliin ja DTX Studio Home Potilastiedot -osioon. Kuvakaappaus voidaan lisätä myös raporttiin (katso sivu 44).
Segmentti	Piirrä >		Voit mitata peräkkäiset etäisyydet. Klikkaa ensimmäistä pistettä. Klikkaa sen jälkeen jokaista seuraavaa pistettä. Viimeistele klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Jos implantin kärkeä tai kannatinpistettä klikataan, mittaus yhdistetään kyseiseen implantaattiin. Kun implantaattia siirretään, linkitetty mittaus päivittyy.
SmartFocus	Aloita >		Valitse hammas ja tuo näkyviin kaikki siihen liittyvät tiedot.
Luuppi	Aloita >		Voit suurentaa kuvan alueen (oletusasetus) tai verrata suodattimilla suodatettua kuvaa alkuperäiseen kuvaan. Voit säätää suurennustasoa miinusnäppäimellä (-) ja plusnäppäimellä (+). macOS-käyttöjärjestelmässä voit zoomata käyttämällä vaihtonäppäimen ja plusnäppäimen (+) yhdistelmää. Voit muuttaa Luuppi-toiminnon toimintatapaa siirtymällä DTX Studio Clinic -ohjelmiston asetuksiin.
Kirurginen ohjuri	Suunnitelma >		Voit luoda kirurgisen ohjurin paikallista tuotantoa varten. Määritä kirurgisen ohjurin alue ja aseta oikea holkkityyppi. Napsauta Valmis .
Teksti	Piirrä >		Voit lisätä tekstiä kuvaan.
Jäljitä hermo	Diagnoosi > 3D-segmentointi		Merkitse hermokanava. Klikkaa ensimmäistä ankkuripistettä. Klikkaa sitten jokaista seuraavaa ankkuripistettä. Viimeistele klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta. Säädä hermokanavamerkintää siirtämällä ankkuripisteitä kuvaikkunassa. Kaikki ankkuripisteet näkyvät yhtenä viivana Näkyvyys-älypaneelissa.
Yläleuka	Piirrä > Lisää taso		Voit lisätä yläleuan viitetason.
Vertikaalinen	Piirrä > Lisää taso		Voit lisätä vertikaalisen viitetason.

Diagnostisten löydösten lisääminen

Löydökset-älypaneelissa voit merkitä hampaiden patologioita, leuan ongelmia tai muita diagnostisia löydöksiä hammastasolla.

- Voit lisätä hampaaseen ennalta määritetyn diagnostisen löydöksen valitsemalla tai syöttämällä löydöksen **Löydökset**-älypaneelissa **Lisää löydös** -hakukentän avulla.
- Jos haluat lisätä mukautetun diagnostisen löydöksen, kirjoita mukautettu nimi **Lisää löydös** -hakukenttään ja paina Enter-näppäintä.
- Voit halutessasi lisätä kuvankaappauksen viemällä hiiren osoittimen löydöksen päälle, avaamalla tietopaneelin klikkaamalla oikealle osoittavaa nuolta ja klikkaamalla sitten plus-kuvaketta **Kuvankaappaukset**-kohdassa.
- Tarvittaessa voit määrittää löydöksen tilan klikkaamalla avattavaa valikkoa löydöksen tietojen paneelissa.
- Voit poistaa löydöksen asettamalla hiiren osoittimen löydöksen päälle, klikkaamalla oikealle osoittavaa nuolta, valitsemalla **Lisää vaihtoehtoja ...** ja valitsemalla sitten **Poista**.

Huomautuksia

- Hammas-työtilassa tila osoitetaan visuaalisesti myös hammaskartassa.
- Jos löydös lisätään Hammas-työtilaan, se lisätään tiettyyn hampaaseen.
- Jos löydös luodaan toisessa työtilassa, klikkaa hampaan numeron paikkamerkkiä ja kirjoita hampaan numero löydöksen määrittämiseksi tietylle hampaalle.

Kohdealueen tunnistus

Huomautus

Tätä toimintoa ei välttämättä ole hyväksytty, julkaistu tai lisensoitu myytäväksi kaikilla markkina-alueilla.

DTX Studio Clinic mahdollistaa kohdealueiden automaattisen tunnistuksen 2D-intraoraaliröntgenkuvuissa (IOR). IOR-kuvankaappauslaitteet voivat olla joko digitaalisia sensoreita tai analogisia kuvalevyjä.

Kohdealueen tunnistus on tekoälypohjainen algoritmi, joka hyödyntää konvoluutiohermoverkkoa kuvien segmentointiin sellaisten kiinnostuksen kohteena olevien alueiden paikallistamiseksi, joilla saattaa esiintyä hammaslääketieteellinen löydös tai kuva-artefakti.


Seuraavanlaisten kohdealueiden tunnistusta tuetaan:

- Hammaslöydökset: karies, apikaalinen leesio, juurikanavadefekti, marginaalidefekti, luukato ja hammaskivi.
- Kuva-artefaktit: päällekkäisyys ja viirut.

Kohdealueen tunnistuksen aloittaminen

Kun intraoraalikuvia otetaan tai tuodaan, kohdealueen tunnistus suoritetaan automaattisesti sen tarkistamiseksi, onko kuvissa erityistä huomiota vaativia alueita. Näet osoituksena tästä kuvien yli kulkevan sinisen viivan. Jos tämä toiminto ei ole käytössä MagicAssist-asetuksissa, klikkaa **Kohdealueet** > **Suorittamisen tunnistus** **Diagnoosi**-työkalupalkissa.

- Jos kuvassa näkyy mahdollisia hammaslöydöksiä, kuvan vasemmassa yläkulmassa näkyy sininen **Kohdealueen tunnistus** -kuvake (+9) yhdistettynä numeroon, joka osoittaa hammaslöydösten määrän.
- Jos kuvassa ei näy sinistä kuvaketta, mahdollisia hammaslöydöksiä ei ole havaittu tai kuvaa ei ole tarkastettu. Tämä ei tarkoita sitä, ettei kuvassa voisi olla mahdollisia hammaslääketieteellisiä löydöksiä. Tätä toimintoa käytettäessä tulee noudattaa varovaisuutta.
- Jos kuvassa näkyy mahdollista useiden hampaiden päällekkäisyyttä ja/tai viiruja, kuvan oikeassa alakulmassa näkyy tätä koskeva ilmoitus. Voit tarkistaa ilmoituksen klikkaamalla **Näytä**.

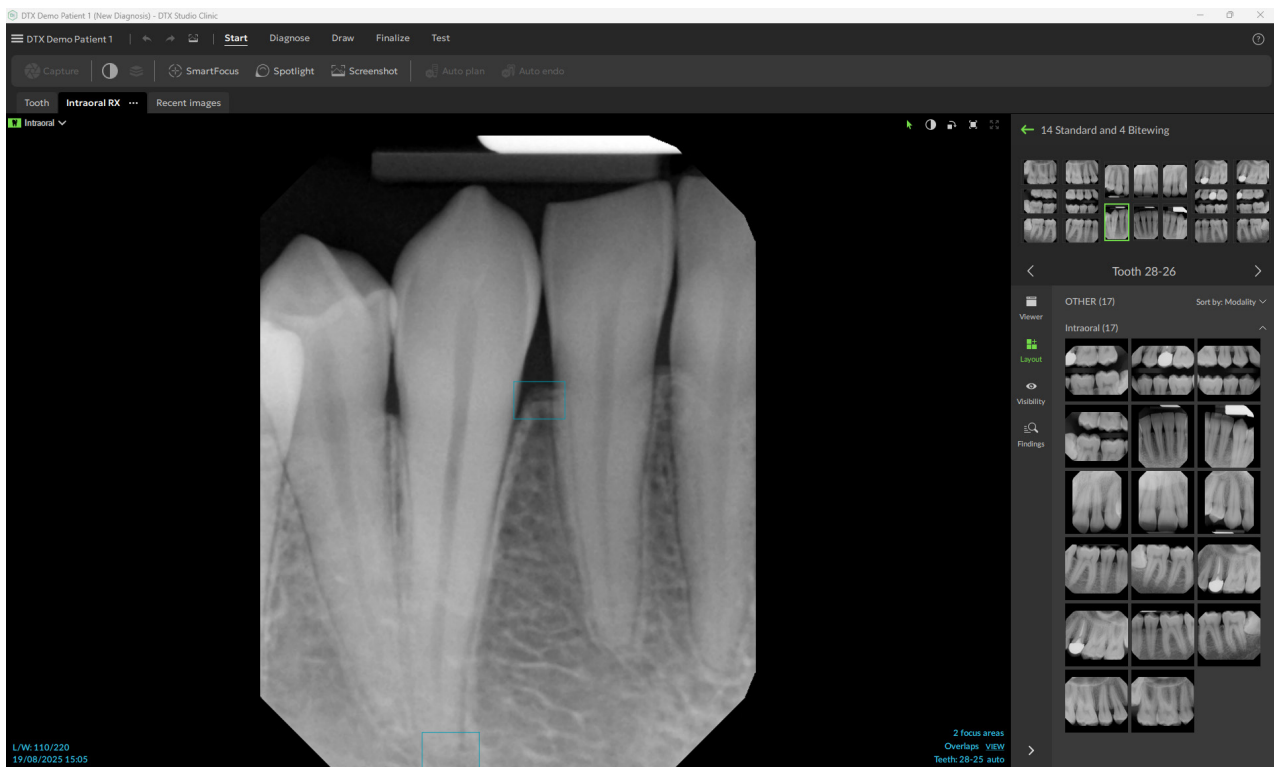


Kohdealueiden tunnistusten hallinta

1. Kun kohdealueen tunnistus on suoritettu, kaksoisklikkaa kuvaa, jossa on kohdealueen tunnistuksen kuvake.


Huomautus

Tätä toimintoa ei välttämättä ole hyväksytty, julkaistu tai lisensoitu myytäväksi kaikilla markkina-alueilla.

- Kohdealueet on merkitty intraoraalikuviin sinisellä suorakulmiolla.

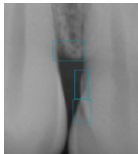

- Vie hiiri kohdealueen päälle, niin löydös näkyy sen omalla värillä. Lisäksi näkyvät hampaan numero (jos tiedossa) ja mahdollisen havaitun hammaslöydöksen tyyppi.

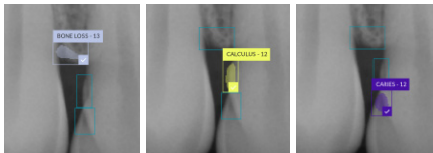

Analysin jälkeen voit valinnaisesti joko hyväksyä mahdollisen hammaslääketieteellisen löydöksen klikkaamalla kohdealuetta hiiren vasemmalla painikkeella tai hylätä sen klikkaamalla kohdealuetta hiiren oikealla painikkeella.



2. Jos hyväksyt löydöksen, kohdealue muuttuu automaattisesti diagnostiseksi löydökseksi. Se lisätään **Löydökset**-älypaneeliin.

Kohdealueet luetellaan myös älypaneelin **Näkyvyys**-välilehdellä, ja ne voidaan näyttää tai piilottaa käyttämällä älypaneelin näkyvyystoiminnon näkyvyyskuvakkeita.

Implanttien ja hoitojen suunnitleminen

Suunnittelutyökalurivi sisältää työkaluja hoitojen suunnitteluun. Näitä työkaluja voidaan käyttää missä tahansa työtilassa, joka sisältää (KK)TT-dataa tai intraoraaliskannauksen, joka on kohdistettu 3D-röntgenkuvaan.

Automaattinen suunnitelma

Intraoraaliskannaus on yhdistettävä 3D-röntgenkuvaan, jotta ohjelmisto voi luoda alustavan implantointisuunnitelman yhdelle hampaalle tai kahdelle vierekkäiselle hampaalle.


Huomautus

Automaattinen suunnittelutoiminto vaatii, että potilaalla on vähintään kolme hammasta. Tämä ratkaisu on kuitenkin suunniteltu ja optimoitu erityisesti yhdelle implantille, kahdelle vierekkäiselle implantille tai kahden vierekkäisen hampaan sille.

1. Klikkaa valikkopalkin kohtaa **Suunnitelma**.
2. Klikkaa **Automaattinen suunnitelma**.
3. Sääda luotua implanttisuunnitelmaa tarpeen mukaan ja klikkaa **Seuraava**.
4. Tarkista tunnistetut hampaat ja klikkaa **Lopeta**.
5. Lasketut implanttien paikat tulevat näkyviin tilannemalliin. Älypaneelissa implantin merkintänä näkyy **Automaattinen**, kunnes sen paikkaa säädetään.

Implantin asettaminen

1. Klikkaa valikkopalkin kohtaa **Suunnitelma**.
2. Napsauta implanttikuvaketta ().
3. Merkitse implantin kannatin- ja kärkipisteet.
4. Aseta implantin tiedot **Implanttisuunnitelma**-älypaneelissa ja valitse implantin merkki ja tyyppi. Luettelossa näkyy enintään kahdeksan äskettäin käytettyä implanttia. Jos haluat valita toisen implanttimerkin tai -tyypin, valitse **+ Implantti**.
5. Aseta hiiren kohdistin implantin päälle nähdäksesi käytettävissä olevat alueet. Kohdistin muuttuu osoittamaan kääntötilaa (↺↻) tai kiertotilaa (↻). Siirrä tai kierrä implanttia klikkaamalla ja vetämällä. Pidä 3D-kuvaikkunassa Ctrl-näppäintä (Cmd-näppäintä Mac-tietokoneessa) painettuna ja siirrä implanttia tai kierrä sitä akselinsa ympäri hiirellä vetämällä.

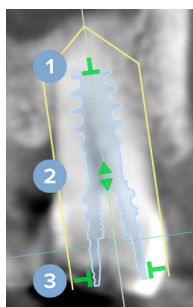

- 1 Säädä pituutta.
- 2 Siirrä sivusuunnassa tai ylöspäin.
- 3 Säädä halkaisijaa.

Huomautus

Muista päivittää valmis kirurginen ohjuri implantin tai ankkurointipinnin muokkaamisen jälkeen. Aseta hiiren kohdistin ruudun päälle älypaneelin **Implanttisuunnitelma**-välilehdellä ja valitse **Päivitä**.

Lisää ankkurointipinni

1. Klikkaa valikkopalkin kohtaa [Suunnitelma](#).
2. Napsauta ankkurointipinnin kuvaketta (↗).
3. Merkitse ankkurointipinnin kannatin- ja kärkipisteet.
4. Aseta hiiren kohdistin ankkurointipinnin päälle nähdäksesi käytettävissä olevat alueet. Kohdistin muuttuu osoittamaan kääntötilaa (↔) tai kiertotilaa (↻). Siirrä tai kierrä ankkurointipinniä klikkaamalla ja vetämällä. Pidä 3D-kuvaikkunassa Ctrl-näppäintä (Cmd-näppäintä Mac-tietokoneessa) painettuna ja siirrä ankkurointipinniä tai kierrä sitä akselinsa ympäri hiirellä vetämällä.

Implanttien asettaminen samansuuntaisiksi

Implantin asettaminen samansuuntaiseksi vertailuimplantin kanssa:

1. Klikkaa samansuuntaiseksi asetettavaa implanttia hiiren oikealla painikkeella.
2. Valitse [Samansuuntainen kuin](#).
3. Valitse vertailuimplantti.

Huomautus

Tämä on implanttinjatke tai implanttialusta, joka asetetaan samansuuntaisesti.

Kaikkien implanttien sijoittaminen samaan leukaan samansuuntaisesti:

1. Valitse implantti, jota haluat käyttää viitteenä.
2. Klikkaa valikkopalkin kohtaa [Suunnitelma](#).
3. Klikkaa [Aseta kaikki samansuuntaisiksi](#).

Implanttien tai ankkurointipinnien lukitseminen

Voit lukita implantin tai ankkurointipinnin napsauttamalla sitä hiiren oikealla painikkeella yhdessä kuvaikkunoista ja valitsemalla vastaavan vaihtoehdon.

Kirurginen ohjuri

Kun implanttisuunnitelma on viimeistelty, voit valmistella kirurgisen ohjurin valmistamiseksi paikan päällä.

Kirurgisen ohjurin valmisteleminen

1. Siirry [Implantti](#)-työtilaan.
2. Valitse [Suunnitelma](#)-työkalupalkista [Kirurginen ohjuri](#).
3. Määritä kirurgisen ohjurin alue, aseta oikea holkkityyppi ja klikkaa [Seuraava](#).
4. Lisää tarkastusikkunat, lisää merkintä, määritä asiantuntija-asetukset ja klikkaa [Lopeta](#).
5. Matalan resoluution kirurginen ohjuri lisätään sinisenä tilannemalliin.

Kirurgisen ohjurin viimeisteleminen

Kun kirurgisen ohjurin suunnittelu on valmis, voit luoda korkean resoluution kirurgisen ohjurin tulostettavaksi.

1. Kun saat valmiiksi edellisen ohjatun toiminnon, näkyviin tulee työkaluvihje. Klikkaa [Luo](#).
Vaihtoehtoisesti vie hiiren osoitin kirurgisen ohjurin päälle [Implanttisuunnitelma](#)-älypaneelissa ja valitse [Luo ohjuri](#).
2. Järjestelmä tekee lisenssitarkistuksen sen varmistamiseksi, että ohjurien luomisen mahdollistavan implanttilaajennusmoduulin lisenssi tai tilaus on voimassa.
3. Valitse haluamasi asetukset ja klikkaa [Seuraava](#).
4. Lue sopimus tarkasti. Hyväksy sopimus klikkaamalla [Olen lukenut ja hyväksyn kaikki yllä olevat tiedot](#).
5. Klikkaa [Luo](#).
6. Tilauksen yleiskatsaus tulee näkyviin. Klikkaa [Tee tilaus](#).
7. Kirurginen ohjuri ja ohjeasiakirjat lisätään potilastietoihin.

Huomautus

Kirurginen ohjuri voidaan lähettää DTX Studio Home -näkyvästä SprintRay-palveluun [Tee yhteistyötä](#) -toiminnon avulla.

8. Jos haluat laskea kirurgisen ohjurin uudelleen eri tulostinasetuksilla, klikkaa [Lisää vaihtoehtoja ...](#) ja valitse [Luo ohjuri uudelleen](#). Uudelleenlaskenta on maksuton.

NobelGuide

Kun implanttisuunnitelma on viimeistelty, voit valmistella NobelGuide-ohjurin, jonka valmistaa Nobel Biocare.

NobelGuide-ohjurin luominen

1. Klikkaa valikkopalkin kohtaa [Suunnitelma](#).
2. Klikkaa [NobelGuide](#).
3. Muokkaa NobelGuide-ehdotusta tarpeen mukaan ja klikkaa [Seuraava](#).
4. Tarkista NobelGuide-ohjurin suunnittelu ja klikkaa [Lopeta](#).
5. NobelGuide tulee näkyviin tilannemalliin ja älypaneeliin.

NobelGuide-ohjurin tilaaminen

1. Jos [Näytä tilausikkuna ohjatun toiminnon lopettamisen yhteydessä](#) on valittu edellisessä ohjatussa toiminnossa, sinut ohjataan automaattisesti ohjattuun tilaustoimintoon.
Vaihtoehtoisesti klikkaa [Tilaus](#) työkaluvihjeessä, joka tulee näkyviin, kun edellinen ohjattu toiminto lopetetaan.
Vaihtoehtoisesti voit asettaa hiiren osoittimen NobelGuide-mallin päälle [Implanttisuunnitelma](#)-älypaneelissa ja klikata [Tilaa NobelGuide](#).
2. Valitse tai tarkista esitetyt toimitustiedot ja lisää puuttuvat tiedot. Klikkaa [Seuraava](#).
Huomautus
Jos lisää huomautuksen [Erikoishuomautus tuotantoa varten](#) -kenttään, tilauksen käsittely voi kestää pitempään.
3. Vahvista valitsemalla [Olen lukenut ja hyväksyn kaikki yllä olevat tiedot](#), että olet tarkistanut ja hyväksynyt käyttöehdot.
4. Tilauksen yleiskatsaus tulee näkyviin. Jatka klikkaamalla [Tee tilaus](#) -painiketta.

5. NobelGuide-tilaus lisätään potilastietueen [Tilaukset](#)-välilehteen DTX Studio Home -näkyvässä. Klikkaa [Näytä tilaus](#) tällä välilehdellä, jos haluat seurata tilausta DTX Studio Go -palvelussa.

Implanttituotteiden tilaaminen

Implanttisuunnitelman osien tilaaminen:

1. Klikkaa valikkopalkin kohtaa [Viimeistelet](#).
2. Klikkaa [Tilaa tuotteita](#). Tuotenumerot kopioidaan leikepöydälle.
3. Siirry Nobel Biocaren verkkokauppaan klikkaamalla [Jatka](#).

Raportit

Raporttien luominen

Raportin luominen löydöksistä tai pohjaksi potilasta koskeville dokumenteille:

1. Klikkaa valikkopalkin kohtaa [Viimeistelet](#).
2. Klikkaa [Luo raportti](#).
3. Valitse raporttimalli.
4. Valitse [sisällytettävien kuvien](#) aikaväli.
5. Klikkaa [Vie raportti](#).
6. Raportti viedään muokattavassa .odt-muodossa, ja se avautuu oletusarvoisessa tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten Microsoft Officeissa, LibreOfficeissa tai OpenOffice Writerissa.
7. Tee muutoksia tarvittaessa.
8. Tallenna raportti.

Mukautettujen klinikan logojen lisääminen

Raportin yläotsakkeeseen lisätään oletuksena DTX Studio Clinic -kuvake. Mukautetun logon lisääminen:

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunassa [Yleistä](#).
2. Klikkaa [Selaa](#).
3. Valitse uusi logo.
4. Klikkaa [Avaa](#).
5. Klikkaa [OK](#).

DTX Studio Implant -ohjelmiston avaaminen

DTX Studio Clinic- ja DTX Studio Implant -ohjelmistojen yhdistäminen

1. Klikkaa DTX Studio Home [Asetukset](#) -ikkunan kohtaa [DTX Studio Implant](#).
2. Klikkaa [Selaa](#), siirry DTX Studio Implant -asennuskansioon, valitse .exe-tiedosto ja klikkaa [Avaa](#).

Huomautus

Määritä potilastietojen sijainti siltä varalta, että joudut lisäämään potilastiedot potilastietueeseen DTX Studio Implant -ohjelmistossa manuaalisesti. Tämä voi tulla kysymyksen siinä tapauksessa, että potilastieto on jo olemassa DTX Studio Implant -ohjelmistossa tai DTX Studio Implant -ohjelmistoon viedään intraoraaliskannauksia, mutta niitä ei ole kohdistettu 3D-röntgenkuvaan.

3. Klikkaa [OK](#).

DTX Studio Implant -ohjelmiston käynnistäminen

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta DTX Studio Home.
Huomautus
Kyseiselle potilaalle täytyy olla saatavilla vähintään yksi 3D-röntgenkuva.
2. Klikkaa [Implantti](#) .
3. Valitse [Avaa olemassa oleva potilas](#) tai [Vie uutena potilaana](#).
4. Jos 3D-röntgenkuvia on enemmän kuin yksi, valitse asianmukainen ruutu.
5. Napsauta [Vie](#).
6. Näyttöön tulee onnistumisesta ilmoittava viesti. Klikkaa [OK](#).
7. Potilastieto luodaan ja/tai avataan DTX Studio Implant -ohjelmistossa.

Tilaukset ja yhteistyökumppanuudet

Leikkaussuunnitelman, kirurgisen ohjurin tai restauraation tilaaminen

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta DTX Studio Home.
2. Klikkaa [Tee yhteistyötä](#).
3. Aseta hiiren osoitin [Leikkaussuunnitelma](#)-, [Kirurginen ohjuri](#)- tai [Restauraatio](#)-kohteen päälle.
4. Klikkaa [Valitse](#).
5. Valitse potilastiedot, jotka haluat lähettää laboratorioon tai lääkärille.
6. Klikkaa [Jatka](#).
7. Tilausluonnos luodaan DTX Studio Go -ohjelmistossa. Lisää puuttuvat tiedot ja lähetä tilaus laboratoriolle tai lääkärille, johon ohjelmistosta voidaan muodostaa yhteys.
8. Klikkaa potilastietojen [Tilaukset](#)-välilehteä nähdäksesi kaikki kyseisen potilaan tilaukset.

Huomautus

Huomaa, että joitakin näissä käyttöohjeissa kuvailtuja tuotteita ei ehkä ole hyväksytty paikallisten säännösten mukaan tai ne eivät ehkä ole lisensoitavissa tai saatavissa kaikilla markkina-alueilla.

Yhteyden muodostaminen yhteistyökumppaniin

Jotkut ulkopuoliset yhteistyökumppanit voivat tarjota palveluita, jotka on integroitu suoraan DTX Studio Clinic -ohjelmistoon. Tilaus voidaan luoda DTX Studio Clinic-ohjelmistossa ja lähettää yhteistyökumppanin järjestelmään.

Jos alueellasi on sopivia palveluntarjoajia, aloita muodostamalla yhteys yhteistyökumppanin tiliin DTX Studio Go -palvelussa.

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta.DTX Studio Home
2. Klikkaa [Tee yhteistyötä](#) .
3. Aseta hiiren osoitin yhteistyökumppanin nimen päälle ja valitse [Määritä](#).
4. Klikkaa [Jatka](#).
5. Muodosta yhteys noudattamalla DTX Studio Go -palvelun ohjeita.

Tilaaminen suoraan yhteistyökumppanilta

Kun yhteistyökumppanin tiliin on muodostettu yhteys DTX Studio Go -palvelussa, voit käyttää yhteistyökumppanin palveluita.

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta.DTX Studio Home
2. Klikkaa [Tee yhteistyötä](#) .
3. Aseta hiiren osoitin yhteistyökumppanin nimen päälle ja klikkaa [Valitse](#).
4. Valitse lähetettävät potilastiedot.
5. Klikkaa [Jatka](#).
6. Tiedostot ladataan palveluun.
7. Jatka tilausprosessia yhteistyökumppanin verkkosivustolla.
8. Kun tilaus on lähetetty, se lisätään potilastietojen [Kumppanitapaukset](#) -välilehdelle.

Kumppanitapauksen tarkasteleminen tai uusien tietojen lisääminen

1. Valitse potilastieto potilasluettelosta.DTX Studio Home
2. Klikkaa [Tilaukset](#)-välilehteä.
 - Klikkaa [Näytä tapaus](#) tapauksen avaamiseksi yhteistyökumppanin verkkosivustolla.
 - Klikkaa [Lisää uusia tietoja](#), jos haluat lähettää tapaukseen uusia tietoja.



Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Ruotsi
www.nobelbiocare.com

Maahantuoja Uudessa-Seelannissa:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
Uusi-Seelanti
Puhelin: +64 0800 441 657

Sponsori ja maahantuoja:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Suite 4.02, Level 4, Building A,
1 Eden park drive Macquarie Park NSW 2113
Australia
Puhelin: +61 1800 804 597

Maahantuoja Turkissa:

EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Seba Office Boulevard Ayazağa Mah.
Mimar Sinan Sk. No:21 A38
Sarıyer/İstanbul,
DEN-EOT-info@envistaco.com



Maahantuoja/edustaja Sveitsissä:


Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Sveitsi

Valtuutettu edustaja Ukrainassa:

TOV Inspe
42 Brativ Mikhnovskykh Street
79018, Lviv
Ukraina
Puh./faksi: +38 (032) 240 37 05
Sähköposti: info@inspe.ua



UA.TR.099

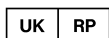

Vastuutaho Yhdistyneessä kuningaskunnassa:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Yhdistynyt kuningaskunta



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com