



DTX Studio™ Clinic

4.10 versija

Naudojimo instrukcija

Turinys

Ivadas	6
Atsakomybės apribojimas	6
Prietaiso aprašymas	6
Numatytoji paskirtis	6
Naudojimo paskirtis ir naudojimo indikacijos	6
Naudojimo paskirtis ir numatytoji tikslinė pacientų grupė	6
Palaikomi gaminiai	6
Reikalingas suderinamumas su kitais prietaisais	7
Intraoraliniai jutikliai	7
Intraoralinės kameros	7
Intraoralinis skenavimas	7
Programinė įranga	7
Prietaisai su matavimo funkcija	7
Kontraindikacijos	7
Kibernetinė sauga	7
Ką daryti įvykus kibernetinio saugumo pažeidimui?	8
Išmontavimas ir utilizavimas	8
Sąveikumas	8
Numatytoji naudojimo trukmė	8
Charakteristikų reikalavimai ir apribojimai	8
Klinikinė nauda ir nepageidaujamas šalutinis poveikis	9
Pranešimas apie rimtus incidentus	9
Įranga ir mokymai	9
Profesionalus naudojimas	9
Sistemos reikalavimai	9
Programinės įrangos įdiegimas	9
Naudojimo nurodymai	9
Perspėjimai ir įspėjimai	10
Perspėjimai	10
Įspėjimai	11
Sistemos reikalavimai	13
Pradžia	14
Programinės įrangos paleidimas	14
Programinės įrangos uždarymas	14
Naršymas DTX Studio Home	14
Pranešimų srities apžvalga	15

Nustatymų koregavimas	15
Numatytųjų koregavimas DTX Studio Home Nustatymai	15
Nustatymų eksportavimas arba importavimas	15
Kalbos ir datos / laiko formato keitimas	16
DICOM atitikties nustatymų koregavimas	16
Numatytųjų vaizdo filtrų nustatymas	16
Burnos ertmės vaizdų automatinio sukimo išjungimas	16
Automatinio lygio ir lango verčių nustatymo išjungimas	17
Prisijungimas prie DTX Studio Core	17
Įtraukti nuorodą į veiksmų sritį	17
Odontologijos klinikos valdymo sistemos (angl. „Practice Management System“ – PMS) integracijos įjungimas	18
Implantų gaminių diegimas	18
TWAIN palaikomo prietaiso įtraukimas	18
Tiesioginio aplanko trečiųjų šalių prietaisų vaizdams aptikti konfigūravimas	18
Numatytųjų eksportavimo aplankų nustatymas	19
Automatinio išsaugojimo uždariant „DTX Studio Clinic“ įjungimas	19
Kaip rasti mokymosi išteklių ir kreiptis į aptarnavimo tarnybą	19
Kaip peržiūrėti visus mokymosi išteklius ir sparčiuosius klaviatūros klavišus	19
Kreipimasis į klientų aptarnavimo skyrių	19
 Pagrindinių funkcijų apžvalga	 20
 Pacientų įrašai	 21
Naujo paciento įrašo kūrimas	21
Pacientų įrašų tvarkymas	21
Privatumo parinkčių tvarkymas	21
Pacientų įrašų paieška ir rūšiavimas	22
Pacientų sąrašo rūšiavimas	22
Paciento įrašo paieška	22
Paciento įrašo eksportavimas	22
 Duomenų tvarkymas	 23
Duomenų importavimas	23
Vaizdų importavimas iš trečiųjų šalių prietaisų	23
Vaizdų importavimas velkant ir nuleidžiant	23
Vaizdų importavimas į Clinic modulį	23
Importavimas iš iškarpinės	24
Importavimas iš programinės įrangos „3Shape Dental Desktop“	25
Chirurginės operacijos plano importavimas	25
Duomenų pasirinkimas	25
Pasirinkite paciento vaizdus	25

Dalijimasis duomenimis	26
Bendrinkite paciento duomenis per DTX Studio Go (per „GoShare“)	26
Dalijimasis 3D pateiktimi	27
Dalijimasis 2D vaizdais el. paštu arba jų perkėlimas į trečiosios šalies programą	27
Duomenų eksportavimas	27
Paciento įrašo eksportavimas	27
Paciento duomenų eksportavimas	28
Eksportuoti į 3D peržiūros programą	28
Spausdinti DICOM vaizdus	28
Implantų plano eksportavimas į „X-Guide“	28
Skenavimo prašymų pateikimas	29
Skenavimo suplanavimas	29
Skenavimo prašymų paieška ir rūšiavimas	29
Skenavimo prašymų sąrašo filtravimas	29
Skenavimo prašymo paieška	30
Skenavimo prašymų tvarkymas	30
Skenavimo darbo eiga	30
Skenavimo darbo eigos nustatymas	30
Skenavimo darbo eigos taikymas	30
Skenavimas	31
Suplanuoto skenavimo atlikimas	31
Nedelsiamo skenavimo atlikimas	31
Gidu valdomas fiksavimas naudojantis intraoraliniais jutikliais arba PSP prietaisais	31
Laisvas fiksavimas naudojantis intraoraliniais jutikliais arba PSP prietaisais	32
Gidu valdomas vaizdų fiksavimas naudojantis burnos ertmės kameromis	33
Laisvas vaizdų fiksavimas naudojantis intraoralinėmis kameromis	33
Intraoralinis skenavimas	33
3Shape TRIOS® skeneris	33
DEXIS skeneriai	34
Intraoralinės skenuotos nuotraukos duomenų įgijimas	34
Skenavimo atvejo atidarymas iš naujo	34
Kaip tęsti darbą programoje „DEXIS IS ScanFlow Scan“	34
Išplėstinių „ScanFlow“ funkcijų įjungimas	34
Diagnozės nustatymas arba gydymo suplanavimas	35
Clinic modulio apžvalga	35
Paciento diagnozės duomenys	35
Diagnozių valdymas	35
Dantų schema	36
Dantų schemos redagavimas	36

Paciento duomenys	37
3D ir intraoralinės skenuotos nuotraukos peržiūros programos fono nustatymas	37
Numatytojo vaizdo mastelio dydžio nustatymas	37
Darbas su peržiūros programomis	38
Darbo sritys	39
Darbo sričių tinkinimas	42
Visos susijusios danties informacijos rodymas naudojant SmartFocus™	43
Vaizdų tinkinimas naudojant SmartLayout™	43
Vaizdų naudojimas iš miniatiūrų juostos	43
Išmaniojo skydelio dantų schema	44
Kaulo slenkstinės vertės koregavimas	44
Pjūvių koregavimas	44
3D tūrio kirpimas	45
Dantų burnos ertmės kamerų naudojimas darbo srityse	45
Pacientų vaizdų analizė	45
Gautų diagnostikos duomenų įtraukimas	52
Fokusavimo srities aptikimas	53
Fokusavimo srities aptikimo naudojimas	53
Fokusavimo srities aptikimo valdymas	54
Implantų ir gydymo planavimas	55
Automatinis planas	55
Implanto įdėjimas	55
Tvirtinamojo kaiščio įtraukimas	56
Visų implantų įdėjimas lygiagrečiai	56
Implantų arba tvirtinamųjų kaiščių užrakinimas	56
Chirurginis gidas	56
Chirurginio šablono paruošimas	56
Chirurginio gido užbaigimas	57
„NobelGuide“	57
„NobelGuide“ kūrimas	57
Užsisakykite „NobelGuide“	57
Užsisakykite implantų detales	58
Ataskaitos	58
Ataskaitų kūrimas	58
Pasirinktinių odontologijos klinikos logotipų įtraukimas	58
Atidarymas DTX Studio Implant	59
DTX Studio Clinic ir DTX Studio Implant sujungimas	59
DTX Studio Implant paleidimas	59
Užsakymai ir bendradarbiavimas su partneriais	59
Chirurginės operacijos plano, chirurginio gido arba restauravimo užsakymas	59
Ryšio su partneriu nustatymas	60
Užsakykite tiesiogiai iš partnerio	60
Kaip peržiūrėti partnerio bylą arba įtraukti naujų duomenų	60

Įvadas

Atsakomybės apribojimas

Šis gaminys yra bendros koncepcijos dalis ir gali būti naudojamas tik kartu su susijusiais originaliais gaminiais, vadovaujantis „Nobel Biocare“, toliau vadinamos Bendrove, nurodymais ir rekomendacijomis. Jei kartu su „Nobel Biocare“ gaminiais naudojami nerekomenduojami trečiųjų šalių gaminiai, anuliuojama bet kokia garantija arba kiti išreikšti ar numanomi „Nobel Biocare“ įsipareigojimai. Vartotojas privalo nuspręsti, ar gaminys tinka konkrečiam pacientui ir konkrečiomis aplinkybėmis. Bendrovė atsisako bet kokios išreikštos ar numanomos atsakomybės ir nebus laikoma atsakinga už jokią tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją ar kitokią žalą, atsiradusią dėl bet kokių profesinio sprendimo ar praktikos klaidų naudojant šiuos gaminius arba susijusių su šiomis klaidomis. Vartotojas taip pat privalo reguliariai domėtis naujausiais pakeitimais, susijusiais su šiuo gaminiu ir jo naudojimu. Kilus abejonių vartotojas turi kreiptis į Bendrovę. Už šio gaminio naudojimą yra atsakingas vartotojas. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už žalą dėl netinkamo gaminio naudojimo.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie šioje naudojimo instrukcijoje nurodyti gaminiai dėl priežiūros institucijų reikalavimų gali būti parduodami ar licencijuojami ne visose šalyse.

Prieš naudodami DTX Studio™ Clinic programinę įrangą atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir saugokite jas, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje. Atkreipkite dėmesį: šiame dokumente pateikta informacija skirta tam, kad programine įranga galėtumėte greitai pradėti naudotis.

Prietaiso aprašymas

DTX Studio Clinic yra gydytojams odontologams / gydytojams skirta programinės įrangos sąsaja, naudojama tam, kad gydant dantų, kaukolės, žandikaulių bei veido ir susijusias ligas būtų galima laiku analizuoti dvimačių ir trimačių vaizdų duomenis. DTX Studio Clinic rodo ir apdoroja iš įvairių prietaisų (intraoralinių ir ekstraoralinių rentgenogramų, KPKT skenerių, intraoralinių skenerių, intraoralinių ir ekstraoralinių kamerų) gautus vaizdinius duomenis.

Numatytoji paskirtis

Programinė įranga skirta tam, kad būtų lengviau vykdyti diagnostikos ir gydymo planavimo procesą atliekant dantų, kaukolės, veido bei žandikaulio procedūras.

Naudojimo paskirtis ir naudojimo indikacijos

DTX Studio Clinic yra programinė įranga, skirta dantų, kaukolės, žandikaulių bei veido vaizdinei informacijai fiksuoti, valdyti, perduoti ir analizuoti. Ją galima naudoti projektuojant dantų protezavimo sprendimus, kad gautuose dantų duomenyse būtų lengviau aptikti įtariamą problemas.

Ji naudojama iš įvairių šaltinių gautiems skaitmeniniams vaizdams rodyti ir patobulinti, kad būtų lengviau nustatyti diagnozę ir atlikti gydymo procedūras. Šiuos vaizdus ji saugo ir pateikia sistemoje arba skirtingose vietose esančiose kompiuterių sistemose.

Naudojimo paskirtis ir numatytoji tikslinė pacientų grupė

DTX Studio Clinic programinę įrangą tarpdalykinė gydytojų grupė naudoja kaip pagalbinę priemonę gydant pacientus, kuriems reikia taikyti dantų, kaukolės, veido, žandikaulių ar susijusių gydymo metodus.

Palaikomi gaminiai

Chirurginio gido formos failas (STL).

Reikalingas suderinamumas su kitais prietaisais

DTX Studio ekosistema yra suderinama su dažniausiai naudojamomis operacinėmis sistemomis „Windows“ ir „Mac“, įskaitant jų naujausius leidimus.

DTX Studio Clinic programinė įranga sujungta su kitais mediciniais prietaisais ir suderinama su ankstesnėmis DTX Studio Clinic versijomis.

Intraoraliniai jutikliai

DEXIS™ Titanium, DEXIS Platinum, GXS-700™, DEXIS IXS™, DEXIS IXS™ – S, Gendex™ GXS-700™, DEXIS™ Ti2, DEXIS™ Ti2 – S.

Intraoralinės kameros

DEXIS™ DexCAM™ 4 HD, DEXIS™ DexCAM 3™, DEXIS™ DexCAM 4™, Gendex™ GXC-300™, KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD, KaVo DIAGNOcam™, CariVu™, KaVo ERGOcam™ One.

Intraoralinis skenavimas

Suderinamumas su „MEDIT Link“ programine įranga*

Suderinamumas su „DEXIS™ IS ScanFlow“*, kuri palaiko CS 3600 / DEXIS IS 3600, CS 3700 / DEXIS IS 3700 intraoralinius skenerius, CS 3800 / DEXIS IS 3800, „DEXIS™ Imprevo“ arba kitus suderinamus modelius.

Programinė įranga

DTX Studio™ Core*, DTX Studio™ Implant, DTX Studio™ Go, DTX Studio™ Lab*, „CyberMed OnDemand3D™“*, „Osteoid“ (anksčiau buvo vadinama „Anatomage“) „InVivo™“.

* Produktas skirtas tik „Windows“ operacinei sistemai.

Atnaujinus programinės įrangos versiją, rekomenduojama patikrinti svarbius atidarytų pacientų atvejų ir (arba) gydymo plano nustatymus ir įsitikinti, kad jie ir naujoje programinės įrangos versijoje yra teisingi. Dėl neteisingų nustatymų, diagnozės, planavimo ar pačio gydymo galima nespėti laiku užbaigti arba šiuos darbus gali tekti atidėti.

Prietaisai su matavimo funkcija

Matavimų tikslumas ir precizija yra 0,1 mm tiesiniams matavimams ir 0,1 laipsnio kampiniams matavimams, remiantis tūrinės kompiuterinės tomografijos (CBCT) skenogramų, gautų laikantis skaitytuvo įrangos naudojimo instrukcijų, įvestimi, kurių vokselio dydis yra 0,5 mm x 0,5 mm x 0,5 mm.

DTX Studio Clinic teikia vertes, suapvalintas iki vieno skaitmens po kablelio, remiantis naudotojo parinktais taškais.

Kontraindikacijos

Kontraindikacijų nenustatyta DTX Studio Clinic.

Kibernetinė sauga

Gydymo duomenų apsauga nuo kibernetinių grėsmių yra bendra mūsų, gamintojo ir jūsų, kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo, atsakomybė. „Nobel Biocare“ ėmėsi atsargumo priemonių siekdama užtikrinti programinės įrangos apsaugą nuo tokių grėsmių.

Kompiuteryje, kuriame DTX Studio Clinic bus naudojama, rekomenduojama įdiegti aktyvią ir atnaujintą antivirusinę ir apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinę įrangą bei tinkamai sukonfigūruotą užkardą. To nepadarius gali būti panaudota neteisėta prieiga.

Atliekant DTX Studio Core sąranką, rekomenduojama prisijungti prie DTX Studio Core naudojant <https://>. Žr. DTX Studio Core gaires apie šio ryšio nustatymą.

Rekomenduojama nustatymuose įjungti audito registravimą, kad būtų užtikrinta šių žurnalų apsauga nuo neteisėtos prieigos. To nepadarius gali nepavykti aptikti kenkėjiškos veiklos.

Be priežiūros paliekamą kompiuterį visada užrakinkite. To nepadarius gali būti panaudota neteisėta prieiga.

Pasirūpinkite, kad biuro tinklas būtų apsaugotas nuo neteisėtos prieigos ir atskirtas nuo lankytojų tinklo. To nepadarius gali būti panaudota neteisėta prieiga.

Rekomenduojama reguliariai kurti pacientų duomenų atsargines kopijas, kad būtų galima greitai atkurti sistemą įvykus netikėtiems gedimams ar kenkėjiškos veiklos atvejais.

Rekomenduojama DTX Studio Clinic paleisti be administratoriaus teisių. Kitaip gali būti netyčia paleistos trečiųjų šalių vykdomosios kenkėjiškos programos.

Rekomenduojama visada atnaujinti DTX Studio Clinic į naujausią pasiekiamą programinės įrangos versiją. To nepadarius gali būti panaudota neteisėta prieiga.

Daugiau techninės informacijos apie atsargines kopijas, užkardą ir saugos nustatymus diegimo metu žr. DTX Studio Clinic diegimo vadovė.

Pateikus prašymą gali būti pateikta programinės įrangos sąmata (SBOM). Kreipkitės į vietinį klientų aptarnavimo arba pagalbos skyrių (www.dtxstudio.com/en-int/support), kad gautumėte kopiją.

Ką daryti įvykus kibernetinio saugumo pažeidimui?

Įvykis sistemos pažeidimui dėl įsilaužimo ar kenkėjiškos programinės įrangos, naudotojas gali pastebėti nepažįstamą gaminio veikseną ir (arba) poveikį našumui. Tokiu atveju naudotojui rekomenduojama nedelsiant kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą (www.dtxstudio.com/en-int/support).

Išmontavimas ir utilizavimas

Baigus naudoti DTX Studio Clinic kompiuteryje arba utilizuojant kompiuterį, kuriame įdiegta DTX Studio Clinic:

- Sukurkite visų būtinų duomenų atsarginę kopiją iš programos, atsižvelgdami į vietos įstatymus ir taisykles dėl duomenų apsaugos ir duomenų privatumo, kad išvengtumėte aktualios informacijos praradimo.
- Išdiekite programą: programą iš įrenginio būtina išdiegti, atsižvelgiant į operacinės sistemos teikėjo instrukcijas, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos prie DTX Studio Clinic ir programinėje įrangoje saugomų duomenų.

Sąveikumas

DTX Studio Clinic sąveiki su toliau nurodyta programine įranga.

- DTX Studio Core
- DTX Studio Implant
- DTX Studio Go
- DTX Studio Lab
- „CyberMed OnDemand3D“
- „Medit Link“
- „DEXIS IS ScanFlow“
- DTX Studio Assist: Daugiau informacijos žr. [DTX Studio Assist naudojimo instrukcijoje](#).

Numatytoji naudojimo trukmė

Numatytas programinės įrangos naudojimo laikas yra treji metai. Palaikomose operacinėse sistemose ji ir toliau atliks savo paskirtį.

Charakteristikų reikalavimai ir apribojimai

Svarbu užtikrinti, kad DTX Studio Clinic programinė įranga būtų naudojama tik su patvirtintomis operacinėmis sistemomis. Daugiau informacijos rasite naudojimo instrukcijų skyriuje [Sistemos reikalavimai](#).

Klinikinė nauda ir nepageidaujamas šalutinis poveikis

DTX Studio Clinic yra dantų, kaukolės, žandikaulių bei veido gydymo dalis. Gydytojai gali tikėtis, kad programinė įranga jiems padės atlikti diagnostikos ir gydymo planavimo procesą.

Klinikiniai programinės įrangos privalumai:

- Galima atlikti vaizdų vizualizavimą, analizę ir anotavimą diagnozei pagrįsti.
- Lengviau planuoti implantus ir kurti chirurginius gidus, siekiant geresnio gydymo planavimo.

Nenustatyta jokio nepageidaujamo šalutinio DTX Studio Clinic poveikio.

Pranešimas apie rimtus incidentus

Jei naudojant šį prietaisą arba kaip tokio naudojimo pasekmė įvyksta rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo šalies kompetentingai institucijai. Šio prietaiso gamintojo kontaktai, kur reikia pranešti apie rimtą incidentą, yra tokie:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Įranga ir mokymai

Implantuojantiems, protezuojantiems ir susijusių programinę įrangą naudojančiams gydytojams (tiek pradedantiems, tiek patyrusiems) rekomenduojama prieš pradedant taikyti naują gydymo metodiką dalyvauti specialiuose mokymuose.

Dėl programinės įrangos žinių ir išmanymo stokos, diagnozės, planavimo arba gydymo galima nespėti laiku užbaigti arba šiuos darbus gali tekti atidėti.

„Nobel Biocare“ siūlo daug kursų, skirtų įvairaus lygio žinių ir patirties turintiems gydytojams.

Daugiau informacijos rasite apsilankę mokymo svetainėje adresu tw.dtxstudio.com.

Profesionalus naudojimas

DTX Studio Clinic skirta tik profesionaliam naudojimui.

Sistemos reikalavimai

Patariame prieš diegiant programinę įrangą patikrinti [Sistemos reikalavimai](#). Norėdami gauti informacijos apie minimalius ir (arba) rekomenduojamus reikalavimus, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Naujai programinės įrangos versijai gali prireikti ir naujesnės aparatinės įrangos arba operacinės sistemos versijos.

Programinės įrangos įdiegimas

Informaciją, kaip įdiegti programinę įrangą, rasite DTX Studio Clinic diegimo instrukcijoje. Šį dokumentą galima parsisiųsti iš naudotojų dokumentacijos bibliotekos (ifu.dtxstudio.com). Jei iškiltų problemų ar Jums prireiktų pagalbos, kreipkitės į įgaliotą techniką arba naudotojų techninės pagalbos tarnybą (support@dtxstudio.com).

Naudojimo nurodymai

Norėdami gauti išsamios informacijos apie programinės įrangos naudojimą, žr. toliau šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus.

Perspėjimai ir įspėjimai

Perspėjimai



Patariama, kad naudotojai, prieš taikydami naują gydymo metodą arba prieš naudodami naują prietaisą, būtų to išmokyti.

Jei pirmą kartą naudodami naują prietaisą arba taikydami naują gydymo metodą dirbsite kartu su kolega, turinčiu naujo prietaiso naudojimo arba naujo gydymo metodo taikymo patirties, tai gali padėti išvengti galimų komplikacijų. Naudotojas turi užtikrinti, kad skenavimo metu pacientas kuo mažiau judėtų. Šitaip sumažės netikslaus skenavimo rizika.

Dėl programinės įrangos žinių ir išmanymo stokos, diagnozės, planavimo arba gydymo galima nespėti laiku užbaigti arba šiuos darbus gali tekti atidėti.

Naudojant programinės įrangos diagnostikos ir planavimo įrankius ypač svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

- ar parengtos indikacijos (vizualizavimas, matavimai, kritinės struktūros, importuoti duomenys, implantų planavimas) teisingos;
- ar automatizuotų funkcijų, tokių kaip „MagicAssist“, 3D rentgeno nuotraukos segmentavimas ir intraoralinės skenuotos nuotraukos lygiavimas, sugeneruoti rezultatai teisingi;
- ar paciento identifikavimo numeris (atvėrus paciento įrašą PMS sistemose ir sudarant skenavimo prašymus) yra teisingas;
- ar duomenys atnaujinti ir nėra pasenę.

To nepadarius padidėja rizika, kad reikės peržiūrėti diagnozę, planavimą ar gydymą, o tai savo ruožtu gali lemti diagnozės, planavimo ar paties gydymo atidėjimą arba perplanavimą.

Dirbant su vaizdo fiksavimo įrenginiais rekomenduojama būti ypač atsargiems. Juos netinkamai naudojant galima diagnozės, planavimo ar paties gydymo nespėti laiku užbaigti arba šiuos darbus gali tekti atidėti, o pacientas gali be reikalo gauti papildomą apšvitą dozę.

Iš programinės įrangos išskleidžiant ataskaitą ar paciento duomenis svarbu žinoti, kad paciento duomenys, iš kurių nebuvo pašalinta asmens informacija, gali būti be paciento sutikimo naudojami netinkamais tikslais.

Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į peržiūros programose priskirtą dantų numeravimą ir padėties žymėjimus. Netinkamai priskyrus danties numerį arba netinkamai pažymėjus paciento padėtį, pacientui gali būti atliktos netinkamos gydymo procedūros.

Atnaujinus programinės įrangos versiją, rekomenduojama patikrinti svarbius atidarytų pacientų atvejų ir (arba) gydymo plano nustatymus ir įsitikinti, kad jie ir naujoje programinės įrangos versijoje yra teisingi. Dėl neteisingų nustatymų, diagnozės, planavimo ar pačio gydymo galima nespėti laiku užbaigti arba šiuos darbus gali tekti atidėti.

Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į sukurtą implantų planą ir į tai, kaip implantai išdėstyti vienas kito ir kitų svarbių anatominių struktūrų atžvilgiu. Be to, eksportuodami visada patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą implantų planą ir ar eksportuotame implantų plane ar chirurginiame gide yra visa implantavimo operacijai atlikti reikalinga informacija.

To nepadarius padidėja rizika, kad reikės peržiūrėti diagnozę, planavimą ar gydymą, o tai savo ruožtu gali lemti diagnozės, planavimo ar paties gydymo atidėjimą arba perplanavimą.

Įspėjimai

Programinėje įrangoje rodomi toliau pateikti įspėjimai.



Vardas DICOM faile (-uose) skiriasi nuo paciento vardo.

Norėdami sumažinti riziką, kad kuriant paciento modelį nebūtų naudojami neteisingi duomenys, įsitikinkite, ar teisingas paciento asmenvardis ir patikrinkite, ar sutampa paciento asmenvardis ir naudojamo DICOM rinkinio asmenvardis.

Asmenvardis .DEX faile (-uose) skiriasi nuo paciento asmenvardžio.

Kad sumažintumėte riziką, jog paciento diagnozei nustatyti bus naudojami neteisingi duomenys, patikrinkite paciento vardą ir patikrinkite, ar paciento vardas ir pavadinimas naudojamame DEX faile sutampa.

3D rentgeno nuotraukos prieš dabartinės diagnostikos negalima pridėti.

Dabartinė diagnostiką turi 3D rentgeno nuotrauką, susietą su chirurginės operacijos planu. Sukurkite naują diagnostiką, kad importuotumėte skenuotą 3D nuotrauką.

Negalima pridėti galutinio implantų plano prieš dabartinės diagnostikos.

Pasirinkite chirurginės operacijos planą pagal 3D rentgeno nuotrauką, įtrauktą į dabartinę diagnostiką.

Eksportuojant 8 bitų formato vaizdus gali sumažėti tikslumas.

Vaizdus rekomenduojama eksportuoti kitu formatu, kad nepablogėtų jų kokybė.

Nepaveikite paciento.

Prietaiso įjungti nepavyko. Esant šiai būsenai prietaisas negali priimti rentgeno spindulių. Bandykite dar kartą prietaisą iš naujo prijungdami arba iš naujo paleisdami. Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į jūsų prietaiso gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą.

Jutiklis ruošiamas kitai ekspozicijai. Palaukite.

Prietaisas šiuo metu iš naujo įjungiamas. Esant šiai būsenai prietaisas negali priimti rentgeno spindulių.

Patikrinkite skenavimo prašymo parametrus prietaise.

Prieš paveikdami pacientą būtinai patikrinkite prietaise nustatytus parametrus.

Gydymo plano nerekomenduojama modifikuoti, jei nėra naudojamų faktinės implantų formos.

Faktinių formų galima atsisiųsti iš DTX Studio Go.

Vaizdas buvo apverstas.

Šis įspėjimas rodomas, kai naudotojai vaizdus apverčia (horizontaliai arba vertikalčiai) rankiniu būdu.

Vaizdas buvo apkarpytas.

Šis įspėjimas rodomas, kai naudotojai vaizdus rankiniu būdu apkarpo.

Automatinis intraoralinių vaizdų rūšiavimas (MagicAssist) skirtas naudoti tik suaugusių pacientų dantims, jei nėra susidvejinimo, susigrūdimo arba makrodontijos.

Šitaip siekiama sumažinti, MagicAssist netinkamų pacientų vaizdų naudojimo riziką.

Atkreipkite dėmesį, kad tarp DTX Studio Clinic ir „X-Guide“ programinės įrangos gali atsirasti duomenų vizualizavimo (pvz., peržiūros programos orientacijos, objektų spalvos) bei įspėjimų skirtumų.

Nepalaikomi implantai.

DTX Studio Clinic palaiko tik kai kuriuos į X-Guide™ eksportuotinus implantus. Nepalaikomi implantai į X-Guide™ failą nebus įtraukti.

Implantas per arti anotuotos anatominės struktūros.

Implantas suplanuotas per arti anotuotos anatominės struktūros (pvz., anotuoto nervo). Įsitikinkite, kad implantas anatominės struktūros neliečia.



Implantai susikerta.

Kai kurie implantai susikerta. Dėl to per operaciją gali kilti problemų. Rekomenduojama peržiūrėti gydymo planą.

Šiuo metu sinchronizuojami pacientų įrašai. Jei dabar uždarysite programą, DTX Studio Core nebus pasiekiami naujausi keitimai.

Paciento įrašas atnaujintas, tačiau sinchronizavimas su DTX Studio Core dar nebaigtas. Patys naujausi paciento pakeitimai nebus pasiekiami kitiems praktikos naudotojams, jeigu iš pradžių nebus baigtas sinchronizavimas.

Sureguliuokite implanto padėtį

Šis įspėjimas rodomas eksportuojant implantų planą arba kuriant chirurginį gidą ar „NobelGuide“, jei implantas lieka pradinėje padėtyje, kaip nustatyta pagal algoritmą „apskaičiuoti optimizuotą implanto padėtį“.

Nepaveikite paciento

Prietaiso nepavyko įjungti, nes šiuo metu neturite aktyvios prenumeratos. Esant šiai būsenai prietaisas negali priimti rentgeno spindulių. Susisiekite su savo prietaiso klientų aptarnavimo tarnyba.

„MagicAssist“ naudoja dirbtinį intelektą ir algoritminį apdorojimą. Visada patikrinkite visus rezultatus atlikdami savo klinikinį vertinimą

„MagicAssist“ naudoja dirbtinį intelektą (DI) ir algoritminį apdorojimą, kad pagrįstų, o ne pakeistų jūsų klinikinį vertinimą. Visada peržiūrėkite visus „MagicAssist“ sugeneruotus rezultatus, remdamiesi savo klinicine patirtimi ir paciento duomenimis.

Be to, DTX Studio Clinic rodomi įvairūs techniniai įspėjimai (pvz., nenuoseklūs KT duomenys).

Labai svarbu, kad naudotojai laikytųsi programinės įrangos instrukcijų ir techninių pranešimų – šitaip jie sumažins netikslaus skenavimo riziką.

Automatinis intraoralinių vaizdų rūšiavimas (MagicAssist) skirtas naudoti tik suaugusių pacientų dantims, jei nėra susidvejinimo, susigrūdimo arba makrodontijos.

Gydytojas neturėtų pasikliauti vien fokusavimo srities aptikimo rezultatais, bet turėtų sistemingai peržvelgti visą paciento duomenų rinkinį, jį interpretuoti ir pritaikyti kitus diferencinės diagnostikos metodus.

Fokusavimo sritis aptinkama tik tuose vaizduose, kuriems galima pritaikyti aptikimo funkciją.

Automatinis fokusavimo sričių nustatymas skirtas naudoti tik suaugusių pacientų dantims, jei nėra susidvejinimo, susigrūdimo arba makrodontijos.

Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema¹	„Windows® 11“ 64 bitų versija („Pro“ ir „Enterprise“ leidimas) staliniame ir nešiojamajame kompiuteryje. „macOS Tahoe“ (26) ir „Sequoia“ (15) („Intel®“ pagrindu veikiančiuose „Mac“ kompiuteriuose ir „Apple Silicon Mac“ kompiuteriuose su M1 ar aukštesniu lustu) „iMac“, „Mac Mini“, „Mac Pro“, „MacBook Pro“, „MacBook Air“ įrenginiuose. ²	
	Pagrindinė sąranka (tik 2D vaizdavimas)	Rekomenduojama sąranka (didesnio našumo 2D ir 3D vaizdavimas)
Centrinis procesorius	Dviejų arba keturių branduolių	2,8 GHz keturių branduolių („Intel Core i5“ arba „i7“)
Operatyvioji atmintis	Mažiausiai 4 GB, jei diegiama specialiai tam skirta programa. Jei tame pačiame kompiuteryje veikia kitos programos, rekomenduojama naudoti papildomą operatyviąją atmintį.	Mažiausiai 8 GB, jei diegiama specialiai tam skirta programa. Jei tame pačiame kompiuteryje veikia kitos programos, rekomenduojama naudoti papildomą operatyviąją atmintį.
Grafikos plokštė	Pradinio lygio skirtoji prijungiamą plokštę arba „Intel“ integruotasis grafikos lustas. Palaikomas 6-osios kartos „Intel“ centrinis procesorius su įtaisytoju 9-osios kartos ar naujesniu „Intel“ grafikos lustu. Turi palaikyti „OpenGL® 3.3“ ³ .	Speciali plėtotės grafikos plokštė su optimaliu 3D palaikymu („OpenGL 3.3“) ir 2 GB arba daugiau vaizdo atminties (VRAM). Naudojant 4K monitorių rekomenduojama turėti ne mažiau kaip 4 GB vaizdo atminties.
	Naudojant dirbtinio intelekto diagnostikos modulį: Norint pagreitinoti algoritmus aparatine įranga sistemoje „Windows“, reikalinga „DirectX 12“ palaikanti vaizdo plokštė ir „Windows 11“ 25H2 arba naujesnė versija. Norint naudoti aparatinę algoritmų spartinimo funkciją „Mac“ sistemoje, reikalinga „macOS Sequoia“ (15) arba naujesnė versija. Geriausiai našumui rekomenduojamas „Apple Silicon Mac“ su M1 arba naujesne mikroschema. Pastaba „MagicAssist“ aparatinės įrangos spartinimas nustatomas DTX Studio Home našumo nustatymuose.	
Disko talpa	10 GB laisvos vietos diske programinei įrangai įdiegti ir papildomos vietos diske naudotojo sukurtiems duomenims. Tipiškas DTX Studio Clinic 2D paciento duomenų rinkinys užima apie 10 MB.	10 GB laisvos vietos diske programinei įrangai įdiegti ir papildomos vietos diske naudotojo sukurtiems duomenims. Tipiškas DTX Studio Clinic 3D paciento duomenų rinkinys užima apie 250 MB.
Tinklas	Plačiajuostis interneto ryšys su 3 Mbps siuntimo ir 30 Mbps atsisiuntimo sparta. Rekomenduojama užtikrinti nuolatinį interneto ryšį, kad DTX Studio Clinic galėtų prisijungti prie išorinių tarnybų ir (arba) programų. Jei tai neįmanoma, bent kartą per 14 dienų reikia užmegzti ryšį, nes priešingu atveju jūsų prieiga prie DTX Studio Clinic gali būti laikinai sustabdyta. Atkūrus interneto ryšį bus atkurta prieiga prie DTX Studio Clinic.	
Standusis diskas	DTX Studio Clinic „Mac“ įrenginiuose įdiekite tik į APFS, HFS+ arba HFSJ diską, kurio pavadinime neskiriamos didžiosios ir mažosios raidės.	
Monitorius	„Full HD“ (1920 × 1080) arba didesnės raiškos. Pakeitus ekrano mastelį dalies informacijos gali nesimatyti, todėl lygiavertė raiška pakeitus mastelį turi būti bent 1920 × 1080.	
LAN	Jei DTX Studio Clinic įdiegiama kartu su DTX Studio Core, rekomenduojamas vietinis 1 Gb/s spartos tinklas.	

1 Primygtinai rekomenduojama įdiegti naujausią turimą operacinės sistemos (OS) versijos atnaujinimą, nes juo bus ištaisytos žinomos klaidos ir pažeidžiamumai bei užtikrintas didesnis naudotojų ir kompiuterinių sistemų saugumas.

2 Kai kurių „MacBook Air®“ ir „Mac® Mini“ konfigūracijų vaizdo plokštėms taikomi tūrio vaizdavimo apribojimai. Apsvarstykite galimybę rinktis mažos raiškos tūrio vaizdavimą.

3 Visada naudokite naujausią grafikos plokštės tvarkyklę, kurią galite rasti oficialioje pardavėjo svetainėje, kad užtikrintumėte stabilumą ir optimalų našumą. Norėdami patikrinti grafikos plokštės „OpenGL®“ versiją, apsilankykite svetainėje <http://realtech-vr.com/admin/glview>.

Pradžia

Programinės įrangos paleidimas

1. Atidarykite DTX Studio Clinic:
 - operacinės sistemos „Windows“ darbalaukyje du kartus spustelėkite nuorodos piktogramą ;
 - operacinėje sistemoje „macOS“ spustelėkite nuorodos piktogramą  programų iešiklio aplanke arba „Dock“.
2. Pasirinkite naudotoją.
3. Įveskite slaptažodį.
4. Spustelėkite [Prisiregistruoti](#).

Pastaba

DTX Studio Clinic turi būti visada prijungta prie interneto. Jei tai neįmanoma, bent kartą per 14 dienų reikia užmegzti ryšį, nes priešingu atveju jūsų prieiga prie DTX Studio Clinic gali būti laikinai sustabdyta.

Neprisijungus veikiančioms licencijoms šis laikino sustabdymo mechanizmas netaikomas. Funkcijos ar paslaugos, kurioms reikalingas interneto ryšys, neįeina į neprisijungus veikiančią licenciją ir yra nepasiekiamos dirbant neprisijungus. Norėdami pakeisti neprisijungus veikiančios licencijos slaptažodį, žr. [diegimo vadovą](#).

Programinės įrangos uždarymas

Būtinai uždarykite visus aktyvius Clinic ir skenavimo modulio* egzempliorius.

Spustelėkite [Meniu](#) ir pasirinkite [Uždaryti programą](#).


Pastaba

Jei uždarote uždarymo mygtuku , programinė įranga lieka veikti fone, kad būtų galima sinchronizuoti duomenis ir greičiau iš naujo atidaryti DTX Studio™ Home / DTX Studio Clinic.

* Modulis gali būti licencijuotas.

Naršymas DTX Studio Home

DTX Studio Home yra darbo sritis, kurioje pasirenkate ir tvarkote pacientų įrašus, skenavimo prašymus ir bendruosius nustatymus.

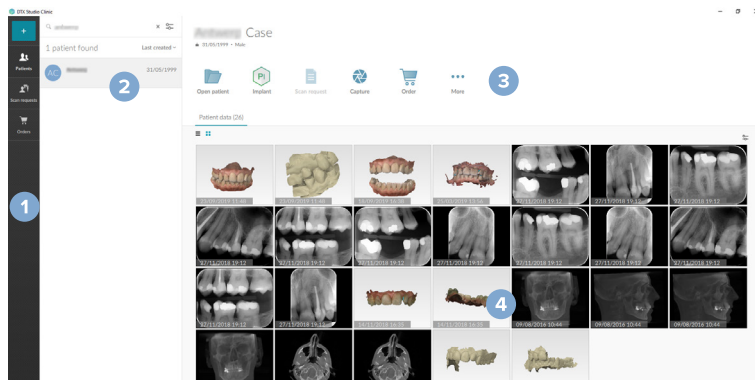

- 1 Šoninė juosta
- 2 Pacientų sąrašas
- 3 Veiksmų sritis
- 4 Išsamios informacijos sritis

Pranešimų srities apžvalga

DTX Studio piktograma  pranešimų srityje suteikia prieigą prie DTX Studio Home nustatymų  ir šių skirtukų:

- **Pranešimai:** rodo, kurie paciento įrašai šiuo metu įkeliami arba sinchronizuojami su DTX Studio Core, taip pat kitus sistemos pranešimus.
- **DTX:** suteikia greitą prieigą prie:
 - DTX Studio Core ()
 - DTX Studio Go ()
 - ekspozicijos ataskaitų*,
 - QuickPrescribe* arba
 - susietos trečiosios šalies programos.
- **Prietaisai:** pateikia tiesioginių aplankų, skirtų trečiųjų šalių prietaisų vaizdams importuoti, sąrašą, rodo fiksavimo prietaisus ir jų būseną:
 -  prijungtas per USB arba TWAIN
 -  prijungtas
 -  užimtas
 -  neprijungtas

Spustelėkite **Daugiau parinkčių...** norėdami pasiekti prietaiso nustatymus, aplanko importavimo nustatymus arba išjungti nereikalingus prietaisus.

*Būtina DTX Studio Core.

Nustatymų koregavimas

Numatytųjų koregavimas DTX Studio Home Nustatymai

1. DTX Studio Home spustelėkite **Meniu** .
2. Spustelėkite **Nustatymai** .

Nustatymų eksportavimas arba importavimas

Sukurkite arba importuokite nustatymų failą su nustatytomis parinktimis. Tai gali būti naudinga norint nustatymus eksportuoti programinę įrangą diegiant iš naujo, nustatymus bendrinant su kitais DTX Studio Clinic naudotojais arba kuriant atsarginę kopiją.

Pastaba

Norėdami gauti išsamią apžvalgą, pagalbos failuose susiraskite temą „Bendrinti nustatymus“: spustelėkite meniu piktogramą , tada pasirinkite **Pagalba**.

Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **Bendrinti nustatymus**.

- Norėdami **eksportuoti** nustatymų failą, pasirinkite, ar bendrinti **visus nustatymus**, ar **nustatymų pogrupį**. Pasirinkę pogrupio parinktį, galite atskirai pasirinkti, kuriuos nustatymus įtraukti. Šis nustatymų failas gali būti įkeltas į DTX Studio Core, kad būtų platinamas kitiems DTX Studio Clinic naudotojams praktikoje.
- Norėdami rankiniu būdu **importuoti** nustatymų failą, pasirinkite, ar nustatymų failą norite importuoti iš kompiuterio, ar iš DTX Studio Core.

Kalbos ir datos / laiko formato keitimas

Norėdami pakoreguoti pageidaujamą kalbą ar datos ir laiko formatą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **Bendra**.
2. Sąrašuose **Trumpasis datos formatas**, **Ilgasis datos formatas** ir **Laiko formatas** pasirinkite datos ir laiko formatą.
3. Sąrašė **Programos kalba** pasirinkite pageidaujamą kalbą.
4. Spustelėkite **Gerei**.
5. DTX Studio Clinic paleiskite iš naujo, kad pakeitimai įsigaliotų.

DICOM atitikties nustatymų koregavimas

Įveskite įstaigos informaciją, kad užtikrintumėte atitiktį standartui DIN 6862-2. Kai DICOM failai eksportuojami, ši įvesta informacija įrašoma vietoje tuščių žymų.

1. Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **Bendra**.
2. Pasirinkite **Naudoti standartą DIN 6862-2**.
3. Pateikite prašomą įstaigos informaciją.
4. Spustelėkite **Gerei**.

Pastaba

Importuojant ir eksportuojant suderinamus DICOM failus, DIN 6862-2 žymos visada išsaugomos.

Numatyųjų vaizdo filtrų nustatymas

Norėdami DTX Studio Home peržiūros programai ir DTX Studio Clinic nustatyti numatytuosius vaizdo filtrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. DTX Studio Home dalyje **Nustatymai** arba DTX Studio Clinic dalyje **Ypatybės** spustelėkite **Vaizdo nustatymai**.
2. Sąrašė **Numatytieji vaizdo nustatymai** pasirinkite vaizdo tipą, kurio numatytuosius filtro nustatymus norite nustatyti.
3. Pasirinkite filtrus, kurie pagal numatytuosius nustatymus bus naudojami pasirinktam vaizdo tipui, tada naudodamiesi rodomu slankikliu nustatykite filtro procentą.
4. Spustelėkite **Gerei**.

Jei norite grąžinti pradines numatytąsias vertes, spustelėkite **Iš naujo**.

Burnos ertmės vaizdų automatinio sukimo išjungimas

Atlikus nedelsiamą skenavimą intraoraliniai vaizdai automatiškai pasukami į tinkamą padėtį. Norėdami tai išjungti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. DTX Studio Home dalyje **Nustatymai** arba DTX Studio Clinic dalyje **Ypatybės** spustelėkite **Vaizdo nustatymai**.
2. Panaikinkite parinkties **Intraoralinius rentgeno vaizdus automatiškai pasukti fiksuojant su „DTX Studio capture“** žymėjimą.

Automatinio lygio ir lango verčių nustatymo išjungimas

Importavus ar užfiksavus 2D vaizdą, lygio ir lango vertės nustatomos automatiškai. Norėdami tai išjungti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. DTX Studio Home dalyje [Nustatymai](#) arba DTX Studio Clinic dalyje [Ypatybės](#) spustelėkite [Vaizdo nustatymai](#).
2. Viršutiniame dešiniajame išskleidžiamajame meniu pasirinkite [OPG](#), [Burnos ertmės](#) arba [Cefalogramos](#).
3. Išjunkite [automatinio lygio lango](#) jungiklį .
4. Įveskite norimas lygio ir lango vertes.
5. Spustelėkite [Geri](#).

Prisijungimas prie DTX Studio Core

DTX Studio Core yra programinės įrangos sprendimas, skirtas pacientų skirtingų tipų vaizdiniais duomenimis (dvimatėms rentgenogramoms, trimatėms (KP)KT rentgenogramoms, skenuotoms dantų optinėms bei įprastoms nuotraukoms) struktūrizuoti ir centralizuotai saugoti bei atkurti, kad išsaugotus duomenis būtų galima nedelsiant pasiekti bet kurioje odontologijos klinikos vietoje.

- Jei sujungta su DTX Studio Core, DTX Studio Clinic galima naudoti tinklo aplinkoje vaizdams įgyti iš kitų palaikomų (prie eterneito prijungtų ir palaikomų „3Shape TRIOS®“) prietaisų.
- Jei norėsite dirbti su tinklo prietaisais, tvarkyti skenavimo prašymus ir pasiekti radiografinės ataskaitas, turėsite prisijungti prie DTX Studio Core.

Norėdami prisijungti prie DTX Studio Core, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Dalyje DTX Studio Home [Nustatymai](#) spustelėkite [DTX Studio Core](#).
2. Įveskite [URL](#) (žiniatinklio adresą), skirtą DTX Studio Core, jei jis dar nepateiktas.
3. Spustelėkite [Prisijungti](#).
4. Išsiunčiama prisijungimo užklausa, kurią vietinis administratorius gali priimti per DTX Studio Core vartotojo sąsają.

Įtraukti nuorodą į veiksmų sritį

Jei norite į veiksmų skydelį įtraukti trečiosios šalies programos arba tinklalapio nuorodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Dalyje DTX Studio Home [Nustatymai](#) spustelėkite [Greitas paleidimas](#).
2. Spustelėkite [Įtraukti](#) ir pasirinkite [Programa](#) arba [Tinklalapis](#).
3. Programai pasirinkite vykdomąjį failą ir spustelėkite [Atidaryti](#). Tinklalapiui įveskite [URL adresą](#).
4. Jei reikia, pakeiskite parinktį [Programos pavadinimas](#) arba [Tinklalapio pavadinimas](#).
5. Programos atveju taip pat galite pasirinkti [Paleisti su paciento duomenimis](#), kad trečiosios šalies programa būtų paleista su paciento duomenimis.
 - Nurodykite, kuriuos duomenis norite eksportuoti – laukelyje [Eksportuoti parametrus](#) įrašykite eksporto parametrus.

Pastaba

Norėdami gauti išsamią visų paciento duomenų parametrų apžvalgą, žinyno failuose raskite temą „Greitas paleidimas“: spustelėkite meniu piktogramą  ir pasirinkite [Pagalba](#).

– Spustelėkite [Ieškoti](#) norėdami pasirinkti eksportuojamų duomenų vietą.

6. Spustelėkite [Geri](#).

Odontologijos klinikos valdymo sistemos (angl. „Practice Management System“ – PMS) integracijos įjungimas

Jei DTX Studio Clinic integruosite į PMS (pvz., per VDDS arba OPP / „OPP Web“), galėsite pačioje PMS sukurti paciento įrašą ir užfiksuoti vaizdą.

PMS vaizdų peržiūra programoje DTX Studio Home arba tiesiogiai DTX Studio Clinic.

1. Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **PMS integracija**.
2. Pasirinkite **Įjungti PMS integraciją**.

Pastaba

Išsamios informacijos ieškokite pagalbos failų temoje „PMS integracija“: spustelėkite meniu piktogramą  ir pasirinkite **Pagalba**.

Implantų gaminių diegimas

Norėdami įdiegti arba atnaujinti implantų planavimo reikmėms skirtas implantų gaminių formas DTX Studio Clinic, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **Implantų gaminiai**.
2. Raskite norimą naudoti prekės ženklą ir spustelėkite **Įdiegti** arba **Atnaujinti**.

TWAIN palaikomo prietaiso įtraukimas

1. Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **Prietaisai**.
2. Spustelėkite **Įtraukti**.
3. Pasirinkite TWAIN prietaisą.
4. Sukonfigūruokite prietaiso nustatymus.
5. Spustelėkite **Įtraukti**.

Tiesioginio aplanko trečiųjų šalių prietaisų vaizdams aptikti konfigūravimas

Norėdami įtraukti vaizdų iš trečiųjų šalių kamerų arba (KP)KT prietaisų, nustatykite tiesioginį aplanką, kuriame nauji vaizdai bus aptikti. Jų įtraukite atlikdami veiksmą **Fiksuoti** paciento įrašė arba DTX Studio Clinic.

1. Paruoškite kameros prietaiso nustatymus:
 - jei įmanoma, trečiosios šalies kameros prietaisą, (KP)KT prietaisą arba belaidę SD kortelę nustatykite taip, vaizdai būtų išsaugomi konkrečiame aplanke;
 - jei vaizdai išsaugomi standartinėje SD kortelėje, ją įstatykite ir įsiminkite jai priskirtą disko vardą.
2. Dalyje DTX Studio Home **Nustatymai** spustelėkite **Prietaisai**.
3. Spustelėkite **Įtraukti**.
4. Pasirinkite trečiosios šalies prietaisą ir spustelėkite **Atidaryti**.
5. Spustelėkite **Ieškoti**, kad pasirinktumėte kameros prietaiso aplanką, tada spustelėkite **Parinkti aplanką**.
6. Įveskite konkretų pavadinimą.
7. Prireikus pakeiskite modalumą ir aplanko prioritetus.
8. Spustelėkite **Įtraukti**.

Numatytųjų eksportavimo aplankų nustatymas

Norėdami ataskaitoms, ekrano kopijoms ir „X-Guide“ failams nurodyti numatytąjį eksportavimo aplanką, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Dalyje DTX Studio Home [Nustatymai](#) spustelėkite [Eksportuoti](#).
2. Prie kiekvieno eksportavimo tipo spustelėkite [leškoti](#) ir pasirinkite numatytąjį aplanką.

Automatinio išsaugojimo uždariant „DTX Studio Clinic“ įjungimas

1. DTX Studio Clinic ypatybių skiltyje pasirinkite [Bendra](#).
2. Įjunkite parinktį [Automatiškai išsaugoti uždariant pacientą](#).

Šis nustatymas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus ir panaikina raginimą išsaugoti paciento įrašą prieš uždariant.

Kaip rasti mokymosi išteklių ir kreiptis į aptarnavimo tarnybą

Kaip peržiūrėti visus mokymosi išteklius ir sparčiuosius klaviatūros klavišus

Norėdami atidaryti pagalbos dokumentų, naudojimo instrukcijos ir sparčiųjų klaviatūros klavišų skiltis, spustelėkite meniu piktogramą  ir pasirinkite [Pagalba](#), [Naudojimo instrukcija](#) arba [Spartieji klaviatūros klavišai](#). Arba spustelėkite klaustuko piktogramą  modulyje Clinic.

Mokomųjų vaizdo įrašų svetainę ir produkto apžvalgą galima atidaryti tik modulyje Clinic. Spustelėkite meniu piktogramą  arba klaustuko piktogramą  ir pasirinkite [Mokomieji vaizdo įrašai](#) arba [Produkto apžvalga](#).

Kreipimasis į klientų aptarnavimo skyrių

Norėdami susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, spustelėkite meniu piktogramą  ir pasirinkite [Kreipkitės į techninės pagalbos skyrių](#). Atidaroma aptarnavimo tarnybos svetainė, kurioje pateiktos visos susisiektimo parinktys.

Pagrindinių funkcijų apžvalga

Toliau aprašyta, kaip pradėti naudoti pagrindines DTX Studio Home funkcijas

1	Paciento įrašo kūrimas ar susiejimas		Sukurkite paciento įrašą programinėje įrangoje (žr. 21 psl.).
			Integruokite savo odontologijos klinikos valdymo sistemą (angl. „Practice Management System“ – PMS) (žr. 18 psl.) ir susiekite esamą PMS paciento įrašą.
2	Duomenų fiksavimas arba importavimas		Užfiksуйте skenuotas nuotraukas, inicijuokite kelių skenuotų nuotraukų darbo eigą (žr. 30 psl.) arba importuokite trečiųjų šalių prietaisų vaizdus iš tiesioginių aplankų (žr. 23 psl.).
			Užsakykite skenuotą nuotrauką arba kelių skenuotų nuotraukų darbo eigą (žr. 30 psl.).
			Nutempkite vaizdus į paciento įrašą (žr. 23 psl.).
			Importuokite duomenis iš DTX Studio Clinic (žr. 23 psl.).
			Importuokite iš programinės įrangos „3Shape Dental Desktop“ (25 psl.).

Sukūrę paciento įrašą ir pridėję duomenis pereikite prie toliau nurodytų funkcijų:

Diagnozavimas ir gydymo planavimas		Atidarykite Klinikinį modulį (žr. 35 psl.), kad galėtumėte atlikti šiuos veiksmus:	
		– Diagnozuoti vaizdus (žr. 45 psl.). – Planuoti implantus ir gydymus (žr. 55 psl.). – Sukurti chirurginį gidą (žr. 56 psl.). – Dalytis 3D pateiktimi su savo pacientais (žr. 27 psl.).	
Dalijimasis ir ryšio palaikymas DTX Studio Clinic		Pasirinktinai galite atidaryti DTX Studio Implant (žr. 59 psl.).	
		Eksportuokite paciento įrašą (žr. 22 psl.).	
		Eksportuokite implanto planą į X-Guide™ (žr. 28 psl.).	
Užsakymų pateikimas DTX Studio Home		Dalykitės paciento įrašais ir duomenimis naudodamiesi DTX Studio Go (žr. 26 psl.) arba bendradarbiaukite su partneriais. Taip pat galite užsisakyti restauraciją, chirurginį gidą arba chirurginės operacijos planą (žr. 59 psl.).	

Pacientų įrašai

Naujo paciento įrašo kūrimas

1. DTX Studio Home viršutiniame kairiajame kampe spustelėkite mėlyną pliuso piktogramą .
2. Pasirinkite **Sukurti pacientą**.
3. Įrašykite svarbiausią informaciją apie pacientą, tokią kaip paciento asmenvardis, gimimo data ir lytis.
4. Spustelėkite **Kūrimas**.
5. Paciento įrašas įtrauktas į sąrašą **Pacientai** . Jei DTX Studio Home yra prijungta prie DTX Studio Core, paciento įrašas taip pat pridedamas prie DTX Studio Core.

Pacientų įrašų tvarkymas

Jei dar nėra atidarytas pacientų sąrašas, šoninėje juostoje spustelėkite **Pacientai** , kad jį atidarytumėte.

Pastaba

Jei darbo vieta prie DTX Studio Core neprijungta, rodomi tik vietoje saugomi pacientų įrašai.

- Pacientų įrašai, šiuo metu atidaryti DTX Studio Clinic vietinėje arba prie tinklo prijungtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje, pažymėti piktograma .
- Norėdami redaguoti pagrindinę paciento informaciją, pacientų sąrašė pasirinkite paciento įrašą, spustelėkite **Daugiau**  ir pasirinkite **Redaguoti** .
- Norėdami pasirinktą paciento įrašą pašalinti, spustelėkite **Daugiau**  ir pasirinkite **Ištrinti pacientą** .
- Norėdami įsitikinti, kad DTX Studio Core saugomas paciento įrašas yra taip pat prieinamas neprisijungus, spustelėkite **Daugiau**  ir įjunkite **Prieinama atsijungus**.
- Norėdami sujungti du pacientų įrašus, spustelėkite „**Daugiau**“  ir pasirinkite „**Sujungti pacientus**“ .

Pranešimų srityje ([žr. 15 psl.](#)) rodoma, kurie paciento įrašai šiuo metu yra įkeliami arba sinchronizuojami.

Privatumo parinkčių tvarkymas

Norėdami, kad pacientų privatumo užtikrinimo tikslais pacientų sąrašė būtų rodomi tik pacientų inicialai arba pacientų sąrašas išvis nebūtų rodomas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Pacientų sąrašė spustelėkite filtro piktogramą .
2. Pasirinkite **Privatumo režimas**, jei norite, kad būtų rodomi tik inicialai, arba **Slėpti pacientų sąrašą**, kad jis būtų visiškai paslėptas.

Pastabos

- Šoninėje juostoje spustelėkite dvigubos rodyklės piktogramą , kad pacientų sąrašas vėl būtų rodomas.
- Privatumo režimas lieka įjungtas net ir DTX Studio Clinic paleidus iš naujo. Norėdami privatumo režimą išjungti, dar kartą spustelėkite filtro piktogramą  ir panaikinkite parinktį **Privatumo režimas** žymėjimą.

Pacientų įrašų paieška ir rūšiavimas

Norėdami surasti paciento įrašą, atlikite sąrašo duomenų rūšiavimą arba panaudokite paieškos funkciją.

Pacientų sąrašo rūšiavimas

1. Greta pacientų sąrašo pavadinimo spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę.
2. Pasirinkite [Paskutinį kartą sukurta](#), [Paskutinį kartą modifikuota](#) arba [Paskutinį kartą užfiksuota](#).
3. Vėl spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą, kad jį uždarytumėte.

Paciento įrašo paieška

1. Pacientų sąrašė spustelėkite filtro piktogramą .
2. Pasirinkite tai, ko norite ieškoti: [Paciento vardas, pavardė](#), [Gimimo data](#), [Paciento identifikavimo numeris](#), [PMS identifikavimo numeris](#) arba [Užsakymo ar paslaugos ID](#).
3. Lauke [Rasti pacientą](#) įveskite pasirinktą paieškos parinktį (arba jos dalį) .
4. Renkant tekstą paieškos langelyje, automatiškai atnaujinamas pacientų sąrašas.

Norėdami pašalinti paieškos kriterijus, paieškos laukelyje spustelėkite **×**.

Paciento įrašo eksportavimas

Paciento įrašą eksportuokite tam, kad su kitu DTX Studio Clinic naudotoju rankiniu būdu galėtumėte dalytis diagnozėmis ir vaizdo duomenimis. Be to, eksportuotą paciento įrašą galima peržiūrėti nemokamoje DTX Studio Clinic versijoje, kuri prieinama DTX Studio Go. Daugiau informacijos [žr. 26 psl.](#)

Pastaba

Iš programinės įrangos išskleidžiant ataskaitą ar paciento duomenis svarbu žinoti, kad paciento duomenys, iš kurių nebuvo pašalinta asmens informacija, gali būti be paciento sutikimo naudojami netinkamais tikslais.

Duomenų tvarkymas

Duomenų importavimas

Vaizdų importavimas iš trečiųjų šalių prietaisų

Norėdami pridėti vaizdų iš trečiųjų šalių kamerų arba (KP)KT prietaisų, būtinai sukonfigūruokite tiesioginį aplanką, kuriame nauji vaizdai bus aptikti (žr. [18 psl.](#)).

1. Paciento įrašą pasirinkite pacientų sąrašė arba atidarykite paciento įrašą DTX Studio Clinic.
2. Spustelėkite [Fiksuoti](#) .
3. Užveskite pelės žymeklį ant tiesioginio aplanko pavadinimo ir spustelėkite [Pasirinkti](#).
 - 2D vaizdų atveju pasirinkite vaizdus, kuriuos norite importuoti. Spustelėkite [Baigti](#).
 - 3D (KP)KT prietaisų atveju pasirinkite 3D duomenis, kuriuos norite importuoti. Spustelėkite [Importuoti](#).

Vaizdų importavimas velkant ir nuleidžiant

1. Suderinamo tipo vaizdą arba failą nutempkite iš failų naršyklės į DTX Studio Home paciento įrašą arba Clinic modelį.
2. Lange [Pasirinkti duomenis](#) panaikinkite vaizdų, kurių nenorite pridėti, žymėjimą. Bus įtraukti elementai su spalvotu apvadu.
3. Jei reikia, pakeiskite būdą ir gavimo datą, užvesdami pelės žymeklį virš vaizdo elemento, spustelėdami **Daugiau parinkčių...** ir pasirinkdami vaizdo būdą arba redaguodami gavimo datą.
4. Spustelėkite [Importuoti](#).
5. Vaizdas arba failas įtraukiamas į paciento įrašą.

Vaizdų importavimas į Clinic modulį

1. Clinic modulyje spustelėkite meniu piktogramą () , kad atidarytumėte paciento meniu.
2. Spustelėkite [Importuoti](#)  ir pasirinkite vieną iš toliau nurodytų parinkčių:

3D rentgeno nuotrauka

1. Spustelėkite [Importuoti DICOM failą](#).
2. Raskite DICOM vaizdo failo vietą, tada pasirinkite jo aplanką.
3. Spustelėkite [Importuoti](#).
4. Įkeliami DICOM failai. Naudodami dešinėje esantį slankiklį slinkite pjūvius, kad peržiūrėtumėte DICOM vaizdus.
5. Spustelėkite [Baigta](#).
6. Jei MagicAssist™ įjungtas (pagal numatytuosius nustatymus jis būna įjungtas), pradedamas procesas, kad būtų automatiškai nustatyti (KP)KT duomenys.
 - Spustelėkite [Praleisti „MagicAssist“](#), kad rankiniu būdu nustatytumėte 3D rentgeno nuotraukas.
 - 3D rentgeno nuotraukų padėtį galima optimizuoti naudojant paciento padėties vedlį.
 - Atlikdami veiksmą „OPG kreivė“ (žr. [49 psl.](#)) galite pakoreguoti 3D panoraminę nuotrauką.

IO skenuota nuotrauka	1. Pasirinkite intraoralinio skenavimo modelį (-ius) ir spustelėkite Importuoti. 2. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite importuoti. Bus įtraukti elementai su žaliu apvadu. Jei reikia, pakoreguokite modelio tipą arba įsigijimo datą. 3. Spustelėkite Importuoti. 4. Bus paleistas „MagicAssist“, kad būtų aptikta skenuotos nuotraukos orientacija. Norėdami pakoreguoti orientaciją, įrankių juostoje 3D įrankiai spustelėkite Nustatyti IO skenuotą nuotrauką > Koreguoti orientaciją. Jei prie diagnozės buvo pridėta 3D rentgeno nuotrauka, patarimas paragins jus sujungti intraoralinę skenuotą nuotrauką su 3D rentgeno nuotrauka. Arba įrankių juostoje 3D įrankiai spustelėkite Sulygiuoti tūrius > Suderinti IO skenuotą nuotrauką su 3D rentgeno nuotrauka.
Laboratorijos dizainas	1. Pasirinkite diagnostinę (-es) skenuotą (-as) nuotrauką (-as) ir spustelėkite Importuoti. 2. Pasirinkite diagnostinę nuotrauką, kurią norite importuoti. Laboratorijos dizainai yra pripažinti diagnostiniai modeliai. Jei reikia, redaguokite gavimo datą. 3. Spustelėkite Importuoti. Norėdami pakoreguoti laboratorijos dizaino padėtį, naudokite išmanųjį skydelį Koreguoti.
Veido skenograma	1. Pasirinkite skenuotą veido nuotrauką, kurią norite importuoti, ir spustelėkite Importuoti. 2. Prireikus pakoreguokite parinktis Šviesumas ir Kontrastas. 3. Spustelėkite Baigta. Norėdami sulyginti veido skenogramą su 3D rentgeno nuotrauka, įrankių juostoje 3D įrankiai spustelėkite Sulygiuoti tūrius > Sulygiuoti veido skenogramą su 3D rentgeno nuotrauka. Norėdami pakoreguoti veido skenogramos padėtį, naudokite išmanųjį skydelį Koreguoti.
2D vaizdai	1. Pasirinkite vaizdą (-us) ir spustelėkite Importuoti. 2. Pasirinkite vaizdus, kuriuos norite pridėti. Bus įtraukti elementai su žaliu apvadu. 3. Spustelėkite Importuoti. – Importavus ar užfiksavus 2D vaizdą, lygio ir lango vertės nustatomos automatiškai. Norėdami tai išjungti, žr. „Automatinio lygio ir lango verčių nustatymo išjungimas“, 17 psl. – Pagal numatytuosius nustatymus MagicAssist automatinis aptikimas įjungtas. Tai galima išjungti DTX Studio Home „MagicAssist“ nustatymuose.

Importavimas iš iškarpinės

1. Kompiuteryje nukopijuokite vaizdą, kad įtrauktumėte į iškarpinę.
2. Clinic modulyje spustelėkite meniu piktogramą ☰, kad atidarytumėte paciento meniu.
3. Spustelėkite **Importuoti** ↓ ir pasirinkite **Iš iškarpinės**.
4. Patikrinkite importuotą vaizdą. Jei norite pakeisti jo modalumą, spustelėkite **Daugiau parinkčių...** ir pasirinkite kitą modalumą.
5. Spustelėkite **Importuoti**.

Importavimas iš programinės įrangos „3Shape Dental Desktop“

Norint importuoti skenuotą nuotrauką, kuri buvo padaryta „3Shape TRIOS“ intraoraliniu skeneriu, pirmiausia DTX Studio Home programinėje įrangoje reikia sukurti paciento įrašą.

Pastaba

Daugiau informacijos apie „3Shape TRIOS“ intraoralinio skenerio integravimą rasite [DTX Studio Core naudojimo instrukcijoje](#).

- DTX Studio Home sukurkite naują paciento įrašą. Norėdami užtikrinti, kad „3Shape“ duomenys bus sujungti:
 - naudokite lygiai tokį pat „3Shape Dental Desktop“ esamo paciento įrašo vardą, pavardę ir gimimo datą;
 - įsitikinkite, kad pacientų vardai ir pavardės didžiosiomis raidėmis buvo įvesti tinkamai. Skiriamos didžiosios ir mažosios vardu ir pavardžių raidės.

Pastabos

- Anksčiau importuotų pacientų įrašų pakartotinai importuoti negalima. „3Shape Dental Desktop“ programinėje įrangoje sukurkite paciento įrašo dublikatą ir tada jį importuokite.
 - DTX Studio Clinic paciento įrašo identifikavimo numeris į „3Shape“ nėra perduodamas. Įrašai susiejami remiantis naudotojo patvirtinimu, kad vardas, pavardė ir gimimo data yra tapatūs.
- Pasirinkite paciento įrašą sąrašė [Pacientai](#) .
 - Spustelėkite [Daugiau](#) .
 - Pasirinkite [Importuoti iš „3Shape“](#) .
 - Jei prašoma, patvirtinkite, kad paciento įrašas sutampa su paciento įrašu, kuris yra „3Shape Dental Desktop“.
 - Duomenys gaunami ir įtraukiami į išsamios informacijos apie pacientą skydelio skirtuką [Paciento duomenys](#).

Chirurginės operacijos plano importavimas

- DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą sąrašė [Pacientai](#) .
- Spustelėkite [Daugiau](#) .
- Pasirinkite [Importuoti chirurginės operacijos planą](#) .
- Pasirinkite chirurginės operacijos planą ir ataskaitą.
- Spustelėkite [Importuoti](#).

Duomenų pasirinkimas

Pasirinkite paciento vaizdus

Norėdami pasirinkti paciento įrašo vaizdus arba failus, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą sąrašė [Pacientai](#) .
- Užveskite pelės žymeklį ant miniatiūros skirtuke [Paciento duomenys](#) ir spustelėkite tuščią ženklelį arba laikykite nuspaudę Ctrl (Cmd, jei naudojate „Mac“) ir spustelėkite miniatiūrą. Pasirinktos miniatiūros bus pažymėtos spalvotu apvadu.

Atsiras greitis meniu, kuriame galėsite:

- dalytis pasirinktais vaizdais per „GoShare“ .
- eksportuoti pasirinktus vaizdus .
- koreguoti pasirinktų vaizdų gavimo datą .
- naikinti pasirinktus vaizdus iš paciento įrašo .

Virš šio meniu galite [išvalyti](#) pasirinkimą.

Dalijimasis duomenimis

Bendrinkite paciento duomenis per DTX Studio Go (per „GoShare“)

Paciento duomenimis su odontologijos kabinetu dalykitės naudodamiesi [DTX Studio Go](#). Pasidalijus paciento duomenimis, papildomame skirtuke [GoShare](#) rodoma apžvalga.

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą sąrašė [Pacientai](#) .
2. Spustelėkite [Bendradarbiauti](#) .
3. Pasirinkite, kuo norite dalytis:
 - [DTX Studio Clinic](#), jei norite dalytis visu paciento įrašu (DTX Studio Clinic nuosavybiniu šifruotu formatu) arba
 - [Pasirinkti duomenis](#), jei norite dalytis konkrečiais duomenimis.

Arba spustelėkite vieną iš partnerių elementų. Norėdami tvarkyti šiuos partnerių elementus, spustelėkite [Redaguoti](#) ir pasirinkite ryšius, kuriuos norite rodyti elementuose, tada spustelėkite [Išsaugoti](#).
4. Pasirinkite pageidaujamas parinktis.
5. Spustelėkite [Tęsti](#).
6. DTX Studio Go atidaro interneto naršyklę ir rodomas sukurtas GoShare™ atvejais. Tuo metu duomenys įkeliami fone.
 - Kortelės [Prescription](#) teksto lauke pridėkite pastabų.
 - Norėdami sukurti pastabos dėl recepto gidą, spustelėkite [Įterpti sparčiąją pastabą](#) ir pasirinkite [Konfigūruoti](#). Spustelėkite [Įtraukti sparčiąją pastabą](#). Pridėkite pavadinimą, įrašykite pasirinktinį tekstą ir spustelėkite [Išsaugoti](#). Spustelėkite [Uždaryti](#).
 - Norėdami pakeisti numatytąjį recepto vaizdą arba įtraukti anotacijų, laikykite žymeklį virš recepto vaizdo ir pasirinkite [Redaguoti paskyrimą](#). Norėdami pasirinkti kitą vaizdą, spustelėkite [Keisti vaizdą](#).
 - Norėdami redaguoti paciento informaciją, spustelėkite viršutiniame dešiniajame kampe esančią pieštuko piktogramą.
 - Prireikus pateikite papildomos informacijos arba papildomų (KP)KT vaizdų, klinikinių vaizdų, intraoralinių vaizdų, OPG, ataskaitų ir kt. failų.
7. Spustelėkite [Pradėti dalytis](#).
8. Pasirinkite prisijungusį asmenį, su kuriuo norite dalytis paciento duomenis. Tai galite padaryti ieškodami esamo prisijungusio asmens arba jį pasirinkdami lauke [Dalytis naudojant ryšį](#) ar įvesdami el. pašto adresą.
9. Spustelėkite [Siųsti](#). Gavėjui bus pranešta el. paštu.
10. Bendrinamas atvejis paciento įrašė pridėdamas prie [GoShare](#) apžvalgos. Spustelėkite [Žiūrėti atvejį](#) norėdami bendrinamą atvejį atidaryti DTX Studio Go.

Dalijimasis 3D pateiktimi

1. Clinic modulyje spustelėkite meniu piktogramą , kad atidarytumėte paciento meniu.
2. Spustelėkite **Dalytis**  ir pasirinkite **3D pateiktis**.
3. Pasirinkite pageidaujamas parinktis:
 - **Įtraukti 3D duomenis (DICOM)**: įtraukiami neapdoroti DICOM duomenys, jei jūsų šalyje tai teisiškai privaloma.
 - **Įtraukti dabartinį implantų planą**: įtraukiama išsamesnė implantų informacija.
 - **Anonimizuoti pacientą**: neįtraukiamas paciento vardas, pavardė, gimimo data ir paciento identifikavimo numeris.
4. Spustelėkite **Dalytis**.
5. 3D pateiktis įkeliamą į DTX Studio Go ir įtraukiama į atvejį.
6. Užbaikite procesą programoje DTX Studio Go ir pateikite prašomą informaciją.
7. Pacientas 3D pateiktį gali pasiekti internete.
8. 3D pateiktis įtraukiama į paciento įrašą esančius paciento duomenis.

Dalijimasis 2D vaizdais el. paštu arba jų perkėlimas į trečiosios šalies programą

1. Darbo srityje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite 2D vaizdą ir pasirinkite **Kopijuoti vaizdą**. Arba viršutiniame kairiajame peržiūros programos kampe spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę  ir pasirinkite **Kopijuoti vaizdą**.
2. Atidarykite el. pašto klientą arba trečiosios šalies programą, reikiamoje vietoje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite **Įdėti**.

Duomenų eksportavimas

Paciento įrašo eksportavimas

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite **Daugiau** .
3. Spustelėkite **Eksportuoti pacientą** .
4. Jei reikia, pasirinkite diagnozę, kurią norite eksportuoti.
5. Pasirinkite pageidaujamas parinktis.
6. Spustelėkite **leškoti**, kad pasirinktumėte duomenų eksportavimo vietą, tada spustelėkite **Parinkti aplanką**.
7. Spustelėkite **Eksportuoti**.

Paciento duomenų eksportavimas

1. Pereikite prie duomenų eksportavimo veiksmo.
 - Programos DTX Studio Home veiksmų srityje spustelėkite **Daugiau ...** ir pasirinkite **Eksportuoti duomenis** .
 - Clinic modulyje spustelėkite **Eksportuoti**  ir pasirinkite **Duomenys** .
2. Pasirinkite eksportuotinus vaizdus.
3. Spustelėkite **leškoti** ir eikite į pageidaujamą eksportavimo vietą.
4. Spustelėkite **Parinkti aplanką**.
5. Pasirinkite eksportavimo režimą, paciento duomenų anonimizavimą, metaduomenis ir vaizdo failo formatą.
6. Spustelėkite **Eksportuoti**.

Eksportuoti į 3D peržiūros programą

Norėdami bendrinti 3D rentgeno nuotrauką per kompaktinį diską arba USB atmintinę:

1. Programos DTX Studio Home veiksmų srityje spustelėkite **Daugiau ...** ir pasirinkite **Eksportuoti į 3D peržiūros programą** .
2. Pasirinkite eksportuotinus 3D vaizdus.
3. Spustelėkite **leškoti** ir eikite į pageidaujamą eksportavimo vietą.
4. Spustelėkite **Eksportuoti į 3D peržiūros programą**.
5. Patvirtinimo dialogo lange spustelėkite „Rodyti failų naršyklėje“.

Spausdinti DICOM vaizdus

Norėdami spausdinti DICOM vaizdus, įjunkite DICOM mazgo funkcijas ir sukonfigūruokite DICOM spausdintuvą DTX Studio Core.

1. Modulyje Clinic atidarykite paciento meniu  ir spustelėkite „Spausdinti DICOM“ .
2. Tvarkykite ataskaitos puslapius spustelėdami **Itraukti puslapį** arba **Naikinti puslapį**.
3. Konfigūruokite **Spausdinimo nustatymus**, **Antraštę ir poraštę** bei kiekvieną **Vaizdą**.
4. Norėdami išsiųsti ataskaitą į pasirinktą spausdintuvą, spustelėkite **Spausdinti**.

Implantų plano eksportavimas į „X-Guide“

Jei implantų planą baigėte rengti programinėje įrangoje DTX Studio Clinic, jį eksportuokite į X-Guide™.

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite **Daugiau ...**.
3. Spustelėkite **Eksportuoti į „X-Guide“** .
4. Jei reikia, pasirinkite implantų planą, kurį norite eksportuoti.
5. Pasirinkite pageidaujamas parinktis.
6. Spustelėkite **leškoti**, kad pasirinktumėte duomenų eksportavimo vietą, tada spustelėkite **Parinkti aplanką**.
7. Spustelėkite **Eksportuoti**.

Skenavimo prašymų pateikimas

Norint dirbti su skenavimo prašymais arba inicijuoti skenavimo darbo eigą su keliais skenavimo protokolais (žr. [30 psl.](#)), reikia prisijungti prie DTX Studio Core (žr. [17 psl.](#)).

Skenavimo suplanavimas

Norėdami dėl paciento pateikti skenavimo prašymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite [Su skenavimu susijęs prašymas](#) .
3. Pasirinktinai galite inicijuoti skenavimo darbo eigą su keliais skenavimo protokolais (žr. [30 psl.](#)).
4. Pelės žymeklį užveskite ant prietaiso išsklotinės ir spustelėkite [Pasirinkti](#).
5. Skenavimo prašymo formoje įveskite reikiamą informaciją.

Pastaba

Forma skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą modalumą ar prietaisą.

- Jei reikia, keiskite [Skenavimo data](#) ir [Prašymą pateikęs gydytojas](#).
 - Jeigu vaizdo gavimo prietaisas leidžia kelis modalumus, pasirinkite reikiamus modalumus: [3D](#), [CEPH](#) (cefalograma), [OPG](#) (PAN), [IOXRAY](#) (2D intraoralinis skenavimas), [IOS](#) (3D integralinis skenavimas) ir (arba) [IOCAM](#) (intraoralinė nuotrauka). Jei reikia, pasirinkite vaizdų kūrimo programą.
 - Dantų schemoje pasirinkite sritis, kurias norite skenuoti.
 - Jei reikia nuskenuoti sinusą, pasirinkite [Sinusas](#).
 - Jei reikia, pasirinkite vaizdo gavimo [raišką](#).
 - Jei pasirinkote intraoralinį prietaisą, pasirinkite [Gidas](#) ir nurodykite [Vaizdų kūrimo programą](#).
 - Jei reikia, operatoriui įtraukite [Prašymo pastabų](#).
6. Spustelėkite [Sukurti skenavimo prašymą \(-us\)](#).
 7. Skenavimo prašymas įtrauktas.

Skenavimo prašymų paieška ir rūšiavimas

Skenavimo prašymai rūšiuojami pagal suplanuotą datą.

Skenavimo prašymų sąrašo filtravimas

1. DTX Studio Home šoninėje juostoje spustelėkite [Skenavimo prašymai](#) .
2. Greta sąrašo antraštės [Skenavimo prašymai](#) spustelėkite filtro nustatymo piktogramą .
3. Pasirinkite, kuriuos nuskaitymo prašymus norite rodyti: [Šiandien](#) (numatytasis nustatymas), [Paskutinės 7 dienos](#), [Kitos 7 dienos](#) arba [Visi](#).

Skenavimo prašymo paieška

1. Lauke **Rasti skenavimo prašymą**  įveskite paciento vardą ir pavardę (arba jų dalį).
2. Renkant tekstą paieškos langelyje, automatiškai filtruojamas skenavimo prašymų sąrašas. Paieškos rezultatai surūšiuojami pagal suplanuotą datą.

Norėdami pašalinti paieškos kriterijus, paieškos laukelyje spustelėkite **X**.

Skenavimo prašymų tvarkymas

Pasirinkite skenavimo prašymą ir spustelėkite **Daugiau parinkčių ...** norėdami jį redaguoti, šalinti arba pažymėti kaip užbaigtą. Pasirinkite atitinkamą veiksmą.

Skenavimo darbo eiga

Naudokitės funkcija QuickPrescribe norėdami sukurti skenavimo darbo eigą, sudarytą iš kelių, taikant skirtingus modalumus padarytų skenuotų nuotraukų su tam tikru iš anksto nustatytų skenavimo prašymų rinkiniu. Tada šias skenavimo darbo eigas galima naudoti visose darbo vietose.

Pirmiausia DTX Studio Core nustatykite skenavimo darbo eigą, tada ją pritaikykite naudodami skenavimo planavimo ar fiksavimo vedlį.

Skenavimo darbo eigos nustatymas

1. Spustelėkite DTX Studio piktogramą  pranešimų srityje ekrano apačioje (jei naudojate „Mac“ – ekrano viršuje).
2. Spustelėkite **QuickPrescribe**. Jei dar nesate nustatę jokios skenavimo darbo eigos, spustelėkite **Pradėti iškart**.
3. Skenavimo darbo eigą baikite konfigūruoti programoje DTX Studio Core.

Pastaba

norėdami dirbdami su DTX Studio Core gauti daugiau informacijos, spustelėkite **Pagalba** apačioje kairėje.

4. Skenavimo prašyme arba fiksavimo vedlyje pasirinkite skenavimo darbo eigą.

Skenavimo darbo eigos taikymas

Programoje DTX Studio Core nustatykite skenavimo darbo eigą, tada ją pasirinkite naudodamiesi skenavimo prašymo ar fiksavimo vedliu.

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite **Su skenavimu susijęs prašymas**  arba **Fiksuoti** .
3. Spustelėkite **QuickPrescribe**.

Pastabos

- Paieškos lauke įveskite skenavimo darbo eigą (arba jos dalį), kad susiaurintumėte rezultatus.
- Norėdami pamatyti visus nustatytus modalumus ir parametrus, pelės žymeklį sąrašė užveskite ant skenavimo darbo eigos pavadinimo. Spustelėkite **Daugiau informacijos**.

4. Pelės žymeklį sąrašė užveskite ant skenavimo darbo eigos pavadinimo ir spustelėkite **Sukurti skenavimo prašymus (Nr.)**. Skaičius rodo, kiek skenavimo prašymų buvo sukurta naudojant pasirinktą skenavimo darbo eigą.
5. Dantų schemeje pasirinkite diagnostinę sritį, kurią norite nuskenuoti.
6. Spustelėkite **Sukurti skenavimo prašymus**.

Skenavimas

Skenuoti galima prieš pacientui nustatant diagnozę, diagnozuojant ar po to, pasirinktinai iš anksto sukūrus skenavimo prašymą.

Labai svarbu, kad naudotojai laikytųsi programinės įrangos instrukcijų ir techninių pranešimų – šitaip jie sumažins netikslaus skenavimo riziką.

Suplanuoto skenavimo atlikimas

Norėdami atlikti prašomą skenavimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Skenavimo prašymo kortelėje spustelėkite **Pradžia**.
2. Jei prijungtas daugiau nei vienas prietaisas, spustelėkite prietaiso elementą.
3. Atidaromas skenavimo modulis arba trečiosios šalies skenavimo programa.
4. Laikykitės instrukcijų.
5. Norėdami veiksmą užbaigti, spustelėkite **Baigti**, arba spustelėkite **Atidaryti diagnozę** norėdami paciento įrašą atidaryti Clinic modulyje.

Nedelsiamo skenavimo atlikimas

1. Paciento įrašą pasirinkite DTX Studio Home arba atidarykite paciento įrašą Clinic modulyje.
2. Spustelėkite **Fiksuoti** .
3. Užveskite pelės žymeklį ant prietaiso arba tiesioginio aplanko plytelės ir spustelėkite **Pasirinkti**.

Pastabos

- Intraoraliniai vaizdai automatiškai pasukami į tinkamą padėtį. Norėdami tai išjungti, [žr. 16 psl.](#)
- Importavus ar užfiksavus 2D vaizdą, lygio ir lango vertės nustatomos automatiškai. Norėdami tai išjungti, [žr. 17 psl.](#)
- Dirbdami su fiksavimo vedliu naudokite kelis skirtingo dydžio jutiklius juos prijungdami arba atjungdami. Naudojamas jutiklis rodomas viršutiniame dešiniajame kampe*.
- Jei prijungti keli jutikliai, rodomas simbolis „+“*. Visi prijungti ir aktyvūs jutikliai yra parengti skenuotai nuotraukai fiksuoti. Vaizdo fiksavimą suaktyvina rentgeno spinduliuotė.

* Jutikliams ir PSP, kurie DTX Studio Clinic palaikomi tiesiogiai. Prietaisams, jungiamiems per TWAIN, ši funkcija bus ribota.

Gidu valdomas fiksavimas naudojantis intraoraliniais jutikliais arba PSP prietaisais

Norėdami intraoralinius vaizdus užfiksuoti naudodamiesi gidu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Inicijuokite nedelsiamą skenavimą.
2. Spustelėkite skirtuką **Gidas** ir pasirinkite norimą gidą.
3. Pasirinkite išdėstymą ir vaizdus, kuriuos norite užfiksuoti.
4. Spustelėkite **Pradžia**.
5. Eikite į prietaisą norėdami atlikti nuskaitymą.
6. Peržiūros puslapyje patikrinkite užfiksuotus vaizdus. Pelės žymeklį laikykite virš peržiūros vaizdo, kad būtų rodomos papildomos parinktys **Sukti** bei **Pakreipti** ir rodomos arba slepiamos parinktys **Vaizdų filtrai** ir **Fiksuoti dar kartą**. Prireikus atlikite pakeitimus.
7. Spustelėkite **Baigti**.

Laisvas fiksavimas naudojantis intraoraliniais jutikliais arba PSP prietaisais

Norėdami intraoralinius vaizdus užfiksuoti nesinaudodami gidu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Inicijuokite nedelsiamą skenavimą.
2. Pasirinkite skirtuką **Laisvas**.
3. Eikite į prietaisą norėdami atlikti nuskaitymą.

Jei suaktyvinote MagicAssist automatinį aptikimą, žr. toliau nurodytus veiksmus:

- Apatiniame dešiniajame kampe rodoma MagicAssist automatinio aptikimo piktograma (📷).
- Fiksavimo vedlyje dantys aptinkami automatiškai. Jie pažymėti mėlyna spalva. Spustelėkite ant danties, kad pašalintumėte MagicAssist etiketę.
- Intraoraliniai vaizdai automatiškai atvaizduojami FMX diagramose.
- Prireikus dantų schemoje rankiniu būdu nurodykite neatpažintus vaizdus.

Pastaba

Pagal numatytuosius nustatymus MagicAssist automatinis aptikimas įjungtas. Tai galima išjungti nustatymuose.

4. Peržiūros puslapyje apžiūrėkite užfiksuotą vaizdą ir prireikus priskirkite dantų intervalą.
 - Norėdami iš dantų intervalo pašalinti nurodytus dantis, spustelėkite **Išvalyti pasirinkimą**.
 - Prireikus atlikite pakeitimus: pelės žymeklį laikykite virš peržiūros vaizdo, kad būtų rodomos papildomos parinktys **Sukti**, **Pakreipti** ir rodomos arba slepiamos parinktys **Vaizdų filtrai** ir **Fiksuoti dar kartą**.
 - Jei reikia, užfiksuotą vaizdą pasukite arba apverskite.

Veiksmas	Piktograma	Spartusis klavišas
Pasukti vaizdą prieš laikrodžio rodyklę		„Alt“ + ⬅ arba R
Pasukti vaizdą pagal laikrodžio rodyklę		„Alt“ + ➡ arba „Shift“ + R
Intraoralinį arba klinikinį vaizdą pakreipti horizontaliai		U
Intraoralinį arba klinikinį vaizdą pakreipti vertikalčiai		„Shift“ + U

5. Spustelėkite **Baigti**.

Gidu valdomas vaizdų fiksavimas naudojantis burnos ertmės kameromis

Norėdami intraoralinės kameros vaizdus užfiksuoti naudodamiesi gidu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Inicijuokite nedelsiamą skenavimą.
2. Likite skirtuke [Valdoma gidu](#).
3. Jei naudojate intraoralines kameras, pasirinkite dantis, kuriuos norite užfiksuoti.
4. Paspauskite prietaiso mygtuką (jei yra) arba spustelėkite [Fiksuoti nuotrauką](#).
5. Norėdami užfiksuoti kito danties intraoralinius vaizdus, jį pasirinkite klaviatūros rodyklėmis (← arba →). Taip pat galite spustelėti dantį dantų intervale ar spustelėti [Ankstesnis](#) arba [Kitas](#).

Pastaba

Jei vienam dančiui tereikia tik vieno vaizdo, įgalinkite [Užfiksavus pereiti prie kito danties](#), kad automatiškai pereitumėte prie kito danties.

6. Spustelėkite [Baigti](#).

Laisvas vaizdų fiksavimas naudojantis intraoralinėmis kameromis

Norėdami intraoralinės kameros vaizdus užfiksuoti nesinaudodami gidu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Inicijuokite nedelsiamą skenavimą.
2. Spustelėkite skirtuką [Laisvas](#).
3. Paspauskite prietaiso mygtuką (jei yra) arba spustelėkite [Fiksuoti nuotrauką](#).
4. Norėdami užfiksuotus vaizdus priskirti dančiui, spustelėkite vaizdo miniatiūrą apačioje ir pasirinkite atitinkamą dantį dantų intervale.

Pastaba

Norėdami vaizdą priskirti keliems dantis, vaizdą pasirinkite, spustelėkite dantį ir jį nutempkite virš kitų dantų.

5. Spustelėkite [Baigti](#).

Intraoralinis skenavimas

3Shape TRIOS® skeneris

1. Spustelėkite [Fiksuoti](#) .
2. Pelės žymeklį užveskite ant „3Shape“ intraoralinio skenerio plytelės ir spustelėkite [Pasirinkti](#).
3. Programoje „3Shape Dental Desktop“ paleiskite skenavimo funkciją.

Pastaba

Daugiau informacijos apie „3Shape TRIOS“ intraoralinio skenerio integravimą rasite [DTX Studio Core](#) naudojimo instrukcijoje.

4. Skenavimo procesą užbaikite.
5. Vaizdas įtraukiamas į išsamios informacijos apie pacientą skydelio skirtuką [Paciento duomenys](#).
 - Užbaigtas skenavimo prašymas pažymimas varnele.
 - Spustelėkite [Atidaryti diagnozę](#) norėdami paciento įrašą atidaryti DTX Studio Clinic.

DEXIS skeneriai

Naudodamiesi skenavimo modulių* galite „DEXIS IS ScanFlow“ integruoti į programinę įrangą DTX Studio Clinic ir naudoti palaikomą DEXIS™ intraoralinį skenerį.

* Tik „Windows“ kompiuteriuose ir kompiuteryje, kuris buvo naudojamas intraoralinio skenavimo duomenims gauti ir kuriame yra aplankas su RAW skenavimo duomenimis. Turi būti įdiegtas papildomas „DEXIS IS ScanFlow“ programinės įrangos modulis.

Intraoralinės skenuotos nuotraukos duomenų įgijimas

1. Pacientų sąrašą pasirinkite paciento įrašą.
2. Spustelėkite [Fiksuoti](#) .
3. Pelės žymeklį užveskite ant intraoralinio skenerio plytelės ir spustelėkite [Pasirinkti](#).
4. Vadovaukitės skenavimo modulyje pateikiamomis instrukcijomis*.
5. Apdoroti duomenys įtraukiami į paciento įrašą.
6. Jei naudodamiesi „ScanFlow“ užfiksavote kelis sąkandžio modelius, DTX Studio Clinic dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite viršutinį arba apatinį žandikaulį, tada pasirinkite spustelėdami [Sąkandžiai](#).

Skenavimo atvejo atidarymas iš naujo

Vietoje užfiksuotus intraoralinio skenavimo duomenis galima iš naujo atidaryti skenavimo modulyje*.

Pastaba

Tai įmanoma tik kompiuteryje, kuris buvo naudojamas skenavimo duomenims gauti.

Norėdami skenavimo modulį atidaryti iš naujo (kad galėtumėte redaguoti skenuotą nuotrauką, apkarpyti, išmatuoti ir kt.), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Paciento įrašą spustelėkite intraoralinės skenuotos nuotraukos elementą.
2. Spustelėkite [Redaguoti „ScanFlow“](#).

Kaip tęsti darbą programoje „DEXIS IS ScanFlow Scan“

Vietoje užfiksuotos intraoralinės skenuotos nuotraukos duomenis galima iš naujo atidaryti programoje „ScanFlow“ (kad būtų galima redaguoti skenuotą nuotrauką, atlikti papildomų skenavimų, apkarpyti, išmatuoti ir kt.) toliau nurodytu būdu:

1. Paciento įrašą pasirinkite DEXIS IS prietaiso intraoralinės skenuotos nuotraukos elementą.
2. Spustelėkite **Daugiau parinkčių...** ir pasirinkite [Tęsti darbą programoje „ScanFlow“](#).

Išplėstinių „ScanFlow“ funkcijų įjungimas

Išplėstines „ScanFlow“ funkcijas įjunkite norėdami DEXIS IS 3800 naudoti IO CAM* režimu arba importuoti neapdorotus DEXIS prietaiso duomenis.

1. Spustelėkite [Meniu](#) , DTX Studio Home.
2. Spustelėkite [Nustatymai](#) ir pasirinkite [DEXIS IS](#).
3. Įjunkite [Paleisti „IS ScanFlow“ skenavimo režimu](#).

* IO CAM režimas prieinamas, tik jei turite „Premium“ licenciją ir DEXIS IS 3800 prietaisą, kad galėtumėte redaguoti skenuotą nuotrauką, atlikti papildomų skenavimų, apkarpyti, išmatuoti ir kt.


Diagnozės nustatymas arba gydymo suplanavimas

DTX Studio Clinic atidarykite paciento įrašą, kad galėtumėte peržiūrėti ir patikrinti paciento duomenis bei gautus duomenis ir matavimus įtraukti į paciento įrašą.

DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą sąrašė [Pacientai](#) ir spustelėkite [Atidaryti pacientą](#) . Arba dukart spustelėkite paciento vardą ir pavardę pacientų sąrašė ar paspauskite [O]. Norėdami uždaryti paciento įrašą arba Clinic modulį, paciento meniu  spustelėkite [Uždaryti pacientą](#).

Funkcijos priklauso nuo DTX Studio Clinic licencijos tipo.

Clinic modulio apžvalga

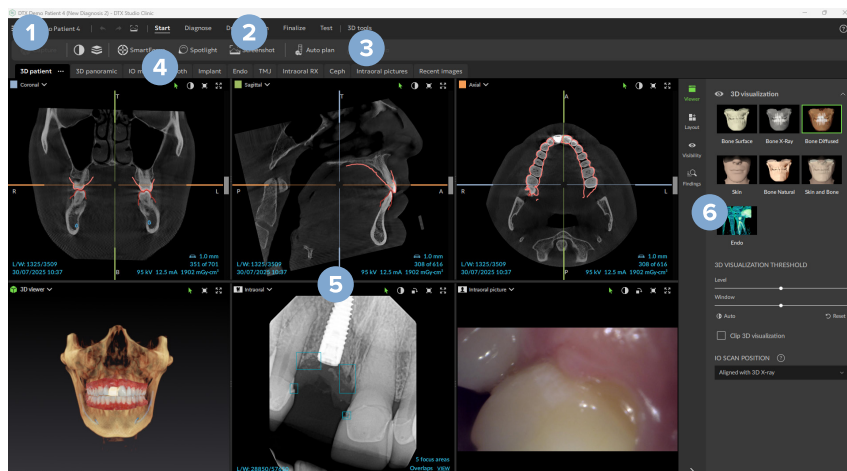

- 1 Paciento meniu
- 2 Meniu juosta
- 3 Įrankių juosta
- 4 Darbo srities juosta
- 5 Darbo vieta - SmartLayout™
- 6 Išmanusis skydelis

Paciento diagnostikos duomenys

Norėdami Clinic modulyje atidaryti paciento meniu, viršutiniame kairiajame kampe spustelėkite meniu piktogramą .


Diagnozių valdymas

Paciento meniu galite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

- Kurti naują diagnozę – [Nauja](#).
- [Atidaryti](#) esamą diagnozę.
- [Išsaugoti](#) atidarytą diagnozę.

Dantų schema

Paciento meniu dantų schemeje pateikiama atidarytos diagnozės dantų būsenos apžvalga.

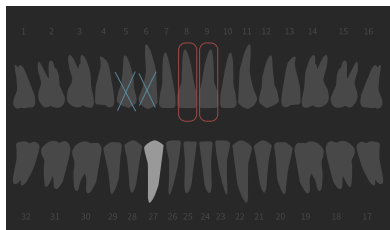

Pastaba

Jei pacientas yra jaunesnis nei aštuonerių metų, rodoma pieninių dantų schema. Nepamirškite dantų informacijos pakeisti rankiniu būdu, kad pacientui augant pereitumėte prie nuolatinių dantų schemas.

Dantų schemos redagavimas

Norėdami redaguoti dantų schemą, spustelėkite dantį dantų schemeje ir pasirinkite vieną iš toliau pateiktų parinkčių.

Piktograma	Veiksmas	Paaiškinimas
	Pakeisti	Pakeisti pieninį dantį nuolatiniu dantimi. Ši parinktis pasiekama, jei vaikui auga nuolatinis dantis. Dančiui išaugus, visi pieninio danties duomenys ištrinami ir nuolatinis dantis nustatomas kaip „sveikas“.
		Pastaba Jeif pacientas jaunesnis nei aštuonerių metų, rodoma pieninių dantų schema.
	Nėra su tarpu	Šio danties trūksta ir šioje vietoje yra tarpas.
	Ištrigęs	Šis dantis bus paveiktas (dažnai naudojama protinio danties atveju).
	Išstatyti	Išstatyti dantį, pvz., prasikalę nuolatiniai krūminiai dantys.
	Nėra be tarpo	Nurodo hipodontiją.

Paciento duomenys

Atidarytos paciento įrašo diagnozės nuotraukos ir vaizdai po dantų schema rodomi pagal duomenų tipą ir rūšiuojami pagal įgijimo datą. Čia taip pat rodomi visi užbaigti implantų planai.

Spustelėkite elementą, kad paciento duomenys būtų įtraukti arba pašalinti iš atidarytos diagnozės. Pridedami vaizdai su žaliu rėmeliu.

	3D rentgeno nuotrauka		Cefalograma
	Intraoralinė skenuota nuotrauka		Klinikiniai vaizdai
	Laboratorijos dizainas iš dantų technikos laboratorijos		Ekranų kopija
	OPG (panoraminė nuotrauka)		Veido skenograma
	Intraoralinis vaizdas		

Virš dantų diagramos galite pasirinkti:

	Fiksuoti	Duomenys gaunami tiesiogiai.
	Importuoti	Duomenys importuojami į atidarytą diagnozę.
	Eksportuoti	Eksportuojami duomenys arba paciento diagnozės ataskaitos.
	Dalytis	Dalijamasi 3D pateiktimi.

3D ir intraoralinės skenuotos nuotraukos peržiūros programos fono nustatymas

1. Lange **Ypatybės** spustelėkite **Trimatės peržiūros programa**.
2. Pasirinkite **Vientisa spalva**.
3. Spalvą pasirinkite išskleidžiamajame meniu arba, jei norite pasirinkti bet kurią kitą spalvą, pasirinkite **Pasirinktinis**.
4. Spustelėkite **Gerai**.

Numatytojo vaizdo mastelio dydžio nustatymas


Norėdami nustatyti numatytąjį rodomų vaizdų mastelio dydį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Lange **Ypatybės** spustelėkite **Bendra**.
2. Sąraše **Numatytasis vaizdo dydis** pasirinkite numatytąją didinimo vertę.
3. Spustelėkite **Gerai**.

Darbas su peržiūros programomis

Norėdami pasiekti bendruosius peržiūros programos veiksmus, bet kurioje jos vietoje spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu. Norėdami peržiūrėti jos konkrečius veiksmus, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite objektą (pvz., implantą, anotaciją, fokusavimo sritį ir kt.).

Dirbdami su peržiūros programomis naudokite pelę. Norėdami numatytuosius 3D peržiūros programos valdiklius pakeisti DTX Studio Implant arba „Invivo“ valdikliais, atidarykite nuostatų meniu [Bendrasis](#).

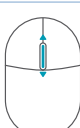Veiksmas	Trimatės peržiūros programa	Kiti peržiūros programų tipai
 Spustelėjimas dešiniuoju pelės klavišu	Kontekstinis objektų ir peržiūros programų meniu	Kontekstinis objektų ir peržiūros programų meniu
 Spustelėjimas dešiniuoju pelės klavišu ir tempimas	3D modelio sukimas	Šviesumas / kontrastas (numatytasis) arba vaizdo didinimas ir mažinimas
 „Ctrl“ + spustelėjimas ir vilkimas arba „Cmd“ + spustelėjimas ir vilkimas	Panorama	Panorama
 „Shift“ + spustelėjimas ir vilkimas	Vaizdo didinimas ir mažinimas	Vaizdo didinimas ir mažinimas
 Sukti pelės ratuką	Vaizdo didinimas ir mažinimas	Tik pjūvio peržiūros programoje: slinkite pjūvius

Darbo sritys

Darbo sritį pasirinkite darbo srities juostoje, jei yra, arba naudokite atitinkamą spartųjį klavišą.

Pastaba

Rodomos tik darbo sritys, kurių vaizdai arba duomenys įtraukti į diagnozę.

Darbo vieta	Aprašas	Spartieji klavišai
3D paciento	Norėdami apžiūrėti įkeltą modelį iš visų pusių, naudokite pelės veiksmus (žr. 38 psl.) ir klaviatūros sparčiuosius klavišus. Tai galima padaryti ir naudojant standartines klinikinio vaizdo piktogramas:  Priekinis  Galinis  Šoninis kairysis  Dešinysis šoninis  Viršugalvio  Pamato Dar kartą paspauskite F2, kad pereitumėte į darbo sritį „IO modeliai“ (jei galima).	F2
3D panoraminė	Pagal įkeltą 3D rentgeno nuotrauką sukuriamą 3D panoraminę rentgeno nuotrauką.	F3
IO modeliai	Patikrinkite ir palyginkite intraoralinę skenuotas nuotraukas ir veido skenogramas. Dar kartą paspauskite F2, kad pereitumėte į 3D paciento duomenų darbo sritį (jei yra). Pastaba Įvairiose darbo srityse rodoma tik naujausia pasirinkta intraoralinė skenuota nuotrauka arba veido skenograma.	F2
Dantis	Suraskite konkretų dantį ir naudodami išmanųjį skydelį Maketą palyginkite visus 2D ir 3D duomenis. Pasirinktą dantį anotuokite (žr. 44 psl.). Statmenos peržiūros programoje vertikaliu slinkikliu galima sukioti skersinius pjūvius aplink danties sukimosi ašį. Priklausomai nuo situacijos, pjūvių padėtį nurodo šie skersinių pjūvių apibūdinimai: – Burnos / skruosto (B / S) – Mezialinis / distalinis (M / D) – Kairysis / dešinysis (K / D) Norėdami pakoreguoti sukimosi ašį, žr. 44 psl. Dar kartą paspauskite F4, kad pereitumėte į „Endo“ darbo sritį (jei yra).	F4

Darbo vieta	Aprašas	Spartieji klavišai
Implantas	Implantų planavimas ir patikrinimas (žr. 55 psl.). – Spustelėkite ir vilkite pjūvį arba slinkite pjūvius, kad rastumėte pageidaujamą vietą. – Paslinkite arba pasukite implantą ar tvirtinamąjį kaištį bet kurioje 3D (CB)CT duomenų 3D pjūvių peržiūros programoje spustelėdami ir vilkdami objektą ar galiuką arba peties taškus. Sukurti chirurginį gidą (žr. 56 psl.).	F9
„Endo“	Fokusuokite ties konkrečiu dantimi endodontinei diagnostikai ir procedūroms. Jei norite, kad būtų rodoma danties pulpa, išmanijame skydelyje Peržiūros programa spustelėkite „Endo“ trimatį vaizdavimą. Pastaba Ši darbo sritis pasiekama, jei įkelta 3D rentgeno nuotrauka. – Trimatės peržiūros programose Šaknies kanalas ir Trimatės peržiūros programa vaizdas fokusuojamas ties dominančiu dantimi. – Peržiūros programa Danties skersiniai pjūviai yra skersinių pjūvių peržiūros programa, kurioje rodomi keli horizontalūs danties skerspjūviai. – Automatiškai aptikus (žr. 48 psl.) arba rankiniu būdu apibrėžus (žr. 49 psl.) šaknies morfologiją, vaizduojami šaknų kanalai. Dar kartą paspauskite F4, kad pereitumėte į danties darbo sritį (jei yra).	F4
SAŽS	Šąnarių galvučių ir smilkininio apatinio žandikaulio šąnarių sričių tikrinimas.	Netaikoma
„Intraoral RX“	Patikrinkite burnos ertmės vaizdus makete, pavyzdžiui, visos burnos rentgeno nuotraukų seriją. – Dukart spustelėkite vaizdą, kad jį išskleistumėte ir naudotumėte vaizdo filtrus bei SmartLayout™ (žr. 43 psl.). – Norėdami perjungti kitą vaizdą, išmaniojo skydelio Maketis apžvalgoje spustelėkite miniatiūrą. Arba naudokite klaviatūroje (   ) arba ekrane (< >) esančias rodykles. – Norėdami grįžti į pradinę maketo apžvalgą, dar kartą dukart spustelėkite vaizdą, paspauskite „Esc“ arba spustelėkite žalią rodyklę kairėn . – Toje pačioje rezervuotoje vietoje galima vieną ant kito sudėti kelis vaizdus. Spustelėkite sluoksnių piktogramą (), kad būtų rodomi visi vaizdai. Norėdami juos palyginti, spustelėkite palyginimo piktogramą ( ). – Norėdami pasirinkti kitą rezervuotos vietos maketą, spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę viršutiniame kairiajame darbo srities kampe. Įsitikinkite, kad pasirinkta Žiūrėti pagal datą. Tada pasirinkite Visi šablonai ir pasirinkite vieną iš šablono parinkčių.	F6

Darbo vieta	Aprašas	Spartieji klavišai
OPG (panoraminės rentgenogramos)	Peržiūrėkite dvimatę panoraminę rentgenogramą arba daugiasluoksnius panoraminius vaizdus.	F5
Cefalogramos	Peržiūrėkite priekinę ir (arba) šoninę cefalogramą. Naudokite priemonę CEPH , kad cefalogramas apskaičiuotumėte pagal įkeltą 3D rentgeno nuotrauką, arba importuokite 2D cefalogramas.	F7
Klinikiniai vaizdai	Peržiūrėkite klinikinius paciento vaizdus. – Dukart spustelėkite vaizdą, kad jį išskleistumėte ir naudotumėte vaizdo filtrus bei SmartLayout™ (žr. 43 psl.). – Norėdami perjungti kitą vaizdą, išmaniojo skydelio Maketas apžvalgoje spustelėkite miniatiūrą. Arba naudokite klaviatūroje (← ↑ ↓ →) arba ekrane (< >) esančias rodykles. – Norėdami grįžti į pradinę maketo apžvalgą, dar kartą dukart spustelėkite vaizdą, paspauskite „Esc“ arba spustelėkite žalią rodyklę kairėn ←. – Toje pačioje rezervuotoje vietoje galima vieną ant kito sudėti kelis vaizdus. Spustelėkite sluoksnių piktogramą () , kad būtų rodomi visi vaizdai. Norėdami juos palyginti, spustelėkite palyginimo piktogramą (> <). – Norėdami pasirinkti kitą rezervuotos vietos maketą (Ortodontinis, Kamera arba Klinikiniai vaizdai), viršutiniame kairiajame darbo srities kampe spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę. Įsitikinkite, kad pasirinkta Žiūrėti pagal datą. Tada pasirinkite Visi šablonai ir pasirinkite vieną iš šablono parinkčių. Vaizdą, kurį norite modifikuoti spustelėkite du kartus. Norėdami klinikinį vaizdą apversti, sukti, apkirpti ar ištiesinti, jį spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite atitinkamą veiksmą. Arba viršutiniame kairiajame darbo srities kampe spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę.	F8

Darbo vieta	Aprašas	Spartieji klavišai
Intraoralinės nuotraukos	Panašios į klinikinius vaizdus, tačiau jose yra intraoralinės kameros nuotraukos. Dantų schemeje pasirinkus dantį ir danties darbo srityje vaizdai fiksuoti naudojant intraoralinę kamerą, užfiksuoti vaizdai automatiškai priskiriami pasirinktam dančiui. Priskirti dantų numeriai rodomi klinikinių vaizdų darbo srityje. – Dukart spustelėkite vaizdą, kad jį išskleistumėte ir naudotumėte vaizdo filtrus bei SmartLayout™ (žr. 43 psl.). – Norėdami perjungti kitą vaizdą, išmaniojo skydelio Maketas apžvalgoje spustelėkite miniatiūrą. Arba naudokite klaviatūroje (   ) arba ekrane ( ) esančias rodykles. – Norėdami grįžti į pradinę maketo apžvalgą, dar kartą dukart spustelėkite vaizdą, paspauskite „Esc“ arba spustelėkite žalios rodyklės kairėn piktogramą . – Toje pačioje rezervuotoje vietoje galima vieną ant kito sudėti kelis vaizdus. Spustelėkite maketų piktogramą , kad būtų rodomi visi vaizdai, tada spustelėkite palyginimo piktogramą , kad juos palygintumėte. – Norėdami pasirinkti kitą rezervuotos vietos maketą, spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę viršutiniame kairiajame darbo srities kampe. Įsitikinkite, kad pasirinkta Žiūrėti pagal datą. Tada pasirinkite Visi šablonai ir pasirinkite vieną iš šablono parinkčių.	Netaikoma
Naujausi vaizdai	Darbo srityje Naujausi vaizdai rodomi visi neseniai importuoti arba užfiksuoti vaizdai. Pagal numatytuosius nustatymus darbo srityje rodomi paskutinių septynių dienų vaizdai. Norėdami tai pakeisti, eikite į DTX Studio Clinic ypatybes.	F12
Intraoralinė kamera	Vaizdams fiksuoti intraoralinė kamera skirta darbo sritis.	F10

Darbo sričių tinkinimas

1. Lange **Ypatybės** spustelėkite **Bendra**.
2. Sąraše **Numatytoji darbo sritis** pasirinkite darbo sritį, kuri pagal numatytuosius nustatymus bus rodoma atidarant Clinic modulį. Standartinis nustatymas yra **Naujausi duomenys** – darbo sritis susieta su paskiausiu užfiksuotu ar importuotu vaizdu.
3. Laukelyje **Naujausi vaizdai** galima pasirinktinai pakeisti dienų, kurias vaizdai bus rodomi darbo srityje **Naujausi vaizdai**, skaičių. Numatytoji vertė yra 7.
4. Spustelėkite **Gerei**.

Visos susijusios danties informacijos rodymas naudojant SmartFocus™

Peržiūros programose, kurios palaiko SmartFocus™, suaktyvinkite jį paspausdami tarpo klavišą. Arba įrankių juostoje **Pradžia** spustelėkite piktogramą SmartFocus™ (.

- Užveskite pelės žymeklį ant danties, kad būtų parodytas jo numeris. Danties emalis, dentinas ir pulpos kamera bus paryškinti skirtingomis spalvomis, kad būtų lengviau juos atpažinti.
- Norėdami pereiti į danties darbo sritį ir įkelti (pasirinktinai) konkretaus danties duomenis į peržiūros programas, spustelėkite danties sritį.
- Kai SmartFocus™ naudojamas už dantų diapazono ribų, darbo sritis, kurioje dirbate, yra nukreipta į nurodytą tašką.

Vaizdų tinkinimas naudojant SmartLayout™

Pritaikykite darbo sritį išmaniajame skydelyje **Maketas** pridėdami peržiūros programų arba jas pašalindami ir keisdami peržiūros programos proporcijas.

- Norėdami į darbo sritį įtraukti kitą peržiūros programą, spustelėkite išmaniojo skydelio **Maketas** elementą.
- Norėdami peržiūros programą iš darbo srities pašalinti, elementą spustelėkite dar kartą.
- Norėdami pakeisti peržiūros programų proporciją, vilkite kurį nors iš lango polangių.
- Norėdami uždaryti peržiūros programą, spustelėkite išskleidžiamąją rodyklę viršutiniame kairiajame peržiūros programos kampe. Pasirinkite **Uždaryti peržiūros programą**. Arba galite paspausti [Q].
- Jei norite rūšiuoti pagal modalumą, datą arba nustatyti, kad pasirinkti vaizdai būtų rodomi pirmiausia, spustelėkite išskleidžiamąjį meniu **Rūšiuoti pagal** ir pasirinkite **Modalumas**, **Data** arba **Pasirinktas pirmasis**.
- Norėdami darbo srities išdėstymą išsaugoti, šalia darbo srities pavadinimo spustelėkite **Daugiau parinkčių...** ir pasirinkite **Išsaugoti darbo srities išdėstymą**. Šis išdėstymas nustatytas kaip numatytasis naujų pacientų diagnozių išdėstymas. Norėdami iš naujo nustatyti peržiūros programas, spustelėkite **Nustatyti iš naujo darbo sritį**.


Vaizdų naudojimas iš miniatiūrų juostos

Intraoral RX darbo srities ir **klinikinių nuotraukų** darbo sričių apačioje, miniatiūrų juostoje, nurodomi visi į diagnozės nustatymą įtraukti vaizdai, kurie nėra matomi darbo srities peržiūros programoje.

- Norėdami surūšiuoti ir pritvirtinti intraoralinius vaizdus, kurie dar nebuvo surūšiuoti automatiškai, spustelėkite **Rūšiuoti** .
- Norėdami rankiniu būdu į darbo sritį įtraukti intraoralinį vaizdą, vilkite vaizdą nuo miniatiūrų juostos iki jam numatytos vietos.
- Jei vietos žymeklyje jau yra paveikslėlis, paveikslėliai sudedami vienas ant kito. Naujausias vaizdas rodomas viršuje. Spustelėkite sluoksnių piktogramą () , kad pamatytumėte visus vieną ant kito sudėtus vaizdus.

Išmaniojo skydelio dantų schema

Darbo srityse **Dantis** ir „Endo“ dantų schema rodoma virš išmaniojo skydelio.

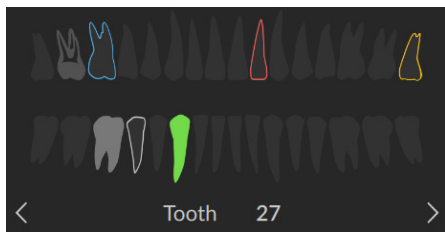

- Aktyvus dantis, kurio duomenys rodomi darbo srityje, yra paryškintas žaliai.
- Kitą dantį pasirinkite jį spustelėdami dantų schemeje.
- Norėdami pereiti prie ankstesnio danties, po dantų schema spustelėkite **Ankstesnis** piktogramą (<), o jei norite pereiti prie kito danties, spustelėkite **Kitas** piktogramą (>).
- Bent vieną radinį turinčio danties kontūras yra spalvotas. Spalva priklauso nuo radinio gydymo būsenos.

Gydymo būseną	Spalva	Aprašas
Būklė	Pilkas	Gauti duomenys nėra kritiniai, bet gali tekti stebėti, kaip jie keisis laikui bėgant.
Gydymo planas	Raudonas	Radinį reikia gydyti.
Tolesnis stebėjimas	Oranžinis	Radinys aptiktas ankstyvoje stadijoje ir jį reikia stebėti.
Užbaigtas	Mėlynas	Su šiais gautais duomenimis susijęs gydymas baigtas.

Kaulo slenkstinės vertės koregavimas

Norėdami koreguoti kaulo slenkstinę vertę, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Trimatės peržiūros programoje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite (KP)KT duomenis ir pasirinkite **Kaulo slenkstinė vertė**, tada slankikliu nustatykite pageidaujamą slenkstinę vertę.
- Taip pat išmaniajame skydelyje **Peržiūros programa** galima naudoti slankiklį **3D vaizdavimo slenkstis**.

Pjūvių koregavimas

- **Perkelkite** pjūvį slinkdami, spustelėdami ir tempdami pjūvio liniją. Tai galima padaryti ir naudojant slankiklius.
- **Pasukite** pjūvį spustelėdami ir tempdami vieną iš pjūvio galų. Norėdami pasukti vaizdo duomenis aplink centrinę peržiūros programos tašką, pelę tempkite į vidų.

Pjūvio padėtis išsaugota. Norėdami sugrąžinti numatytąją padėtį, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite pjūvio peržiūros programoje, tada pasirinkite **Iš naujo nustatyti pjūvio ašį**.

3D tūrio kirpimas

3D peržiūros programoje spustelėkite bet kurią vietą, kad ją suaktyvintumėte. Tada darbo srities **3D paciento**, **Dantis** arba **Trimatė tikrinimo** išmaniajame skydelyje **Peržiūros programa** pasirinkite **Kirpti trimatį vaizdavimą**, kad dalis trimačio tūrio būtų paslėpta ir galėtumėte patikrinti tam tikras tūrio sritis.

Dantų burnos ertmės kamerų naudojimas darbo srityse

Intraoralinius vaizdus užfiksukite su USB dantų intraoraline kamera tiesiogiai darbo srityje **Intraoralinė kamera** arba juos įgykite iš kitos darbo srities atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

1. Spustelėkite darbo srities skirtuką **Intraoralinė kamera** arba bet kurioje darbo srityje spustelėkite išmanųjį skydelį **Kameros**.
2. Jei reikia, spustelėkite kameros įrenginio elementą.
3. Paspauskite prietaiso mygtuką, kad vaizdą užfiksuotumėte. Arba apačioje spustelėkite **Fiksuoti nuotrauką**.

Pacientų vaizdų analizė

Įrankių juostoje pateikiami įrankiai, skirti diagnozuoti, matuoti, gydymui planuoti ir skenavimo duomenims redaguoti.

Ne visi įrankiai yra prieinami kiekvienoje darbo vietoje. Netaikytini įrankiai yra pilkos spalvos. Kai kurie įrankiai yra sugrupuoti išskleidžiamajame meniu (∨). Sugrupuotų anotacijų ir matavimo įrankių atveju rodomas vėliausiai naudotas įrankis.



Įspėjimas

Matavimo tikslumas priklauso nuo vaizdo duomenų, naudotos skenerio aparatinės įrangos, jos kalibravimo ir fiksavimo nustatymų. Matavimas negali būti tikslesnis nei vaizdo raiška. DTX Studio Clinic programinė įranga pateikia vertę, suapvalintą iki vieno skaitmens po kablelio, pagal naudotojo pasirinktus taškus.

Spustelėkite kurį nors iš įrankių juostos skirtukų, kad pereitumėte prie atitinkamo įrankio.

Įrankis	Įrankių juostos kelias	Aprašas
3D tikrinimas	Diagnozuoti >	Spustelėdami 3D modelį patikrinkite pagrindinį pjūvį. – Pjūvis rodomas perdangos pjūvio naršyklės lange. – Aktyvūs vaizdų filtrai ir pjūvio storis taip pat taikomi pjūvio naršyklės rodinui. – Slinkite norėdami peržiūrėti visus pjūvius. – Tikrinant pagrindinį pjūvį 3D modelis lieka pasukamas. Norėdami užbaigti, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu.
3D pateiktis	Užbaigti >	Dalijimasis 3D pateiktimi.

Įrankis	Įrankių juostos kelias	Aprašas
Įtraukti / šalinti dantis	3D įrankiai > IO skenuotos nuotraukos nustatymas	 Virtualiai sukurkite arba ištraukite dantis. Pagal numatytuosius nustatymus bus pasirinkti trūkstami dantys. Jeigu norite tuo pačiu ištraukti ir sukurti dantį, spustelėkite esamą danties vietą. Jeigu norite ištraukti dantį arba sukurti virtualųjį dantį, dešiniu juo pelės mygtuku spustelėkite dantį, kad pasirinktumėte veiksmą Kurti dantį arba Ištraukti dantį. Spustelėkite Kitas ir peržiūrėkite galutinį rezultatą. Spustelėkite Baigti. Pastaba Jeigu norite, kad būtų rodoma pradinė intraoralinė skenuota nuotrauka, spustelėkite išmanųjį skydelį Matomumas. Pasirinkite pakeistą intraoralinę skenuotą nuotrauką, spustelėkite Daugiau parinkčių... ir pasirinkite Pradinės skenuotos nuotraukos modelis. Taip pat galima dešiniu juo pelės mygtuku spustelėti intraoralinio skenavimo modelį darbo srities peržiūros programoje, pasirinkti IO skenuotos nuotraukos, tada pasirinkti Pradinės skenuotos nuotraukos modelis. Norėdami pakoreguoti virtualųjį dantį, naudokite parinktis Perkėlimas, Sukimas arba Mastelis, esančias išmaniajame skydelyje Koreguoti. Pasirinkite Užfiksuoti padėtį skaičiavimo metu, kad virtualusis dantis liktų šioje padėtyje, kai spustelėsite Perskaičiuoti virtualiuosius dantis, ir paleiskite MagicAssist dar kartą.
Koreguoti OPG / PAN kreivę	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką	 Koreguokite OPG / PAN kreivę. Nurodykite taškus ir dantis, kaip reikalaujama. Jei dantys nėra aiškiai matomi, slinkite arba naudokite dešinėje pusėje esantį pilką slankiklį, kad pakoreguotumėte ašinio pjūvio padėtį pagal dantų šablono plokštumą (maždaug susiliejančią su sąkandžio plokštuma). Prireikus kreivę pakoreguokite: – paspauskite ir nutempkite atskirus valdymo taškus, kad pakoreguotumėte kreivės formą; – spustelėkite ant kreivės, kad pridėtumėte naują valdymo tašką; – spustelėkite ir tempkite aplinkinę sritį, kad pastumtumėte visą kreivę.
Koreguoti padėtį	3D įrankiai > IO skenuotos nuotraukos nustatymas	 Pakoreguokite intraoralinio skenavimo padėtį.

Įrankis	Įrankių juostos kelias		Aprašas
Koreguoti paciento padėtį	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką		Redaguokite paciento modelio padėtį. 3D paciento modelį galima nustatyti į pageidaujamą padėtį, trimatėse peržiūros programose jį perkeliant ir pasukant. 1. Spustelėkite panoramos piktogramą () arba sukimo piktogramą () arba paspauskite [Tab] klavišą, kad galėtumėte kaitalioti sukimo ir perkėlimo režimus. Pasirinktas režimas bus žalios spalvos. 2. Tempkite modelį, kol jis bus tinkamai sulygiuotas su nuorodų linijomis. 3. Spustelėkite Baigta .
Koreguoti dantų aptikimą	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką		Koreguokite danties padėtis. Dantų schemeje pasirinkite dantį, kurį norite sukalibruoti. Dantį nutempkite į tinkamą padėtį ašiniame pjūvyje. Koreguokite danties ašį statmename pjūvyje.
Sulygiuokite veido skenogramą su 3D rentgeno nuotrauka	3D įrankiai > Lygiuoti tūrius		Sulygiuokite veido skenogramą su 3D rentgeno nuotrauka.
Sulygiuoti veido skenogramą su IO skenuota nuotrauka	3D įrankiai > Lygiuoti tūrius		Sulygiuokite veido skenogramą su intraoraline skenuota nuotrauka.
Sulygiuoti IO skenuotą nuotrauką su 3D rentgeno nuotrauka	3D įrankiai > Lygiuoti tūrius		Sulygiuokite arba iš naujo sulygiuokite intraoralinę skenuotą nuotrauką su 3D rentgeno nuotrauka.
Patikrinti kvėpavimo takus	Diagnozuoti > 3D segmentacija		Patikrinkite kvėpavimo takus. Nurodykite orientyrus, kad aplink dominančią sritį sukurtumėte langelį. Spustelėkite Baigta . Kvėpavimo takų tūris ir siauriausia sritis vaizduojami darbo srityje 3D paciento .
Tvirtinamasis kaištis	Planas >		Suplanuokite tvirtinamąjį kaištį.
Kampas	Piešti >		Išmatuokite kampą. Spustelėkite tris taškus.
Patvirtinti viską	Diagnozuoti > Fokusavimo sritys		Patvirtinkite aptiktas fokusavimo sritis ir paverskite jas išvadomis.
Sritis	Piešti >		Išmatuokite plotą.

Įrankis	Įrankių juostos kelias		Aprašas
Rodyklė	Piešti >		Brėžkite rodyklę.
Auto endo	Pradžia >		Leiskite programinei įrangai aptikti ir apskaičiuoti pradines šaknies kanalo trajektorijas.
Automatinis planas	Planas / Pradžia > Automatinis planas		Leiskite programinei įrangai apskaičiuoti pradinį implanto planą.
Šviesumas ir kontrastas	Pradžia >		Norėdami pakoreguoti ryškumą ir kontrastą, tempkite peržiūros programoje: – Horizontaliai: kad pakeistumėte kontrastą. – Vertikaliai: kad pakeistumėte ryškumą. Pastaba Kai ryškumo ir kontrasto įrankis naudojamas su nespalvotais vaizdais, atitinkamai atnaujinamos lygio ir lango vertės.
Fiksuoti	Pradžia >		Fiksuokite vaizdus.
CEPH	Diagnozuoti >		Generuokite importuota 3D rentgeno nuotrauka pagrįstas 3D cefalogramas.
Tikrinti IO skenuotos nuotraukos sulgyjimą	3D įrankiai > Lygiuoti tūrius		Patikrinkite IO skenuotos nuotraukos sulgyjimą su 3D rentgeno nuotrauka.
Apskritimas	Piešti >		Brėžkite apskritimą.
Sujungti IO skenuotas nuotraukas	3D įrankiai > IO skenuotos nuotraukos nustatymas		Pridėdami naują intraoralinę skenuotą nuotrauką, nukopijuokite atitinkamus elementus ir lygiavimą iš esamos intraoralinės skenuotos nuotraukos.
Palyginti IO skenuotas nuotraukas	3D įrankiai >		Palyginkite intraoralines skenuotas nuotraukas, kad būtų galima stebėti dantenų recesiją, dantų nusidėvėjimą ir kitus skirtumus. Pasirinkite intraoralinę skenuotą nuotrauką, su kuria norite palyginti atskaitos skenuotą nuotrauką. Spustelėkite Baigti. Pagal numatytuosius nustatymus taikomas spalvotas atstumų žemėlapis. Išmaniajame skydelyje Peržiūros programa pasirinkite Perdanga, kad dvi skenuotos nuotraukos būtų rodomos sulgyjuotos viena su kita. Norėdami palyginimą išjungti, išjunkite jungiklį Skenuotų nuotraukų palyginimas.

Įrankis	Įrankių juostos kelias		Aprašas
Kurti ataskaitą	Užbaigti >		Ataskaitų kūrimas.
Tinkintas pjūvis	Diagnozuoti >		Bet kurioje 3D paciento darbo srities pjūvio peržiūros programoje nubrėžkite tinkintą (vainikinio / sagitalinio / ašinio) pjūvio liniją, kad sukurtumėte tinkintą pjūvį ir išsamiai patikrintumėte (KP)KT duomenis. Tai atlikite, pavyzdžiui, kai norite pažymėti ir patikrinti šaknies kanalus bei pridėti anotacijų. Perkelkite tinkintą pjūvį spustelėdami ir tempdami pjūvio liniją. Pasukite tinkintą pjūvį spustelėdami ir tempdami vieną iš pjūvio galų.
Apibrėžti SAŽS sritį	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką		Apibrėžkite SAŽS sritį. Patikrinkite krumplio galvutės padėtį, kaip pavaizduota vedlyje. Spustelėkite Baigta . Atidaroma SAŽS darbo sritis, kad galėtumėte palyginti kairiojo ir dešiniojo krumplių galvučių padėtis ir patikrinti smilkininio apatinio žandikaulio sąnario sritį.
Atstumas	Piešti >		Išmatuokite linijinį atstumą. Spustelėkite du taškus vaizde, kad apibrėžtumėte atstumą. Jei vaizdas dar nesukalibruotas, pirmą įveslote Atskaitinę vertę. Kalibravimo matavimas rodomas bendrame vaizde, o kalibravimo objektas įtraukiamas į išmanųjį skydelį Matomumas. Jei paspaudžiamas implantų galas arba peties taškas, matavimas bus susietas su tuo implantu. Perkeltą implantą, susietas matavimas atnaujinamas. Rodomas matavimas (ir jo tikslumas).
Nubrėžkite endo trajektoriją	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką		Apibrėžkite šaknies kanalo trajektorijas kiekvieno šaknies kanalo apikalinėje dalyje nurodydami atskaitos taškus.
Eksportuoti duomenis	Užbaigti >		Paciento duomenų eksportavimas.
Generuojami 3D modeliai	3D įrankiai >		Sukurkite apatinio žandikaulio, viršutinio žandikaulio ir segmentuotų dantų 3D modelius.
HV vertė	Piešti >		Išmatuokite taško HV vertę. Bendrame vaizde spustelėkite tašką, kad išmatuotumėte HV arba pilkąją vertę.

Įrankis	Įrankių juostos kelias		Aprašas
Nepaisyti visų	Diagnozuoti > Fokusavimo sritys		Nepaisykite aptiktų fokusavimo sričių.
Implantas	Planas >		Planuokite implantą rankiniu būdu.
Implanto kampas	Planas >		Išmatuokite kampą tarp implantų.
Linijos storis	Piešti >		Pasirinkite anotacijos linijos storį.
Apatinis žandikaulis	Piešti > Įtraukti plokštumą		Įtraukite apatinio žandikaulio atskaitos plokštumą.
Kaukės tūris	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką		Išvalykite paciento modelį iškirpdami nereikalingas dalis. Spustelėkite tašką scenoje, kad pradėtumėte brėžti aplink šalintiną pjūvį. Norėdami patvirtinti, spustelėkite dešinįjį pelės klavišą. Pastaba Norėdami atkurti pradinį paciento modelį, išmaniajame skydelyje Matomumas šalia 3D vaizdavimas spustelėkite Daugiau parinkčių... ir pasirinkite Iš naujo nustatyti 3D modelį .
Naujas implantų planas	Planas > Automatinis planas		Įtraukite kitą implantų planą. Kai užbaigsite, implantų planus perjunkite naudodamiesi išmaniuoju skydeliu Implantų planas .
„NobelGuide“	Planas >		Sukurkite ir užsisakykite „NobelGuide“ iš „Nobel Biocare“.
OPG / PAN	Diagnozuoti >		Generuokite OPG. Panoraminis (pjūvio) vaizdas įtraukiamas į paciento duomenis kaip dvimatis vaizdas. Sugeneruotas vaizdas atidaromas darbo srityje 3D panoraminė .
Užsakyti gaminius	Užbaigti >		Užsisakykite implantų plano elementus iš „Nobel Biocare“ arba nukopijuokite gaminių numerius.
Lygiagrečiai išdėstyti visus	Planas >		Visus to paties žandikaulio implantus išdėstykite lygiagrečiai pasirinktam implantui.
Rašiklis	Piešti >		Rašikliu brėžkite segmentines linijas. Visos linijos atsiras kaip viena anotacija išmaniajame skydelyje Matomumas .
Pieštukas	Piešti >		Brėžkite laisvos formos linijas.

Įrankis	Įrankių juostos kelias		Aprašas
Pjūvio storis	Pradžia >		Nustatykite pjūvio storį trimatėje pjūvio peržiūros programoje. Norėdami nustatyti rentgeno nuotraukos storį, spustelėkite ir horizontaliai vilkite trimatę pjūvio peržiūros programą. Norėdami užbaigti, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu. Pastaba Norėdami nustatyti numatytąjį pjūvio storį, DTX Studio Home nustatymuose ar DTX Studio Clinic nuostatose atverkite skirtuką Vaizdo nustatymai. Viršutiniame dešiniame išskleidžiamajame meniu pasirinkite 3D pjūviai, 3D panoraminis arba Dantis. Išskleidžiamajame meniu Pjūvio storis pasirinkite pageidaujamą storį.
Paleisti automatinę sąranką	3D įrankiai > Nustatyti 3D rentgeno nuotrauką		Naudodamiesi MagicAssist algoritmu automatiškai nustatykite (KP)KT duomenis ir apatinio žandikaulio nervo anotaciją. Visus automatiškai aptinkamus taškus galima koreguoti rankiniu būdu. 3D rentgeno nuotraukos, kuriose yra automatiškai aptiktų atributų, apatiniame dešiniame kampe pažymėtos etikete „Automatinė“.
Paleisti automatinę sąranką	3D įrankiai > IO skenuotos nuotraukos nustatymas		Automatiškai nustatykite intraoralines skenuotas nuotraukas.
Paleisti aptikimą	Diagnozuoti > Fokusavimo sritys		2D intraoraliniuose rentgeno vaizduose automatiškai aptikite fokusavimo sritis, kuriose gali būti gauta dantų duomenų (žr. 52 psl.).
Ekrano kopija	Pradžia >		Užfiksukite ekrano kopiją. Ji pridėdama prie darbo srities Klinikiniai vaizdai, išmaniojo skydelio Maketas ir DTX Studio Home Paciento duomenys. Užfiksotą ekrano kopiją galima pridėti prie ataskaitos (žr. 44 psl.).
Segmentas	Piešti >		Išmatuokite nuoseklius atstumus. Spustelėkite pirmą tašką. Tuomet spustelėkite kitus taškus. Norėdami užbaigti, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu. Jei paspaudžiamas implantų galas arba peties taškas, matavimas bus susietas su tuo implantu. Perkeliant implantą, susietas matavimas atnaujinamas.
„SmartFocus“	Pradžia >		Pasirinkite dantį ir parodykite visus su juo susijusius duomenis.

Įrankis	Įrankių juostos kelias		Aprašas
Dėmesio centras	Pradžia >		Padidinkite vaizdo sritį (numatytasis nustatymas) arba palyginkite pritaikytus filtrus su pradiniu vaizdu. Didinimo lygį koreguokite minuso (-) ir pliuso (+) klavišais. „macOS“ sistemoje priartinkite „Shift“ + pliuso (+) klavišais. Norėdami pakeisti dėmesio centro veikseną, eikite į DTX Studio Clinic ypatybes.
Chirurginis gidas	Planas >		Sukurkite chirurginį gidą vietinei gamybai. Apibrėžkite chirurginio gido diapazoną, nustatykite tinkamą movos tipą ir spustelėkite Toliau. Spustelėkite Baigta .
Tekstas	Piešti >		Įtraukite tekstą į vaizdą.
Rasti nervo eigą	Diagnozuoti > 3D segmentacija		Nurodykite nervo kanalą. Spustelėkite pirmąjį tvirtinimo tašką. Tada spustelėkite visus kitus tvirtinimo taškus. Norėdami užbaigti, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu. Nervo kanalo anotaciją peržiūros programoje koreguokite perkeldami tvirtinimo taškus. Visi tvirtinimo taškai išmaniajame skydelyje Matomumas sudarys vieną liniją.
Viršutinis žandikaulis	Piešti > Įtraukti plokštumą		Įtraukite viršutinio žandikaulio atskaitos plokštumą.
Vertikali	Piešti > Įtraukti plokštumą		Įtraukite vertikalią atskaitos plokštumą.

Gautų diagnostikos duomenų įtraukimas

Naudodamiesi išmaniuoju skydeliu **Gauti duomenys** galite pasižymėti dantų patologijos, žandikaulių problemų ar kitus atskiros danties gautus diagnostinius duomenis.

- Norėdami dančiui įtraukti iš anksto apibrėžtus gautus diagnostinius duomenis, išmaniajame skydelyje **Gauti duomenys** naudokite paieškos laukelį **Įtraukti gautus duomenis**, kad pasirinktumėte arba įvestumėte gautus duomenis.
- Norėdami įtraukti pasirinktinius diagnostinius duomenis, paieškos laukelyje **Pridėti gautus duomenis** įrašykite jų pavadinimą ir spustelėkite „Enter“.
- Galite įtraukti ekrano kopiją, užvesdami pelės žymeklį ant gautų duomenų, spustelėdami rodyklę dešinėn, kad atidarytumėte išsamios informacijos skydelį, tada dalyje **Ekrano kopijos** spustelėdami pliuso piktogramą.
- Išsamios informacijos skydelyje spustelėkite išskleidžiamąjį meniu, kad priskirtumėte būseną.

- Norėdami pašalinti gautus duomenis, užveskite pelės žymeklį ant jų, spustelėkite rodyklę dešinėn, spustelėkite **Daugiau parinkčių...** ir pasirinkite **Naikinti**.

Pastabos

- Danties darbo srityje būseną taip pat vizualiai rodoma dantų schemeje.
- Jei gauti duomenys įtraukiami danties darbo srityje, jie pridedami prie konkretaus danties.
- Jei duomenys sukurti kitoje darbo srityje, spustelėkite danties numerio vietaženklį ir įveskite danties numerį, kad priskirtumėte gautus duomenis prie konkretaus danties.

Fokusavimo srities aptikimas

Pastaba

Ši funkcija gali būti parduodama ar licencijuojama ne visose šalyse.

DTX Studio Clinic leidžia 2D intraoraliniuose rentgeno (IOR) vaizduose automatiškai aptikti fokusavimo sritis. IOR fiksavimo prietaisai gali būti skaitmeniniai jutikliai arba analoginės PSP plokštės.

Fokusavimo srities aptikimas yra dirbtiniu intelektu pagrįstas sąsūkinio neuroninio tinklo algoritmas, skirtas vaizdams segmentuoti, kad būtų galima nustatyti dominančias sritis, kuriose gali būti gautų dantų duomenų ar fiksavimo artefaktų.


Palaikomos toliau nurodytos aptikimo sritys

- Dantų duomenų fokusavimo sritys: ėduonis, viršūnės pažeidimas, šaknies kanalo defektas, kraštelio defektas, kaulo praradimas ir dantų akmenys.
- Fiksuojant artefaktus: persidengimai ir įbrėžimai.

Fokusavimo srities aptikimo naudojimas

Fiksuojant arba importuojant intraoralinius vaizdus fokusavimo srities aptikimo funkcija paleidžiama automatiškai siekiant patikrinti, ar vaizduose nėra sričių, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Tai rodo virš vaizdų nubrėžta mėlyna linija. Jei MagicAssist nustatymuose tai išjungta, meniu juostoje **Diagnozuoti** spustelėkite **Fokusavimo sritys > Paleisti aptikimą**.

- Jei vaizde yra galimų gautų dantų duomenų, viršutiniame kairiajame vaizdo kampe bus rodoma mėlyna **Fokusavimo srities aptikimo** piktograma (🔍 9) ir gautų dantų duomenų skaičius.
- Kai vaizde mėlynos piktogramos nėra, galimų gautų dantų duomenų nebuvo aptikta arba vaizdas nebuvo patikrintas. Tai nereiškia, kad galimų gautų dantų duomenų nėra. Naudojant šią funkciją reikia būti atsargiems.
- Jei paveikslėlyje matomas galimas kelių dantų persidengimas ir (arba) įbrėžimai, apatiniame dešiniajame kampe rodomas pranešimas. Spustelėkite **Peržiūra** norėdami patikrinti pranešimą.

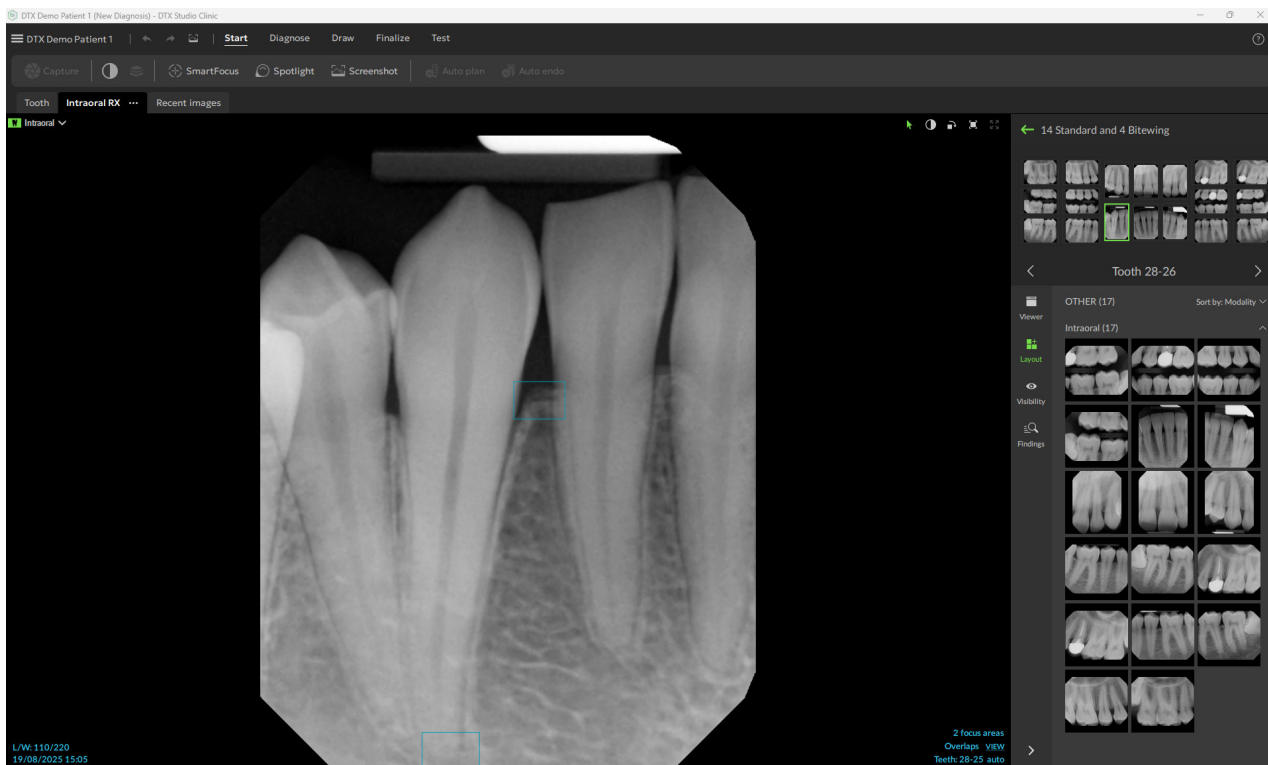


Fokusavimo srities aptikimo valdymas

1. Kai fokusavimo srities aptikimas baigtas, du kartus spustelėkite vaizdą su fokusavimo srities aptikimo piktograma.


Pastaba

Ši funkcija gali būti parduodama ar licencijuojama ne visose šalyse.


- Fokusavimo sritys intraoraliniuose vaizduose vizualizuojamos mėlynu stačiakampiu.

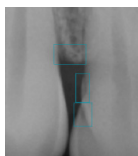

- Užveskite pelės žymeklį ant fokusavimo srities, kad būtų rodomas radinys su konkrečia jo spalva, danties numeriu (jei žinomas) ir galimų gautų dantų duomenų tipu.

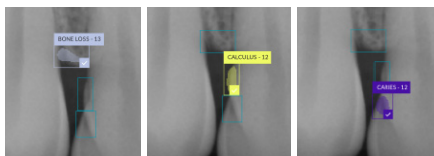

Užbaigę analizę, fokusavimo sritį spustelėkite kairiuoju pelės klavišu, jei galimus gautus dantų duomenis norite priimti, arba dešiniuoju pelės klavišu, jei juos norite atmesti.

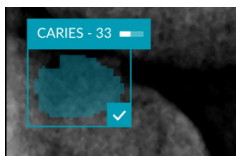

2. Jei pasirinksite juos priimti, fokusavimo sritis bus automatiškai paversta gautais diagnostiniais duomenimis. Jie bus įtraukti į išmanųjį skydelį [Gauti duomenys](#).

Fokusavimo sritys taip pat išvardytos išmaniajame skydelyje [Matomumas](#), o išmaniojo skydelio matomumo funkcijos matomumo piktogramomis galima nustatyti, kad jos būtų rodomos arba paslėptos.

Implantų ir gydymo planavimas

Įrankių juostoje **Planas** pateikiami gydymo planavimo įrankiai. Šiuos įrankius galima naudoti bet kurioje darbo srityje, kurioje yra (KP)KT duomenų arba intraoralinė skenuota nuotrauka, sulgygiuota su 3D rentgeno nuotrauka.

Automatinis planas

Kad programinė įranga generuotų pradinį vieno danties arba dviejų gretimų dantų implantavimo planą, intraoralinė skenuota nuotrauka turi būti sujungta su 3D rentgeno nuotrauka.


Pastaba

Norint atlikti automatinio planavimo veiksmą, pacientas turi turėti bent tris dantis. Tačiau sprendimas yra specialiai sukurtas ir optimizuotas vienam implantui, taip pat dviem gretimiesiems implantams arba tiltui ant dviejų gretimų dantų.

1. Meniu juostoje spustelėkite **Planas**.
2. Spustelėkite **Automatinis planas**.
3. Jei reikia, pakoreguokite sugeneruotą implanto planą ir spustelėkite **Kitas**.
4. Patikrinkite aptiktus dantis ir spustelėkite **Baigti**.
5. Vaizde rodomos apskaičiuotos implantų padėties. Išmaniajame skydelyje implantas pažymėtas **Auto**, kol bus pakoreguota jo padėtis.

Implanto įdėjimas

1. Meniu juostoje spustelėkite **Planas**.
2. Spustelėkite implanto piktogramą ().
3. Nurodykite implanto peties ir galiuko taškus.
4. Išmaniajame skydelyje **Implantų planas** nustatykite implanto duomenis ir pasirinkite implanto prekės ženklą bei tipą. Sąraše rodoma iki aštuonių neseniai naudotų implantų. Norėdami pasirinkti kitą implanto prekės ženklą ar tipą, pasirinkite **+ Implantas**.
5. Užveskite pelės žymeklį ant implanto, kad būtų rodomi galimi regionai. Žymeklis pasikeičia, nurodydamas perkėlimo () arba sukimo () režimą. Spustelėkite ir vilkite, kad perkeltumėte arba pasuktumėte implantą. 3D peržiūros programoje laikykite nuspaudę Ctrl (Cmd „Mac“ kompiuteryje) ir vilkite, kad implantą perkeltumėte arba pasuktumėte išilgai jo ašies.

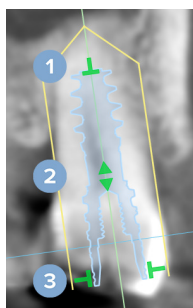

- 1 Sureguliuokite ilgį.
- 2 Pasukite į šoną arba aukštyn.
- 3 Sureguliuokite skersmenį.

Pastaba

Pakeitę implantą ar tvirtinamąjį kaištį nepamirškite atnaujinti paruošto chirurginio gido. Perkelti pelės žymeklį į išmaniojo skydelio skirtuke **Implantų planas** esančio elemento ir pasirinkite **Atnaujinti**.

Tvirtinamojo kaiščio įtraukimas

1. Meniu juostoje spustelėkite [Planas](#).
2. Spustelėkite tvirtinamojo kaiščio piktogramą ()
3. Nurodykite tvirtinamojo kaiščio petį ir galiuko tašką.
4. Užveskite pelės žymeklį ant tvirtinamojo kaiščio, kad būtų rodomi galimi regionai. Žymeklis pasikeičia, nurodydamas perkėlimo () arba sukimo () režimą. Spustelėkite ir vilkite, kad perkeltumėte arba pasuktumėte tvirtinamąjį kaištį. 3D peržiūros programoje laikykite nuspaudę Ctrl (Cmd „Mac“ kompiuteryje) ir vilkite, kad tvirtinamąjį kaištį perkeltumėte arba pasuktumėte išilgai jo ašies.

Visų implantų įdėjimas lygiagrečiai

Norėdami įdėti implantą lygiagrečiai etaloniniam implantui, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite implantą, kurį norite įdėti lygiagrečiai.
2. Pasirinkite [Lygiagrečiai](#).
3. Pasirinkite etaloninį implantą.

Pastaba

Lygiagrečiai dedama atrama arba implanto platforma.

Norėdami lygiagrečiai įdėti visus implantus į tą patį žandikaulį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Pažymėkite implantą, kurį naudosite kaip nuorodą.
2. Meniu juostoje spustelėkite [Planas](#).
3. Spustelėkite [Lygiagrečiai išdėstyti visus](#).

Implantų arba tvirtinamųjų kaiščių užrakinimas

Norėdami užfiksuoti implantą arba tvirtinamąjį kaištį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą vienoje iš peržiūros programų ir pasirinkite atitinkamą parinktį.

Chirurginis gidas

Sudarius implanto planą, galima paruošti chirurginį gidą gamybai savo įmonėje.

Chirurginio šablono paruošimas

1. Eikite į darbo sritį [Implantas](#).
2. Įrankių juostoje [Planas](#) spustelėkite [Chirurginis gidas](#).
3. Apibrėžkite chirurginio gido diapazoną, nustatykite tinkamą movos tipą ir spustelėkite [Kitas](#).
4. Pridėkite patikros langą, pridėkite etiketę, nustatykite specialisto nuostatas ir spustelėkite [Baigti](#).
5. Žemos skiriamosios gebos chirurginis gidas įtraukiamas į vaizdą mėlyna spalva.

Chirurginio gido užbaigimas

Kai chirurginio gido dizainas bus paruoštas, sugeneruokite aukštos skiriamosios gebos chirurginį gidą spausdinimui.

1. Baigus ankstesnį vedlį, bus rodomas patarimas. Spustelėkite [Generuoti](#).
Arba išmaniajame skydelyje [Implantų planas](#) užveskite pelės žymeklį ant chirurginio gido ir pasirinkite [Generuoti gidą](#).
2. Sistema patikrina, ar turite tinkamą licenciją arba modulio „Implantavimo plėtinys“ prenumeratą, leidžiančią kurti gidus.
3. Pasirinkite norimas nuostatas ir spustelėkite [Kitas](#).
4. Atidžiai perskaitykite sutartį. Jei sutinkate, spustelėkite [Perskaičiau ir sutinku su visomis pirmiau pateiktomis nuostatomis](#).
5. Spustelėkite [Generuoti](#).
6. Rodoma užsakymo apžvalga. Spustelėkite [Pateikti užsakymą](#).
7. Chirurginis gidas ir instrukcijų dokumentai įtraukiami į paciento įrašą.
Pastaba
Naudojant DTX Studio Home chirurginį gidą galima siųsti „SprintRay“ naudojant veiksmą [Bendradarbiauti](#).
8. Norėdami perskaičiuoti chirurginį gidą su kitais spausdintuvo parametrais, spustelėkite **Daugiau parinkčių ...** ir pasirinkite [Atkurti gidą](#). Šis perskaičiavimas yra nemokamas.

„NobelGuide“

Kai implanto planas bus baigtas, galima parengti „NobelGuide“ gamybai „Nobel Biocare“.

„NobelGuide“ kūrimas

1. Meniu juostoje spustelėkite [Planas](#).
2. Spustelėkite [NobelGuide](#).
3. Jei reikia, pakoreguokite „NobelGuide“ pasiūlymą ir spustelėkite [Kitas](#).
4. Patikrinkite „NobelGuide“ dizainą ir spustelėkite [Baigti](#).
5. „NobelGuide“ rodomas vaizde ir išmaniajame pulte.

Užsisakykite „NobelGuide“

1. Jei ankstesniame vedlyje buvo pasirinkta [Rodyti užsakymo dialogo langą baigiant vedlį](#), būsite automatiškai nukreipti į užsakymo vedlį.
Arba spustelėkite [Užsakyti](#) patarime, kuris pasirodo baigus ankstesnį vedlį.
Arba išmaniajame skydelyje [Implantų planas](#) užveskite pelės žymeklį ant „NobelGuide“ ir spustelėkite [Užsakyti „NobelGuide“](#).
2. Pasirinkite arba patikrinkite iš anksto užpildytą pristatymo informaciją ir įveskite trūkstamą informaciją. Spustelėkite [Kitas](#).

Pastaba

Įvedus [specialią pastabą dėl gamybos](#), užsakymų apdorojimo laikas gali pailgėti.

3. Pasirinkite [Aš perskaičiau ir sutinku su visa aukščiau pateikta informacija](#), kad patvirtintumėte, jog patikrinote ir sutinkate su taisyklėmis ir nuostatomis.
4. Rodoma užsakymo apžvalga. Norėdami tęsti, spustelėkite [Pateikti užsakymą](#).
5. „NobelGuide“ užsakymas pridedamas prie DTX Studio Home paciento įrašo skirtuko [Užsakymai](#). Ten spustelėkite [Peržiūrėti užsakymą](#), kad vykdytumėte tolesnius veiksmus, susijusius su užsakymu DTX Studio Go.

Užsisakykite implantų detales

Norėdami užsisakyti produktus implantų planui, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Meniu juostoje spustelėkite [Užbaigti](#).
2. Spustelėkite [Užsakyti produktus](#). Produktų numeriai nukopijuojami į iškarpinę.
3. Spustelėkite [Tęsti](#), kad eitumėte į „Nobel Biocare“ internetinę parduotuvę.

Ataskaitos

Ataskaitų kūrimas

Norėdami sukurti ataskaitą su gautais duomenimis arba kaip šabloną su pacientais susijusiems laiškam, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Meniu juostoje spustelėkite [Užbaigti](#).
2. Spustelėkite [Kurti ataskaitą](#).
3. Pasirinkite ataskaitos šabloną.
4. Pasirinkite [Įtrauktinų vaizdų](#) laiko intervalą.
5. Spustelėkite [Eksportuoti ataskaitą](#).
6. Ataskaita eksportuojama redaguojamu .odt formatu ir atidaroma numatytoje teksto rengyklėje (pvz., „Microsoft Office“, „LibreOffice“, „OpenOffice Writer“).
7. Atlikite pakeitimus, jei reikia.
8. Ataskaitą išsaugokite.

Pasirinktinių odontologijos klinikos logotipų įtraukimas

Pagal numatytuosius nustatymus ataskaitos antraštėje įterpiama DTX Studio Clinic piktograma. Norėdami įtraukti adaptuotą logotipą, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Dalyje DTX Studio Home [Nustatymai](#) spustelėkite [Bendra](#).
2. Spustelėkite [Ieškoti](#).
3. Pasirinkite naują logotipą.
4. Spustelėkite [Atidaryti](#).
5. Spustelėkite [Gera!](#)

Atidarymas DTX Studio Implant

DTX Studio Clinic ir DTX Studio Implant sujungimas

1. Dalyje DTX Studio Home [Nustatymai](#) spustelėkite [DTX Studio Implant](#).
2. Spustelėkite [leškoti](#), eikite į „DTX Studio Implant“ diegimo aplanką, pasirinkite .exe failą ir spustelėkite [Atidaryti](#).

Pastaba

Nustatykite paciento duomenų vietą, jei paciento duomenis į paciento įrašą programoje DTX Studio Implant tektų įtraukti rankiniu būdu, t. y. jei paciento įrašas jau yra DTX Studio Implant arba jei intraoralinės skenuotos nuotraukos eksportuotos į DTX Studio Implant, tačiau nesulygiuotos su skenuota 3D rentgeno nuotrauka.

3. Spustelėkite [Gerei](#).

DTX Studio Implant paleidimas

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
Pastaba
Turi būti pasiekama bent viena šio paciento 3D rentgeno nuotrauka.
2. Spustelėkite [Implant](#) .
3. Pasirinkite [Atidaryti esamą pacientą](#) arba [Eksportuoti į naują pacientą](#).
4. Jei yra daugiau nei viena 3D rentgeno nuotrauka, pasirinkite atitinkamą plytelę.
5. Spustelėkite [Eksportuoti](#).
6. Rodomas sėkmingo atlikimo pranešimas. Spustelėkite [Gerei](#).
7. Paciento įrašas sukuriamas ir (arba) atidaromas DTX Studio Implant.

Užsakymai ir bendradarbiavimas su partneriais

Chirurginės operacijos plano, chirurginio gido arba restauravimo užsakymas

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite [Bendradarbiauti](#).
3. Pelės žymeklį užveskite ant [Chirurginės operacijos planas](#), [Chirurginis gidas](#) arba [Restauravimas](#).
4. Spustelėkite [Pasirinkti](#).
5. Pasirinkite paciento duomenis, kurie bus siunčiami laboratorijai arba gydytojui.
6. Spustelėkite [Tęsti](#).
7. Užsakymo projektas sukuriamas DTX Studio Go. Įtraukite trūkstantis duomenis ir išsiųskite užsakymą susijusiai laboratorijai arba gydytojui.
8. Norėdami peržiūrėti visus šio paciento užsakymus, spustelėkite paciento įrašo skirtuką [Užsakymai](#).

Pastaba

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie šiose naudojimo instrukcijose aprašyti produktai dėl priežiūros institucijų reikalavimų gali būti parduodami ar licencijuojami ne visose šalyse.

Ryšio su partneriu nustatymas

Kai kurie trečiųjų šalių partneriai gali teikti paslaugas, tiesiogiai integruotas į DTX Studio Clinic. Užsakymą galima sukurti programinėje įrangoje DTX Studio Clinic ir pateikti partnerio sistemai.

Jei jūsų regione paslaugų teikėjų yra, pirmiausia programoje DTX Studio Go susiekite savo partnerio paskyrą.

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite [Bendradarbiauti](#).
3. Pelės žymeklį užveskite ant partnerio pavadinimo ir pasirinkite [Nustatyti](#).
4. Spustelėkite [Tęsti](#).
5. Ryšį nustatykite vadovaudamiesi DTX Studio Go pateikiamomis instrukcijomis.

Užsakykite tiesiogiai iš partnerio

Kai programoje DTX Studio Go prijungsite partnerio paskyrą, galėsite naudotis jo paslaugomis.

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite [Bendradarbiauti](#).
3. Pelės žymeklį užveskite ant partnerio pavadinimo ir spustelėkite [Pasirinkti](#).
4. Pasirinkite paciento duomenis, kuriuos norite siųsti.
5. Spustelėkite [Tęsti](#).
6. Įkeliami failai.
7. Užsakymo procesą tęskite partnerio svetainėje.
8. Pateikus užsakymą, jis įtraukiamas į paciento įrašo skirtuką [Partnerių atvejai](#).

Kaip peržiūrėti partnerio bylą arba įtraukti naujų duomenų

1. DTX Studio Home pasirinkite paciento įrašą pacientų sąrašė.
2. Spustelėkite skirtuką [Užsakymai](#).
 - Spustelėkite [Žiūrėti atvejį](#), kad atvejį atidarytumėte partnerio svetainėje.
 - Spustelėkite [Pridėti naujus duomenis](#), kad į atvejį įtrauktumėte naujų duomenų.



Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Sweden (Švedija)
www.nobelbiocare.com

Platintojas Naujojoje Zelandijoje:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
New Zealand (Naujoji Zelandija)
Telefonas: +64 0800 441 657

Užsakovas ir platintojas:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Suite 4.02, Level 4, Building A,
1 Eden park drive Macquarie Park NSW 2113
Australia (Australija)
Telefonas: +61 1800 804 597

Platintojas Turkijoje:

EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Seba Office Boulevard Ayazağa Mah.
Mimar Sinan Sk. No:21 A38
Sarıyer/İstanbul (Stanbulas)
DEN-EOT-info@envistaco.com

**Importuotojas / atstovas Šveicarijoje:**


Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Switzerland (Šveicarija)

Igaliotasis atstovas Ukrainoje:

TOV Inspe
42 Brativ Mikhnovskykh Street
79018, Lviv
Ukraine (Ukraina)
Tel. / faksas: +38 (032) 240 37 05
El. paštas: info@inspe.ua



UA.TR.099

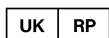**Atsakingasis asmuo JK:**

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
United Kingdom (Jungtinė karalystė)



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com